

	INSTRUÇÃO DE USO Prótese Parcial para Cabeça de Rádio	Código:	IU.0086
		Revisão:	03
		Data:	20/10/2026

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Nome Técnico: Componente radial para artroplastia de cotovelo

Nome Comercial: Prótese Parcial para Cabeça de Rádio

Nº Registro ANVISA: 80083650086

Matéria-Prima: Liga Co-28Cr-6Mo - ASTM F75

Produto Estéril

Método de Esterilização: Óxido de Etileno (ETO)

Validade: 5 anos

Dispositivo Médico de Uso Único – PROIBIDO REPROCESSAR


1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os modelos comerciais que compõem a família da Prótese Parcial para Cabeça de Rádio são classificados como produto médico implantável invasivo cirurgicamente de uso em longo prazo.

A Prótese Parcial para Cabeça de Rádio está indicada para reconstruções de fratura cominutiva e artrose radiocapitelar progressiva no corpo humano. Sua finalidade é restaurar ou evitar a perda de estabilidade do cotovelo, amplitude de movimento, e raio de comprimento.

O produto foi desenvolvido para suportar cargas nos dois tipos de movimentos: flexão-extensão e pronação-supinação. Desta forma, auxilia na reconstrução óssea, e também na transmissão ou alívio de cargas mecânicas sobre os segmentos lesados.

Os implantes possuem variações dimensionais para se adequar da melhor maneira, à estrutura óssea da cabeça do rádio, os quais são:

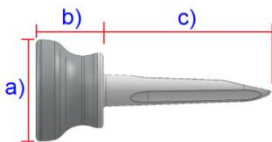Imagem ilustrativa	a) Diâmetro da cabeça	b) Altura da cabeça	c) Comprimento da haste
	19 mm	9 mm	30 mm
		12 mm	
		15 mm	
		18 mm	
		21 mm	

A Prótese Parcial para Cabeça de Rádio é um componente radial não modular monocomponente metálico. Sua extremidade é chanfrada para facilitar a inserção no canal medular. A cabeça da prótese é altamente polida para permitir um melhor desempenho da articulação. Este produto é destinado à artroplastia parcial da articulação, primária ou de revisão, desenvolvido para ser fixado ao canal medular radial através de cimento ósseo.

	INSTRUÇÃO DE USO Prótese Parcial para Cabeça de Rádio	Código:	IU.0086
		Revisão:	03
		Data:	20/10/2026

2. APRESENTAÇÃO COMERCIAL

Os modelos comerciais que compõem a família de Prótese Parcial para Cabeça de Rádio são disponibilizados para comercialização unitariamente nas seguintes dimensões:

Imagem ilustrativa	Código	Descrição
	0323019-009	PRÓTESE PARCIAL PARA CABEÇA DE RÁDIO - DIAM.19X09MM
	0323019-012	PRÓTESE PARCIAL PARA CABEÇA DE RÁDIO - DIAM.19X12MM
	0323019-015	PRÓTESE PARCIAL PARA CABEÇA DE RÁDIO - DIAM.19X15MM
	0323019-018	PRÓTESE PARCIAL PARA CABEÇA DE RÁDIO - DIAM.19X18MM
	0323019-021	PRÓTESE PARCIAL PARA CABEÇA DE RÁDIO - DIAM.19X21MM

A correta seleção dos modelos comerciais e medidas da família da Prótese Parcial para Cabeça de Rádio a serem implantados é responsabilidade do cirurgião que também é responsável pela técnica adotada, devendo este estar familiarizado com o material, o método de aplicação e o procedimento cirúrgico a ser adotado.

O êxito do procedimento está ligado à correta seleção, posicionamento e fixação dos dispositivos que é de responsabilidade do médico que avalia o paciente e decide quais os implantes a serem utilizados. Está vinculado também o rigoroso cumprimento dos cuidados pós-operatórios recomendados pelo médico responsável.

	INSTRUÇÃO DE USO Prótese Parcial para Cabeça de Rádio	Código:	IU.0086
		Revisão:	03
		Data:	20/10/2026

2.1. Acessórios e Componentes Ancilares

A família da Prótese Parcial para Cabeça de Rádio não possui acessórios ou componentes ancilares.

2.2. Material de Apoio

O Quadro apresentado a seguir, refere-se aos instrumentais utilizados como apoio para a implantação da Prótese Parcial para Cabeça de Rádio. Os instrumentais abaixo não são objetos desse registro, ou seja, possuem notificação própria na ANVISA, portanto, devem ser adquiridos separadamente e sempre fabricados pela Sartori ou previamente validados, para não ocorrer incongruência entre os encaixes.

Anvisa N°	Nome comercial
80083650056	INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - POLÍMERO
80083650058	INSTRUMENTAL CIRÚRGICO – AÇO INOXIDÁVEL III
80083650059	INSTRUMENTAL CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO E CORTANTE – AÇO INOXIDÁVEL

Os instrumentais são fornecidos descontaminados, porém não esterilizados. A esterilização inadequada do instrumental cirúrgico pode causar infecção cruzada.

Os instrumentais cirúrgicos estão sujeitos a desgastes durante a sua utilização normal, podendo, portanto, quebrar ou se desgastar. Os instrumentais devem ser verificados regularmente para análise de possíveis desgastes e danos.

Para mais informações acerca do instrumental, consulte o distribuidor/fornecedor do produto.

3. COMPOSIÇÃO

As próteses são fabricadas a partir da Liga de Co-28Cr-6Mo devido às suas propriedades que o torna material ideal para a produção de dispositivos médicos implantáveis, conhecido pela sua excelente biocompatibilidade, resistência à corrosão em ambiente biológico e resistência mecânica, comprovada por um vasto histórico, amplamente descrito na literatura mundial.

A liga de Co-28Cr-6Mo cumpre os requisitos especificados pela norma ASTM F75 – Standard specification for Cobalt-28 Chromium-6 Molybdenum alloy casting and

	INSTRUÇÃO DE USO Prótese Parcial para Cabeça de Rádio	Código:	IU.0086
		Revisão:	03
		Data:	20/10/2026

casting alloy for surgical implants (UNS R30075), caracterizada como uma liga com propriedades mecânicas e metalúrgica favoráveis para esse fim.

4. INDICAÇÃO DE USO/ FINALIDADE

A Prótese Parcial para Cabeça de Rádio está indicada nos casos de fratura cominutiva da cabeça do rádio associada à:

- Instabilidade do cotovelo;
- Ruptura do ligamento colateral medial;
- Lesão do ligamento colateral lateral ulnar;
- Monteggia equivalente com fratura do olécrano e rádio;
- Fratura extensa do coronóide;
- Lesão de Essex-Lopresti (lesão da membrana interóssea rádio-ulnar e articulação rádio-ulnar distal).

O critério de seleção do tamanho do implante a ser utilizado vai depender do estado do osso e da técnica a ser adotada para realização do procedimento. Estas condições são de responsabilidade do médico que avalia o paciente e decide qual implante deverá ser utilizado.

Os implantes foram projetados para utilização nas circunstâncias acima descritas, de modo que quaisquer outras utilizações são consideradas contraindicadas.

4.1. Princípio de Funcionamento/ Mecanismo de Ação

A ação da prótese no osso é a de estabilizar a articulação do cotovelo e proporcionar uma colocação segura em relação às estruturas adjacentes.

	INSTRUÇÃO DE USO Prótese Parcial para Cabeça de Rádio	Código:	IU.0086
		Revisão:	03
		Data:	20/10/2026

5. PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO MÉDICO, ASSIM COMO SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

5.1. Contraindicações

A seguir são listadas as contraindicações para a utilização dos implantes, ficando a cargo do cirurgião responsável, após um estudo minucioso do caso, a indicação do procedimento cirúrgico:

- Infecção ativa;
- Condição clínica pré-operatória desfavorável;
- Lesões neurológicas graves;
- Pacientes com sensibilidade a corpos estranhos, sendo que nestes casos testes deverão ser realizados;
- Pacientes que não querem ou estão impossibilitados de seguir as instruções pós-operatórias devido às condições que apresentam (mental ou física);
- Pacientes que fazem uso de substâncias entorpecentes, alcoólicas ou fumo;
- Pacientes com doença degenerativa avançada (por ex. osteoporose) e/ou outras afecções ósseas que possam comprometer a estabilidade da fixação e a vida útil do implante;
- Pacientes com estado geral comprometido e/ou imunodeprimidos impossibilitados de se submeter a um procedimento cirúrgico;
- Desordens metabólicas ou sistêmicas, ou tratamentos médicos que levam à deterioração progressiva dos ossos (terapias com corticoides).

5.2. Precauções e Advertências

- Alertamos que é necessário observar a correlação entre a versão da Instrução de Uso disponível no site, ou impressa, com a versão indicada no rótulo do produto;
- Devido às facilidades técnicas que proporcionam, as próteses parciais de cabeça de rádio vêm sendo muito utilizadas nas cirurgias ortopédicas, sendo assim as indicações e o conhecimento sobre a técnica são de responsabilidade do

	INSTRUÇÃO DE USO Prótese Parcial para Cabeça de Rádio	Código:	IU.0086
		Revisão:	03
		Data:	20/10/2026

cirurgião, restringindo-se a ele, portanto, estas instruções a esclarecimentos sobre detalhes e particularidades dos implantes;

- O produto somente deve ser utilizado por equipes cirúrgicas especializadas na colocação de próteses parciais de cabeças de rádio, sendo de responsabilidade do cirurgião a escolha e domínio da técnica a ser aplicada;
- Condições inadequadas de armazenamento, manipulação ou exposição à luz solar ou umidade do produto pode provocar danos mecânicos, perda de informações do rótulo e perda da esterilização acarretando problemas ao paciente;
- As escolhas inadequadas dos implantes a serem utilizadas, manipulação e técnica de aplicação podem provocar tensões excessivas sobre o implante, podendo acarretar a falência por fadiga, quebra, afrouxamento e migração dos mesmos;
- O design do produto foi desenvolvido para fixação na cabeça do rádio, para auxiliar na reconstrução óssea, sendo que a utilização para fixação de outras estruturas representa um risco e está contraindicada;
- Deve ocorrer técnica cirúrgica precisa, pois dela depende os resultados clínicos e a durabilidade dos implantes;
- Pode ocorrer afrouxamento do implante, quando carregado além de sua capacidade funcional;
- Este tipo de procedimento cirúrgico apresenta riscos de lesões vasculares, neurais, entre outros;
- Pacientes cuja atividade exija esforços ou práticas esportivas durante o período pós-operatório, contrariando as informações médicas, podem contribuir fortemente para a falha do implante;
- Pacientes que tendem a desobedecer às orientações médicas e restrições pós-operatórias, como idosos, indivíduos com alterações neurológicas ou dependentes químicos, representam um risco maior para falha do implante;
- O paciente deve fazer acompanhamento médico periódico para checar as condições do implante, osso e do tecido adjacente;
- O produto não deve ser utilizado caso não se consiga um suporte ósseo adequado que garanta a estabilidade do implante;
- À critério médico pode ser utilizado antibióticos em casos onde haja uma predisposição para ocorrência de infecções;

	INSTRUÇÃO DE USO Prótese Parcial para Cabeça de Rádio	Código:	IU.0086
		Revisão:	03
		Data:	20/10/2026

- A prótese não deve ser utilizada com instrumentais ou implantes de outros fabricantes, para que não ocorra incongruência entre eles;
- A abertura da embalagem deverá ser feita somente por pessoal habilitado a realizar esse procedimento, para que não ocorra dano ao material, perda da esterilização ou infecção cruzada;
- Quedas ou esmagamento sobre superfícies duras podem causar danos ao produto. Dessa forma é necessário que o operador realize uma inspeção do produto, quanto a sua integridade na abertura da embalagem e, se for observado alguma anormalidade, o produto deverá ser descartado;
- Não utilize o produto se estiver com a embalagem violada ou o prazo de esterilização estiver vencido;
- Manipule com cuidado;
- A prótese foi projetada para ser inserida e fixada com instrumentais desenvolvidos para este fim. Quaisquer improvisações com diferentes instrumentais ou técnica cirúrgica imprecisa podem comprometer a qualidade de fixação e/ou posicionamento do implante;
- Produto Médico de Uso Único, Não Reutilizar - PROIBIDO REPROCESSAR;
- O produto nunca deve ser reutilizado, embora possa parecer não estar danificado, as tensões prévias que o mesmo foi submetido, pode originar imperfeições que reduziriam o tempo de vida útil do produto num reimplante e/ou provocar infecção e rejeição;
- Produto Estéril – Esterilizado por Óxido de Etileno e deve ser manipulado corretamente de forma a evitar a perda da esterilização ou infecção cruzada;
- É recomendado que os implantes sejam desembalados imediatamente antes do procedimento cirúrgico, de forma a preservar intactos a configuração original, o acabamento da superfície, e esterilidade, e convém que os mesmos sejam manuseados o mínimo possível quando nessas condições;
- Data de fabricação, prazo de validade e número de lote: vide rótulo.

Os produtos foram desenvolvidos para utilização seguindo as precauções e advertências acima, de modo que quaisquer outras utilizações são consideradas contraindicadas ou sem substrato científico que suporte o seu uso.

	INSTRUÇÃO DE USO Prótese Parcial para Cabeça de Rádio	Código:	IU.0086
		Revisão:	03
		Data:	20/10/2026

5.3. Possíveis Efeitos Adversos

Deve-se observar que nenhum material para implante cirúrgico mostra ser completamente livre de reações adversas no corpo humano, e que um nível aceitável de resposta biológica pode ser esperado quando o material é usado em aplicações apropriadas.

Os riscos mais comuns são as infecções, hemorragias, reações alérgicas medicamentosas e riscos anestésicos, entre outros. Podem também ocorrer as seguintes complicações e efeitos:

- Riscos de lesões vasculares, viscerais e neurais;
- Formação óssea heterotópica;
- Afrouxamento e/ou luxação da prótese;
- Interposição de tecido mole ou enxerto ósseo;
- Infecção superficial ou profunda;
- Rigidez articular;
- Incompatibilidade no dimensionamento da prótese com a cabeça radial natural;
- Osteólise;
- Síndrome dolorosa regional complexa;
- Sinostose radioulnar proximal completa;
- Persistência precoce da dor;
- Alteração degenerativa precoce.

5.4. Informações ao usuário do produto

O cirurgião responsável deve instruir o paciente sobre:

- A importância de a fisioterapia ser realizada com disciplina para ganho de amplitude articular e força muscular;
- As restrições e precauções pós-operatórias referente às atividades físicas, suporte de peso, antes da completa consolidação óssea e cicatrização das partes moles. Pois o não cumprimento das instruções médicas pode levar o implante ao afrouxamento, acarretando uma cirurgia de revisão;
- Os riscos potenciais de falha quando o implante for utilizado em pacientes que possam desobedecer às orientações médicas, os cuidados e as restrições pós-

	INSTRUÇÃO DE USO Prótese Parcial para Cabeça de Rádio	Código:	IU.0086
		Revisão:	03
		Data:	20/10/2026

operatórias, como idosos, indivíduos com alterações neurológicas ou dependentes químicos;

- A compreensão do paciente que o implante é usado com a finalidade de fixação enquanto o osso não esteja totalmente integrado e, que, portanto, pode quebrar, deformar ou soltar, se sofrer esforços, atividades excessivas e carga precoce dentro do período de restrição definido pelo cirurgião;
- A necessidade de acompanhamento médico periódico para checar as condições do implante, do osso e dos tecidos adjacentes;
- O fato de que a não cirurgia de revisão, nos casos em que não ocorreu a reconstrução óssea, no prazo determinado pelo médico, pode levar o implante a falência mecânica;
- A necessidade de uma cirurgia de revisão, em casos de afrouxamento do implante;
- O fato de que os implantes podem interferir nos resultados dos exames por imagem. Desta forma, portadores de implantes devem informar esse fato quando da realização de tais exames;
- A durabilidade dos implantes é afetada por numerosos fatores biológicos, biomecânicos e extrínsecos, que limitam a sua vida útil. Portanto, é estritamente necessária a obediência as indicações, contraindicações, precauções e advertências para este produto, os quais são essenciais para maximizar o tempo de uso pretendido;
- As informações listadas neste tópico “Informações ao usuário do produto” e no tópico “Possíveis Efeitos Adversos”.

5.5. Instruções de Uso

- Somente pessoas devidamente capacitadas devem manipular este produto, e em ambientes adequados (centros de materiais e salas cirúrgicas) para que não ocorra dano ao material ou perda da esterilização, acarretando infecção ao paciente;
- Caso ocorram armazenamento e manipulação errônea, antes ou durante o procedimento cirúrgico, como por ex. quedas, os implantes podem sofrer danos

	INSTRUÇÃO DE USO Prótese Parcial para Cabeça de Rádio	Código:	IU.0086
		Revisão:	03
		Data:	20/10/2026

mecânicos, consequentemente falência prematura e também perda da esterilização;

- São de responsabilidade do cirurgião ou equipe cirúrgica a escolha e o domínio da técnica a ser aplicada;
- Implantes de dimensões menores e maiores deverão estar disponíveis durante o procedimento cirúrgico;
- A correta seleção e posicionamento da prótese são essenciais para efetividade da cirurgia. Caso necessário utilizar o intensificador de imagem ou radiografia para confirmar o correto posicionamento do implante;
- Devem estar asseguradas as condições para que ocorra a cirurgia altamente asséptica. A avaliação clínica e por imagem (radiografia, ressonância magnética, tomografia, etc.) pré-operatória do paciente deve ser conclusiva.

Instrução de uso durante o procedimento cirúrgico:

- ✓ Via de acesso como de costume do cirurgião;
- ✓ Executar a abertura de a cápsula articular e visibilizar a cabeça do rádio fraturada;
- ✓ Realizar a ressecção da cabeça do rádio cominuta (Nota: é importante observar se toda sua circunferência foi retirada);
- ✓ Preparar o canal medular do rádio e testar o tamanho;
- ✓ Regularizar o colo do rádio;
- ✓ Frezar o canal medular do rádio;
- ✓ Introduzir a prótese de teste no canal radial, para verificar o tamanho correto da prótese definitiva;
- ✓ Redução do rádio e testar a mobilidade e a estabilidade, além de comprovar o comprimento do rádio;
- ✓ Após a retirada da prótese de teste, cimentar a prótese definitiva e realizar a redução anatômica, e concomitantemente a limpeza com soro fisiológico;
- ✓ Instalar um dreno de sucção;
- ✓ Suturar o cápsulo-ligamentar, o subcutâneo e a pele.

A vida útil do implante é caracterizada pelo tempo de uso pretendido, se bem planejado, corretamente fixado e em condições ideais, o tempo de permanência é de longo prazo, porém em caso de ausência ou problemas com a reconstrução óssea, estas podem representar um risco de falha do implante por excesso de solicitação mecânica.

	INSTRUÇÃO DE USO Prótese Parcial para Cabeça de Rádio	Código:	IU.0086
		Revisão:	03
		Data:	20/10/2026

Caso ocorra afrouxamento do implante, poderá ser necessária a realização de cirurgia de revisão, diante dessa possibilidade o cirurgião responsável deverá instruir o paciente quanto a importância do acompanhamento médico periódico para checar as condições do implante, do osso e do tecido adjacente.

É importante a compreensão que a vida útil do produto está condicionada às respostas ideais, ou seja, depende da interação de diversos fatores como: a responsabilidade do fabricante em relação ao projeto adequado do produto, responsabilidade do profissional como técnica cirúrgica precisa, e outros fatores que dependem do paciente, como resposta fisiológica, a condição clínica, conduta do paciente em relação a aumento de peso, porte de cargas pesadas e adoção de alto nível de atividade física.

5.6. Manuseio

- O produto deve ser mantido em suas embalagens originais estéreis até o momento de sua utilização, sendo que a abertura da embalagem para utilização cirúrgica e o manuseio do produto deverá ser realizado por pessoal habilitado para este procedimento.

5.7. Armazenamento

- Para o armazenamento, recomenda-se local seco e arejado, sem exposição à incidência de luz, a umidade ou a substâncias contaminantes;
- Os implantes não podem ser armazenados diretamente sobre o chão. Assim, recomenda-se a utilização de prateleiras com altura mínima de 20cm;
- Armazenar em temperatura não superior à 55°C e umidade entre 35% e 65% UR.

5.8. Transporte

- O produto deve ser transportado adequadamente, evitando-se quedas e atritos que possam danificar a estrutura e a superfície do produto.

	INSTRUÇÃO DE USO Prótese Parcial para Cabeça de Rádio	Código:	IU.0086
		Revisão:	03
		Data:	20/10/2026

5.9. Esterilização

Os modelos comerciais que compõem a família da Prótese Parcial para Cabeça de Rádio são comercializados na condição de produto Estéril, devendo ser retirado de sua embalagem original por pessoal habilitado, somente no ambiente cirúrgico estéril e ser utilizado imediatamente.

O método de esterilização utilizado é a Esterilização por Óxido de Etileno – ETO em câmara apropriada, previamente validada, seguindo os parâmetros e procedimentos estabelecidos no protocolo de validação e na norma NBR ISO 11135 – Esterilização de produtos de atenção à saúde – Óxido de etileno – Requisitos para desenvolvimento, validação e controle de rotina de um processo de esterilização de produtos para saúde.

- Produto Estéril – Não reesterilizar.
- Prazo de Validade: 05 anos da data de fabricação.
- Não utilize o produto caso a embalagem esteja violada ou o prazo de validade da esterilização esteja vencido;
- Produto Médico de Uso Único, Não Reutilizar - PROIBIDO REPROCESSAR;
- O produto nunca deve ser reutilizado, embora possa parecer não estar danificado, as tensões prévias a que os mesmos foram submetidos podem originar imperfeições que reduziriam o tempo de vida útil do produto num reimplante;
- Data de fabricação, prazo de validade e número do lote: vide rótulo.

5.10. Risco de Contaminação

Considerando que o produto é um dispositivo médico implantável, ou seja, está em contato com tecidos e fluídos corpóreos, nos casos da explantação, os mesmos devem ser tratados como material sujeito à contaminação biológica e transmissão de doenças virais.

De modo a minimizar esses riscos, devem-se adotar as normatizações e/ou demais regulamentos locais aplicáveis, para evitar contaminação ao meio ambiente ou às pessoas que tenham contato com o produto explantado.

	INSTRUÇÃO DE USO Prótese Parcial para Cabeça de Rádio	Código:	IU.0086
		Revisão:	03
		Data:	20/10/2026

5.11. Descarte

Os modelos comerciais que compõem a família da Prótese Parcial para Cabeça de Rádio explantados ou considerados inadequados para o uso devem ser descartados. Recomenda-se que antes do descarte, o produto seja descaracterizado, para tal as peças podem ser cortadas, entortadas ou limadas.

Conforme a Resolução RE nº 2605, de 11/08/06, dispositivos implantáveis de qualquer natureza enquadrados como de uso único são proibidos de serem reprocessados.

Implantes estéreis que forem removidos da embalagem interna e inseridos dentro do ambiente cirúrgico, mesmo que não tenham sido implantados ou contaminados por outras fontes, que forem removidos de seus pacientes e que não tenham objetivos de estudos e/ou análises posteriores devem ser adequadamente descartados pela instituição hospitalar.

Os métodos e procedimentos de descarte do produto médico utilizado devem assegurar a completa descaracterização do mesmo, impedindo qualquer possibilidade de sua reutilização. A descaracterização do produto médico é de inteira responsabilidade da instituição hospitalar, assim como, os métodos e procedimentos de descarte utilizados. Entretanto, a Sartori Instrumentos, Implantes e Fixadores recomenda que tais produtos sejam deformados mecanicamente. Em seguida, devem ser identificados de forma clara e visível, indicando a sua situação, ou seja, impróprio ao uso.

Os implantes devem ser descartados em locais apropriados, de forma a evitar a contaminação do meio ambiente e demais indivíduos. Recomenda-se a adoção dos regulamentos legais locais para descarte de produtos potencialmente contaminantes (RDC 222 de 28/03/2018 - Resíduos de Serviços de Saúde).

Produto Médico de Uso Único – Não Reutilizar, PROIBIDO REPROCESSAR.

6. FORMA DE APRESENTAÇÃO DO DISPOSITIVO MÉDICO

6.1. Embalagem

Os modelos comerciais da Prótese Parcial para Cabeça de Rádio, são disponibilizados para comercialização embalados unitariamente, na condição de produto Estéril, pelo método de esterilização por Óxido de Etileno (ETO).

	INSTRUÇÃO DE USO Prótese Parcial para Cabeça de Rádio	Código:	IU.0086
		Revisão:	03
		Data:	20/10/2026

Os implantes são acondicionados em embalagem dupla tipo Blister (embalagem primária), manufaturada em filme PET Poli (Tereftalato de Etileno) atóxico. A embalagem de Blister é selada com papel grau cirúrgico e é acondicionada em caixa de papel rígido atóxico (embalagem secundária), com dimensões de 46 x 91 x 151mm.

Na superfície da embalagem secundária, contém um rótulo com informações que identificam o produto, como código, descrição, número de lote, número do registro do produto na ANVISA, etc. Dentro da embalagem do produto, seguem cinco vias da etiqueta de rastreabilidade e um alerta de instrução de uso.

Figura 1 – Imagem ilustrativa da embalagem dupla tipo blister (embalagem primária)

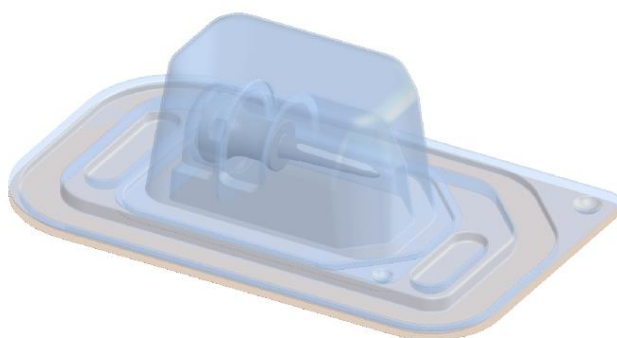


Figura 2 – Imagem ilustrativa da caixa de papel rígido (embalagem secundária)

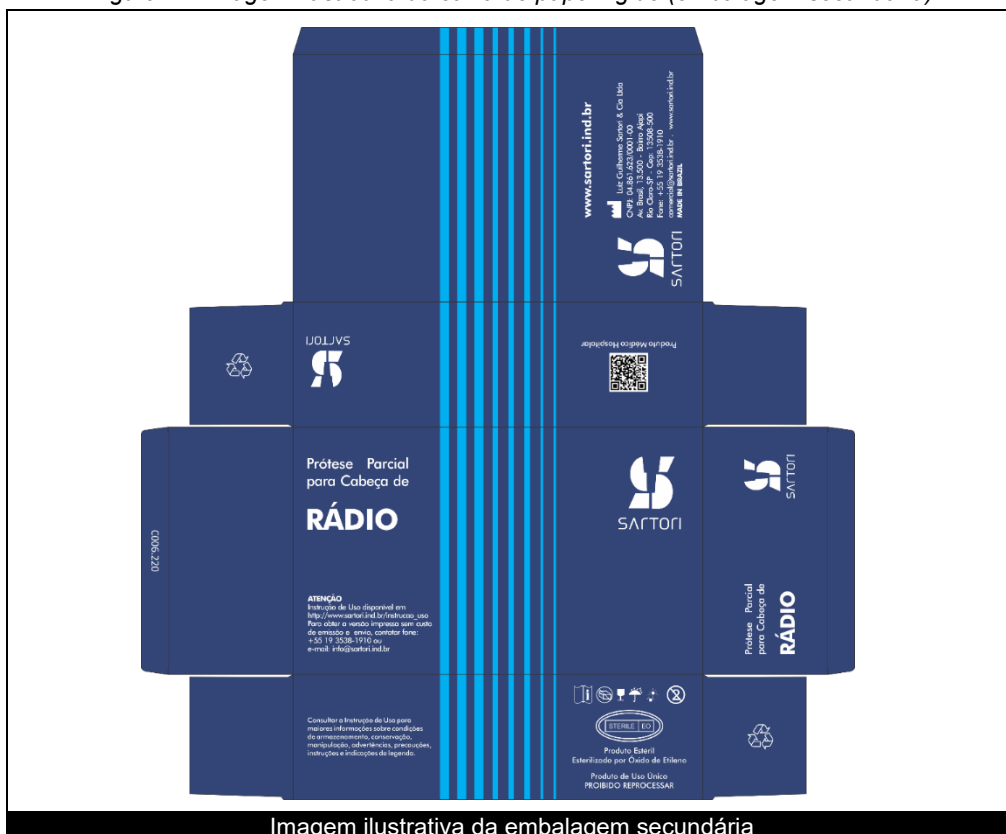


Imagem ilustrativa da embalagem secundária

	INSTRUÇÃO DE USO Prótese Parcial para Cabeça de Rádio	Código:	IU.0086
		Revisão:	03
		Data:	20/10/2026

Figura 3 – Imagem ilustrativa do Rótulo

REF	0323019-009	LOT	20819S
QTD	1	15/05/2024	15/05/2029
PRÓTESE PARCIAL PARA CABEÇA DE RÁDIO - DIAM.19X09MM			
MD			
REF	0323019-009	LOT	20819S
QTD	1	15/05/2024	15/05/2029
PRÓTESE PARCIAL PARA CABEÇA DE RÁDIO - DIAM.19X09MM			
Material: LIGA CO-CR-MO F75 Nome Comercial: PROTESE PARCIAL PARA CABECA DE RADIO Nome Técnico: COMPONENTE RADIAL PARA ARTROPLASTIA DE COTOVELO			
LOT			
Registro Anvisa: 80083650086 Instruções de uso, ver Rev XX Responsável Técnico Sérgio R.A. Oliveira CREA/SP: 5070105936			
UDI	(01)07909700000002(17)290515(10)20819S		

Na superfície da embalagem externa também apresenta as seguintes informações: Instrução de Uso disponível em http://www.sartori.ind.br/instrucao_uso. Reg. ANVISA: 80083650XXX – Revisão: XX. Para obter a versão impressa, poderá ser solicitado sem custo adicional, inclusive de envio, através do telefone +55 19 3538-1910 ou do e-mail: info@sartori.ind.br.

A instrução de uso poderá ser solicitada pelo usuário sem custo de emissão e envio. Essas informações estão em conformidade com a Instrução Normativa nº 4 de 2012, que estabelece regras para disponibilização de Instruções de Uso em formato não impresso de produtos para saúde.

6.2. Rastreabilidade

A rastreabilidade das Prótese Parcial para Cabeça de Rádio é realizada por meio das informações apresentadas nas etiquetas de rastreabilidade, nas quais estão disponíveis informações a respeito do fabricante, nome e modelo comercial do produto, número de lote, código do produto e o número de registro Anvisa, possibilitando traçar o

	INSTRUÇÃO DE USO Prótese Parcial para Cabeça de Rádio	Código:	IU.0086
		Revisão:	03
		Data:	20/10/2026

caminho reverso até a fabricação do produto. Desse modo é possível verificar a matéria-prima, seus fornecedores e informações sobre os controles de qualidade realizados do início ao fim do processo de fabricação.

Na embalagem dos modelos comerciais são fornecidas 5 unidades de etiqueta de rastreabilidade e sua fixação é obrigatória no prontuário clínico, no documento a ser entregue ao paciente, e na documentação fiscal que gera a cobrança.

Figura 4 - Modelo de etiqueta de rastreabilidade

Luiz Guilherme Sartori & Cia Ltda	
Lote: 20819S	Fab.: 15/05/2024
Código: 0323019-009	Val.: 15/05/2029
Reg.Anvisa: 80083650086	
PRÓTESE PARCIAL PARA CABEÇA DE RÁDIO	
- DIAM.19X09MM	
	Matéria-prima:
	LIGA CO-CR-MO F75
(01)07909700000002(17)290515(10)20819S	

6.3. Gravação

Os modelos comerciais da Prótese Parcial para Cabeça de Rádio, além da rastreabilidade por meio de dados impressos, também recebem uma marcação a laser com o logotipo da empresa, código da matéria-prima, número do lote e dimensões. Caso seja necessária a retirada do implante do corpo do paciente, todas as informações contidas no dispositivo permanecerão inalteradas.

Figura 5 – Imagem ilustrativa do local de marcação a laser na Prótese Parcial para Cabeça de Rádio



O local a ser efetuada a marcação do produto é eleito conforme descrito na norma ABNT NBR 12932 Implantes para cirurgia – Marcação e preparação de superfícies não revestidas de componentes metálicos – Requisitos e métodos, e é efetuado em regiões de


	INSTRUÇÃO DE USO Prótese Parcial para Cabeça de Rádio	Código:	IU.0086
		Revisão:	03
		Data:	20/10/2026

baixas concentrações de tensões onde não cruzam com escareados ou bordas dos implantes.

6.4. Legenda dos símbolos contidos na rotulagem

As simbologias apresentadas no rótulo dos dispositivos médicos estão ilustradas no Quadro abaixo, em conformidade com a norma ABNT NBR ISO 15223-1.

Quadro – Símbolos segundo ABNT NBR ISO 15223-1

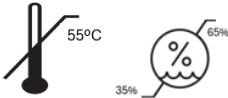	Número de catálogo (código do produto embalado)
	Quantidade do produto embalado
	Código de remessa (número de lote do produto embalado)
	Data de Fabricação
	Usar até a data (validade)
	Esterilizado com Óxido de Etileno
	Não Reusar
	Armazenar em temperatura não superior à 55°C e umidade entre 35% e 65% UR
	Consultar Instruções de uso ou consultar instruções eletrônicas de uso
	Fabricante

	INSTRUÇÃO DE USO Prótese Parcial para Cabeça de Rádio	Código:	IU.0086
		Revisão:	03
		Data:	20/10/2026

	Não usar se a embalagem estiver danificada e consultar as instruções de uso
	Proteger de luz solar
	Manter seco
	Frágil, manusear com cuidado
	Dispositivo médico
	Identificador único do dispositivo

6.5. Alerta de Instrução de Uso

Todos os produtos são acompanhados de um alerta de Instrução de Uso, contendo todas as informações para acesso no site do fabricante, além de informações de solicitação de Instrução de Uso no formato impresso.

Figura 6 – Modelo de Alerta de Instrução de Uso

<p align="center">ALERTA DE INSTRUÇÕES DE USO</p> <p>Conforme <u>Resolução RDC 751 de 15.09.2022</u>, que estabelece requisitos para disponibilização de <u>Instrução de Uso em formato não impresso</u> de dispositivos médicos, seguem neste alerta as informações para acesso das Instruções de Uso no site do fabricante do produto.</p> <p>As Instruções de Uso estão disponíveis em: https://sartori.ind.br/instrucao_uso</p> <p>Para a visualização dos arquivos utilize o software Adobe Acrobat Reader. As Instruções de Uso estão indexadas no website por meio do número de Registro/ Notificação ANVISA e respectivo nome comercial (descrição do registro).</p> <p>Todas as Instruções de Uso possuem o Nº do Registro/Notificação ANVISA e a revisão na primeira página do documento. O usuário deve atentar-se para a correta revisão da Instrução de Uso, informada no rótulo do produto.</p> <p>Para Instrução de Uso no formato impresso, o consumidor pode solicitar sem custo adicional (inclusive de envio), por meio do telefone +55 19 3538-1910 ou do e-mail: info@sartori.ind.br.</p> <p align="right">(FSQ 095.07.01)</p>
--

	INSTRUÇÃO DE USO Prótese Parcial para Cabeça de Rádio	Código:	IU.0086
		Revisão:	03
		Data:	20/10/2026

6.6. Reclamação e Atendimento ao Cliente

Todo cliente ou usuário desse dispositivo médico que tiver dúvidas ou queira maiores esclarecimentos sobre os serviços e/ou produtos oferecidos, poderá entrar em contato com a Sartori Instrumentos, Implantes e Fixadores através dos dados para contato contido nas instruções de uso e rótulo na embalagem do produto.

Para o envio de dispositivos médicos explantados ao fabricante para análise, o produto deve estar limpo e estéril. Devem ser utilizadas embalagens que mantenham a integridade física do produto médico.

A embalagem deve conter todas as informações necessárias para a identificação do produto médico, relacionadas às condições de manuseio, métodos de limpeza e desinfecção utilizados, bem como descrição e número do lote do produto médico.

6.7. Notificação de eventos adversos

Na ocorrência de qualquer evento adverso ou a necessidade de registrar queixa técnica, a SARTORI e a Anvisa devem ser notificadas por meio dos seguintes canais:

- SARTORI: <https://sartori.ind.br>
- Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) através do telefone +55 (19) 3538-1910 ou pelo e-mail: info@sartori.ind.br
- Sistema NOTIVISA (Anvisa): www.gov.br/anvisa

Fabricante/Detentor do Registro:

LUIZ GUILHERME SARTORI E CIA LTDA.

Avenida Brasil, nº 13500 - Distrito de Ajapi - Rio Claro - SP

CEP: 13508-500 Tel.: (19) 3538-1910

CNPJ: 04.861.623/0001-00 - Indústria Brasileira

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: (19) 3538-1910

e-mail: info@sartori.ind.br

Registro ANVISA nº: 80083650086

Responsável Técnico: Engº Sergio Roberto Alves de Oliveira

CREA/SP: 5070105936

	INSTRUÇÃO DE USO Prótese Parcial para Cabeça de Rádio	Código:	IU.0086
		Revisão:	03
		Data:	20/10/2026

HISTÓRICO DE REVISÕES INSTRUÇÃO DE USO		
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA
03	Adequação da Instrução de Uso ao novo template.	20/10/2026