

Registro ANVISA nº 80083650124 – Revisão 00

Luiz Guilherme Sartori & Cia Ltda. - CNPJ: 04.861.623/0001-00

Avenida Brasil, nº. 13500 – Ajapi - Rio Claro/SP - Resp. Téc.: Sérgio R.A.de Oliveira CREA/SP: 5070105936

Visando a praticidade e a facilidade de ter acesso às informações contidas nas Instruções de Uso de nossos produtos, a Sartori Instrumentos, Implantes e Fixadores em acordo com a RDC 751/2022 estabelecida pela ANVISA, disponibiliza os documentos para download no site:

http://www.sartori.ind.br/instrucao_uso

Importante: Verifique a versão da Instrução de Uso indicado no rótulo do produto, juntamente com o nº do registro e clique em "Baixar" no documento desejado para iniciar a transferência do arquivo.

Para obter a Instrução de Uso impressa sem custo de emissão e envio, favor entrar em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone +55 (19) 3538-1910 ou pelo e-mail info@sartori.ind.br

Instrução de Uso

Placas Especiais CMF EVO Maxifix

Registro ANVISA nº 80083650124 - Revisão 00

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Nome Técnico: Placa especial não absorvível para osteossíntese

Nome Comercial: Placas Especiais CMF EVO Maxifix

Matéria Prima: Placas/Malhas/Telas: Titânio Puro Grau 2 - ASTM F67

Cursor Sliding e Slider: Liga de Titânio Ti6Al4V – ASTM F136

Cursor Splitfix: Titânio Puro – Grau 2 – ASTM F67

Produto Não Estéril - Esterilizar antes do uso

Validade: 5 anos após a data de fabricação

Dispositivo Médico de Uso Único – PROIBIDO REPROCESSAR

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

As Placas Especiais CMF EVO Maxifix, fabricadas pela Sartori, consistem em dispositivos médicos implantáveis, não ativos, invasivos cirurgicamente, de uso único.

São considerados produtos de uso em longo prazo, ou seja, até que ocorra a consolidação óssea, cuja principal função é proporcionar fixação estável aos ossos da mandíbula, maxila e crânio.

O design das placas foi projetado para aplicações no terço médio da face, crânio e mandíbula, onde possuem formas adaptadas que possibilitam a escolha dos implantes mais adequados segundo as necessidades de cada paciente.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL

As Placas Especiais CMF EVO Maxifix fabricadas pela Sartori apresentam-se nas seguintes características geométricas que permitem o profissional escolher o modelo mais adequado conforme o caso clínico.

Quadro 1 – Lista de Modelos Comerciais de Placas Especiais CMF EVO Maxifix



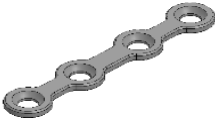



IMAGEM ILUSTRATIVA	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO COMPLETA
	0092500-004	NANO PLACA EVO STR 4 F
	0092500-006	NANO PLACA EVO STR 6 F
	0092500-008	NANO PLACA EVO STR 8 F
	0092500-010	NANO PLACA EVO STR 10 F
	0092500-012	NANO PLACA EVO STR 12 F
	0092500-014	NANO PLACA EVO STR 14 F
	0092500-016	NANO PLACA EVO STR 16 F
	0092503-230	NANO PLACA EVO STR DUPLA PONTE 2X3 F
	0092503-240	NANO PLACA EVO STR DUPLA PONTE 2X4 F
	0092503-250	NANO PLACA EVO STR DUPLA PONTE 2X5 F
	0092504-200	NANO PLACA EVO PONTE STR 2 F PEQUENA
	0092504-201	NANO PLACA EVO PONTE STR 2 F MÉDIA
	0092504-202	NANO PLACA EVO PONTE STR 2 F LONGA
	0092504-203	NANO PLACA EVO PONTE STR 2 F EXTRA LONGA
	0092504-401	NANO PLACA EVO PONTE STR 4 F
	0092504-402	NANO PLACA EVO PONTE STR 4 F LONGA
	0092504-601	NANO PLACA EVO PONTE STR 6 F
	0092504-602	NANO PLACA EVO PONTE STR 6 F LONGA
	0092505-007	NANO PLACA EVO H 7 F
	0092505-011	NANO PLACA EVO H 11 F
	0092506-220	NANO PLACA EVO L DIREITA 2X2 F
	0092506-230	NANO PLACA EVO L DIREITA 2X3 F
	0092506-330	NANO PLACA EVO L DIREITA 3X3 F
	0092506-340	NANO PLACA EVO L DIREITA 3X4 F
	0092506-350	NANO PLACA EVO L DIREITA 3X5 F
	0092506-221	NANO PLACA EVO L ESQUERDA 2X2 F
	0092506-231	NANO PLACA EVO L ESQUERDA 2X3 F
	0092506-331	NANO PLACA EVO L ESQUERDA 3X3 F
	0092506-341	NANO PLACA EVO L ESQUERDA 3X4 F
	0092506-351	NANO PLACA EVO L ESQUERDA 3X5 F
	0092516-310	NANO PLACA EVO T 3X1 F
	0092516-320	NANO PLACA EVO T 3X2 F
	0092516-330	NANO PLACA EVO T 3X3 F












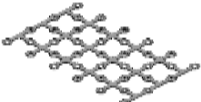
IMAGEM ILUSTRATIVA	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO COMPLETA
	0092516-340	NANO PLACA EVO T 3X4 F
	0092516-350	NANO PLACA EVO T 3X5 F
	0092524-230	NANO PLACA EVO Y 2X3 F
	0092524-240	NANO PLACA EVO Y 2X4 F
	0092524-250	NANO PLACA EVO Y 2X5 F
	0092524-430	NANO PLACA EVO Y 4X3 F
	0092528-420	NANO PLACA EVO DUPLO Y 4X2 F
	0092528-430	NANO PLACA EVO DUPLO Y 4X3 F
	0092528-440	NANO PLACA EVO DUPLO Y 4X4 F
	0092540-220	NANO PLACA EVO QUADRADA 2X2 F
	0092540-230	NANO PLACA EVO QUADRADA 2X3 F
	0092540-240	NANO PLACA EVO QUADRADA 2X4 F
	0092542-220	NANO PLACA EVO RETANGULAR 2X2 F
	0092542-230	NANO PLACA EVO RETANGULAR 2X3 F
	0092542-240	NANO PLACA EVO RETANGULAR 2X4 F
	0092544-004	NANO PLACA EVO ORBITAL 4 F
	0092544-006	NANO PLACA EVO ORBITAL 6 F
	0092544-008	NANO PLACA EVO ORBITAL 8 F
	0092546-000	NANO PLACA EVO NASAL H
	0092546-004	NANO PLACA EVO NASAL T
	0092546-006	NANO PLACA EVO NASAL Y
	0092558-012	NANO PLACA EVO CRANIOTOMIA 12MM
	0092558-019	NANO PLACA EVO CRANIOTOMIA 19MM
	0092564-404	NANO TELA EVO 4X4 F
	0092564-406	NANO TELA EVO 4X6 F
	0092565-308	NANO TELA EVO PLUS 3+8 F
	0092565-524	NANO TELA EVO PLUS 15+24 F
	0092565-916	NANO TELA EVO PLUS 9+16 F

IMAGEM ILUSTRATIVA	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO COMPLETA
	0092566-132	NANO TELA EVO 32X32MM MAX
	0092100-004	MICRO PLACA EVO STR 4 F
	0092100-006	MICRO PLACA EVO STR 6 F
	0092100-008	MICRO PLACA EVO STR 8 F
	0092100-010	MICRO PLACA EVO STR 10 F
	0092100-012	MICRO PLACA EVO STR 12 F
	0092100-014	MICRO PLACA EVO STR 14 F
	0092100-016	MICRO PLACA EVO STR 16 F
	0092100-104	MICRO PLACA EVO STR 4 F MAX
	0092100-106	MICRO PLACA EVO STR 6 F MAX
	0092100-108	MICRO PLACA EVO STR 8 F MAX
	0092100-110	MICRO PLACA EVO STR 10 F MAX
	0092100-112	MICRO PLACA EVO STR 12 F MAX
	0092100-114	MICRO PLACA EVO STR 14 F MAX
	0092100-116	MICRO PLACA EVO STR 16 F MAX
	0092102-208	MICRO PLACA EVO STR DUPLA 2X8 F
	0092102-216	MICRO PLACA EVO STR DUPLA 2X16 F
	0092104-200	MICRO PLACA EVO PONTE STR 2 F
	0092104-201	MICRO PLACA EVO PONTE STR 2 F LONGA
	0092104-400	MICRO PLACA EVO PONTE STR 4 F
	0092104-401	MICRO PLACA EVO PONTE STR 4 F MÉDIA
	0092104-402	MICRO PLACA EVO PONTE STR 4 F LONGA
	0092104-600	MICRO PLACA EVO PONTE STR 6 F
	0092104-601	MICRO PLACA EVO PONTE STR 6 F MÉDIA
	0092104-602	MICRO PLACA EVO PONTE STR 6 F LONGA
	0092104-410	MICRO PLACA EVO PONTE STR 4 F MAX
	0092104-610	MICRO PLACA EVO PONTE STR 6 F MAX
	0092105-007	MICRO PLACA EVO H 7 F
	0092105-011	MICRO PLACA EVO H 11 F
	0092106-220	MICRO PLACA EVO L DIREITA 2X2 F
	0092106-222	MICRO PLACA EVO L DIREITA MÉDIA 2X2 F
	0092106-224	MICRO PLACA EVO L DIREITA LONGA 2X2 F
	0092106-221	MICRO PLACA EVO L ESQUERDA 2X2 F
	0092106-223	MICRO PLACA EVO L ESQUERDA MÉDIA 2X2 F
	0092106-225	MICRO PLACA EVO L ESQUERDA LONGA 2X2 F
	0092107-220	MICRO PLACA EVO L DIREITA 2X2 F MAX














IMAGEM ILUSTRATIVA	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO COMPLETA
	0092107-222	MICRO PLACA EVO L DIREITA MÉDIA 2X2 F MAX
	0092107-224	MICRO PLACA EVO L DIREITA LONGA 2X2 F MAX
	0092107-221	MICRO PLACA EVO L ESQUERDA 2X2 F MAX
	0092107-223	MICRO PLACA EVO L ESQUERDA MÉDIA 2X2 F MAX
	0092107-225	MICRO PLACA EVO L ESQUERDA LONGA 2X2 F MAX
	0092108-220	MICRO PLACA EVO L 100° DIREITA 2X2 F
	0092108-222	MICRO PLACA EVO L 100° DIREITA MÉDIA 2X2 F
	0092108-224	MICRO PLACA EVO L 100° DIREITA LONGA 2X2 F
	0092108-221	MICRO PLACA EVO L 100° ESQUERDA 2X2 F
	0092108-223	MICRO PLACA EVO L 100° ESQUERDA MÉDIA 2X2 F
	0092108-225	MICRO PLACA EVO L 100° ESQUERDA LONGA 2X2 F
	0092110-230	MICRO PLACA EVO L 100° DIREITA 2X3 F
	0092110-232	MICRO PLACA EVO L 100° DIREITA MÉDIA 2X3 F
	0092110-234	MICRO PLACA EVO L 100° DIREITA LONGA 2X3 F
	0092110-231	MICRO PLACA EVO L 100° ESQUERDA 2X3 F
	0092110-233	MICRO PLACA EVO L 100° ESQUERDA MÉDIA 2X3 F
	0092110-235	MICRO PLACA EVO L 100° ESQUERDA LONGA 2X3 F
	0092111-230	MICRO PLACA EVO L 100° DIREITA 2X3 F MAX
	0092111-232	MICRO PLACA EVO L 100° DIREITA MÉDIA 2X3 F MAX
	0092111-234	MICRO PLACA EVO L 100° DIREITA LONGA 2X3 F MAX
	0092111-231	MICRO PLACA EVO L 100° ESQUERDA 2X3 F MAX
	0092111-233	MICRO PLACA EVO L 100° ESQUERDA MÉDIA 2X3 F MAX
	0092111-235	MICRO PLACA EVO L 100° ESQUERDA LONGA 2X3 F MAX
	0092112-330	MICRO PLACA EVO L 100° DIREITA 3X3 F
	0092112-332	MICRO PLACA EVO L 100° DIREITA MÉDIA 3X3 F
	0092112-334	MICRO PLACA EVO L 100° DIREITA LONGA 3X3 F
	0092112-336	MICRO PLACA EVO L 100° DIREITA EXTRA LONGA 3X3 F
	0092112-331	MICRO PLACA EVO L 100° ESQUERDA 3X3 F
	0092112-333	MICRO PLACA EVO L 100° ESQUERDA MÉDIA 3X3 F
	0092112-335	MICRO PLACA EVO L 100° ESQUERDA LONGA 3X3 F
	0092112-337	MICRO PLACA EVO L 100° ESQUERDA EXTRA LONGA 3X3 F
	0092113-330	MICRO PLACA EVO L 100° DIREITA 3X3 F MAX
	0092113-332	MICRO PLACA EVO L 100° DIREITA MÉDIA 3X3 F MAX
	0092113-334	MICRO PLACA EVO L 100° DIREITA LONGA 3X3 F MAX
	0092113-331	MICRO PLACA EVO L 100° ESQUERDA 3X3 F MAX
	0092113-333	MICRO PLACA EVO L 100° ESQUERDA MÉDIA 3X3 F MAX
	0092113-335	MICRO PLACA EVO L 100° ESQUERDA LONGA 3X3 F MAX
	0092114-340	MICRO PLACA EVO L 100° DIREITA 3X4 F
	0092114-342	MICRO PLACA EVO L 100° DIREITA MÉDIA 3X4 F
	0092114-344	MICRO PLACA EVO L 100° DIREITA LONGA 3X4 F
	0092114-346	MICRO PLACA EVO L 100° DIREITA EXTRA LONGA 3X4 F
	0092114-341	MICRO PLACA EVO L 100° ESQUERDA 3X4 F













IMAGEM ILUSTRATIVA	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO COMPLETA
	0092114-343	MICRO PLACA EVO L 100° ESQUERDA MÉDIA 3X4 F
	0092114-345	MICRO PLACA EVO L 100° ESQUERDA LONGA 3X4 F
	0092114-347	MICRO PLACA EVO L 100° ESQUERDA EXTRA LONGA 3X4 F
	0092115-340	MICRO PLACA EVO L 100° DIREITA 3X4 F MAX
	0092115-342	MICRO PLACA EVO L 100° DIREITA MÉDIA 3X4 F MAX
	0092115-344	MICRO PLACA EVO L 100° DIREITA LONGA 3X4 F MAX
	0092115-341	MICRO PLACA EVO L 100° ESQUERDA 3X4 F MAX
	0092115-343	MICRO PLACA EVO L 100° ESQUERDA MÉDIA 3X4 F MAX
	0092115-345	MICRO PLACA EVO L 100° ESQUERDA LONGA 3X4 F MAX
	0092116-320	MICRO PLACA EVO T 3X2 F
	0092116-330	MICRO PLACA EVO T 3X3 F
	0092118-340	MICRO PLACA EVO T 3X4 F
	0092116-321	MICRO PLACA EVO T 3X2 F MAX
	0092116-337	MICRO PLACA EVO T 3X3 F MAX
	0092118-347	MICRO PLACA EVO T 3X4 F MAX
	0092116-331	MICRO PLACA EVO PONTE T PEQUENA 3X3 F
	0092116-332	MICRO PLACA EVO PONTE T MÉDIA 3X3 F
	0092116-333	MICRO PLACA EVO PONTE T LONGA 3X3 F
	0092116-334	MICRO PLACA EVO PONTE T PEQUENA 3X3 F MAX
	0092116-335	MICRO PLACA EVO PONTE T MÉDIA 3X3 F MAX
	0092116-336	MICRO PLACA EVO PONTE T LONGA 3X3 F MAX
	0092118-341	MICRO PLACA EVO PONTE T PEQUENA 3X4 F
	0092118-342	MICRO PLACA EVO PONTE T MÉDIA 3X4 F
	0092118-343	MICRO PLACA EVO PONTE T LONGA 3X4 F
	0092118-344	MICRO PLACA EVO PONTE T PEQUENA 3X4 F MAX
	0092118-345	MICRO PLACA EVO PONTE T MÉDIA 3X4 F MAX
	0092118-346	MICRO PLACA EVO PONTE T LONGA 3X4 F MAX
	0092120-770	MICRO PLACA EVO T 7X7 F
	0092120-771	MICRO PLACA EVO T MÉDIA 7X7 F
	0092122-330	MICRO PLACA EVO T OBLÍQUA 100° DIREITA 3X3 F
	0092122-332	MICRO PLACA EVO T OBLÍQUA 100° DIREITA MÉDIA 3X3 F
	0092122-334	MICRO PLACA EVO T OBLÍQUA 100° DIREITA LONGA 3X3 F
	0092122-331	MICRO PLACA EVO T OBLÍQUA 100° ESQUERDA 3X3 F
	0092122-333	MICRO PLACA EVO T OBLÍQUA 100° ESQUERDA MÉDIA 3X3 F
	0092122-335	MICRO PLACA EVO T OBLÍQUA 100° ESQUERDA LONGA 3X3 F















IMAGEM ILUSTRATIVA	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO COMPLETA
	0092123-320	MICRO PLACA EVO Y 3X2 F MAX
	0092124-230	MICRO PLACA EVO Y 2X3 F
	0092124-231	MICRO PLACA EVO Y 2X3 F MÉDIA
	0092124-232	MICRO PLACA EVO Y 2X3 F LONGA
	0092124-233	MICRO PLACA EVO Y 2X3 F EXTRA LONGA
	0092125-231	MICRO PLACA EVO Y 2X3 F MÉDIA MAX
	0092125-232	MICRO PLACA EVO Y 2X3 F LONGA MAX
	0092126-330	MICRO PLACA EVO Y 3X3 F
	0092126-331	MICRO PLACA EVO Y 3X3 F MÉDIA
	0092126-332	MICRO PLACA EVO Y 3X3 F LONGA
	0092126-333	MICRO PLACA EVO Y 3X3 F EXTRA LONGA
	0092128-330	MICRO PLACA EVO DUPLO Y
	0092128-331	MICRO PLACA EVO DUPLO Y MÉDIA
	0092128-332	MICRO PLACA EVO DUPLO Y LONGA
	0092128-333	MICRO PLACA EVO DUPLO Y MAX
	0092130-000	MICRO PLACA EVO X
	0092130-001	MICRO PLACA EVO X MÉDIA
	0092130-002	MICRO PLACA EVO X MAX
	0092132-220	MICRO PLACA EVO I
	0092132-221	MICRO PLACA EVO I MÉDIA
	0092134-000	MICRO PLACA EVO TRIANGULAR
	0092136-220	MICRO PLACA EVO Z 100° DIREITA
	0092136-222	MICRO PLACA EVO Z 100° DIREITA MÉDIA
	0092136-224	MICRO PLACA EVO Z 100° DIREITA LONGA
	0092136-221	MICRO PLACA EVO Z 100° ESQUERDA
	0092136-223	MICRO PLACA EVO Z 100° ESQUERDA MÉDIA
	0092136-225	MICRO PLACA EVO Z 100° ESQUERDA LONGA
	0092138-220	MICRO PLACA EVO Z 110° DIREITA
	0092138-222	MICRO PLACA EVO Z 110° DIREITA MÉDIA
	0092138-224	MICRO PLACA EVO Z 110° DIREITA LONGA
	0092138-221	MICRO PLACA EVO Z 110° ESQUERDA
	0092138-223	MICRO PLACA EVO Z 110° ESQUERDA MÉDIA



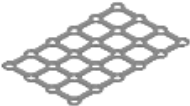







IMAGEM ILUSTRATIVA	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO COMPLETA
	0092138-225	MICRO PLACA EVO Z 110° ESQUERDA LONGA
	0092140-220	MICRO PLACA EVO QUADRADA 2X2 F
	0092140-230	MICRO PLACA EVO QUADRADA 2X3 F
	0092140-240	MICRO PLACA EVO QUADRADA 2X4 F
	0092140-460	MICRO PLACA EVO QUADRADA 4X6 F
	0092142-220	MICRO PLACA EVO RETANGULAR 2X2 F
	0092142-230	MICRO PLACA EVO RETANGULAR 2X3 F
	0092142-240	MICRO PLACA EVO RETANGULAR 2X4 F
	0092142-242	MICRO PLACA EVO RETANGULAR 2X4 F LARGA
	0092142-440	MICRO PLACA EVO RETANGULAR 4X4 F
	0092142-460	MICRO PLACA EVO RETANGULAR 4X6 F
	0092144-004	MICRO PLACA EVO ORBITAL 4 F
	0092144-006	MICRO PLACA EVO ORBITAL 6 F
	0092144-008	MICRO PLACA EVO ORBITAL 8 F
	0092144-010	MICRO PLACA EVO ORBITAL 10 F
	0092144-104	MICRO PLACA EVO ORBITAL 4 F MAX
	0092144-106	MICRO PLACA EVO ORBITAL 6 F MAX
	0092144-108	MICRO PLACA EVO ORBITAL 8 F MAX
	0092144-110	MICRO PLACA EVO ORBITAL 10 F MAX
	0092146-000	MICRO PLACA EVO NASAL H
	0092146-002	MICRO PLACA EVO NASAL H ASSIMÉTRICA
	0092146-004	MICRO PLACA EVO NASAL T
	0092146-006	MICRO PLACA EVO NASAL Y









IMAGEM ILUSTRATIVA	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO COMPLETA
	0092146-011	MICRO PLACA EVO NASAL 11 F
	0092146-012	MICRO PLACA EVO NASAL 12 F
	0092150-000	MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA COM OBLONGO SEM AVANÇO
	0092150-002	MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANÇO 2MM
	0092150-003	MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANÇO 3MM
	0092150-004	MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANÇO 4MM
	0092150-005	MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANÇO 5MM
	0092150-006	MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANÇO 6MM
	0092150-007	MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANÇO 7MM
	0092150-009	MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANÇO 9MM
	0092150-011	MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANÇO 11MM
	0092150-100	MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA COM OBLONGO SEM AVANÇO
	0092150-102	MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA COM OBLONGO AVANÇO 2MM
	0092150-103	MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA COM OBLONGO AVANÇO 3MM
	0092150-104	MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA COM OBLONGO AVANÇO 4MM
	0092150-105	MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA COM OBLONGO AVANÇO 5MM
	0092150-106	MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA COM OBLONGO AVANÇO 6MM
	0092150-107	MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA COM OBLONGO AVANÇO 7MM
	0092150-109	MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA COM OBLONGO AVANÇO 9MM
	0092150-111	MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA COM OBLONGO AVANÇO 11MM
	0092152-000	MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA SEM AVANÇO
	0092152-002	MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA AVANÇO 2MM
	0092152-003	MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA AVANÇO 3MM
	0092152-004	MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA AVANÇO 4MM
	0092152-005	MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA AVANÇO 5MM
	0092152-006	MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA AVANÇO 6MM
	0092152-007	MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA AVANÇO 7MM
	0092152-009	MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA AVANÇO 9MM
	0092152-011	MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA AVANÇO 11MM
	0092152-200	MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA SEM AVANÇO MAX
	0092152-202	MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA AVANÇO 2MM MAX
	0092152-203	MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA AVANÇO 3MM MAX
	0092152-204	MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA AVANÇO 4MM MAX









IMAGEM ILUSTRATIVA	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO COMPLETA
	0092152-205	MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA AVANÇO 5MM MAX
	0092152-206	MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA AVANÇO 6MM MAX
	0092152-207	MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA AVANÇO 7MM MAX
	0092152-209	MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA AVANÇO 9MM MAX
	0092152-211	MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA AVANÇO 11MM MAX
	0092152-100	MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA SEM AVANÇO
	0092152-102	MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA AVANÇO 2MM
	0092152-103	MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA AVANÇO 3MM
	0092152-104	MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA AVANÇO 4MM
	0092152-105	MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA AVANÇO 5MM
	0092152-106	MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA AVANÇO 6MM
	0092152-107	MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA AVANÇO 7MM
	0092152-109	MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA AVANÇO 9MM
	0092152-111	MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA AVANÇO 11MM
	0092152-300	MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA SEM AVANÇO MAX
	0092152-302	MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA AVANÇO 2MM MAX
	0092152-303	MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA AVANÇO 3MM MAX
	0092152-304	MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA AVANÇO 4MM MAX
	0092152-305	MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA AVANÇO 5MM MAX
	0092152-306	MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA AVANÇO 6MM MAX
	0092152-307	MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA AVANÇO 7MM MAX
	0092152-309	MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA AVANÇO 9MM MAX
	0092152-311	MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA AVANÇO 11MM MAX
	0092154-000	MICRO PLACA EVO LF 110° DIREITA SEM AVANÇO
	0092154-002	MICRO PLACA EVO LF 110° DIREITA AVANÇO 2MM
	0092154-003	MICRO PLACA EVO LF 110° DIREITA AVANÇO 3MM
	0092154-004	MICRO PLACA EVO LF 110° DIREITA AVANÇO 4MM
	0092154-005	MICRO PLACA EVO LF 110° DIREITA AVANÇO 5MM
	0092154-006	MICRO PLACA EVO LF 110° DIREITA AVANÇO 6MM
	0092154-007	MICRO PLACA EVO LF 110° DIREITA AVANÇO 7MM
	0092154-009	MICRO PLACA EVO LF 110° DIREITA AVANÇO 9MM
	0092154-011	MICRO PLACA EVO LF 110° DIREITA AVANÇO 11MM
	0092154-100	MICRO PLACA EVO LF 110° ESQUERDA SEM AVANÇO
	0092154-102	MICRO PLACA EVO LF 110° ESQUERDA AVANÇO 2MM




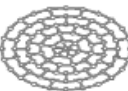

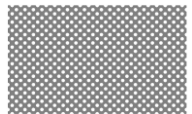
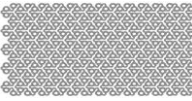
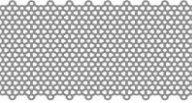
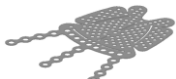
IMAGEM ILUSTRATIVA	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO COMPLETA
	0092154-103	MICRO PLACA EVO LF 110° ESQUERDA AVANÇO 3MM
	0092154-104	MICRO PLACA EVO LF 110° ESQUERDA AVANÇO 4MM
	0092154-105	MICRO PLACA EVO LF 110° ESQUERDA AVANÇO 5MM
	0092154-106	MICRO PLACA EVO LF 110° ESQUERDA AVANÇO 6MM
	0092154-107	MICRO PLACA EVO LF 110° ESQUERDA AVANÇO 7MM
	0092154-109	MICRO PLACA EVO LF 110° ESQUERDA AVANÇO 9MM
	0092154-111	MICRO PLACA EVO LF 110° ESQUERDA AVANÇO 11MM
	0092156-001	MICRO PLACA EVO PARA MENTO AVANÇO 1MM
	0092156-002	MICRO PLACA EVO PARA MENTO AVANÇO 2MM
	0092156-003	MICRO PLACA EVO PARA MENTO AVANÇO 3MM
	0092156-004	MICRO PLACA EVO PARA MENTO AVANÇO 4MM
	0092156-005	MICRO PLACA EVO PARA MENTO AVANÇO 5MM
	0092156-006	MICRO PLACA EVO PARA MENTO AVANÇO 6MM
	0092156-007	MICRO PLACA EVO PARA MENTO AVANÇO 7MM
	0092156-009	MICRO PLACA EVO PARA MENTO AVANÇO 9MM
	0092156-011	MICRO PLACA EVO PARA MENTO AVANÇO 11MM
	0092158-013	MICRO PLACA EVO CRANIOTOMIA 13MM
	0092158-018	MICRO PLACA EVO CRANIOTOMIA 18MM
	0092158-022	MICRO PLACA EVO CRANIOTOMIA 22MM
	0092158-025	MICRO PLACA EVO CRANIOTOMIA 25MM
	0092160-045	MICRO MALHA EVO CIRCULAR DIAM.45MM
	0092160-073	MICRO MALHA EVO CIRCULAR DIAM.73MM
	0092160-100	MICRO MALHA EVO CIRCULAR DIAM.100MM
	0092162-582	MICRO MALHA EVO DY 53X82MM
	0092162-584	MICRO MALHA EVO DS 52X84MM
	0092162-588	MICRO MALHA EVO DYF 55X88MM
	0092162-590	MICRO MALHA EVO 53X90MM
	0092163-000	MICRO MALHA EVO P/ ASSOALHO ORBITAL PEQUENA




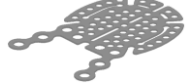



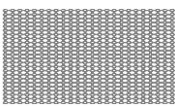
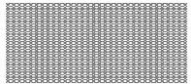
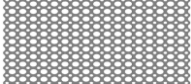


IMAGEM ILUSTRATIVA	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO COMPLETA
	0092163-005	MICRO MALHA EVO P/ ASSOALHO ORBITAL MÉDIA
	0092163-010	MICRO MALHA EVO P/ ASSOALHO ORBITAL GRANDE
	0092163-015	MICRO MALHA EVO P/ ASSOALHO ORBITAL PARCIAL
	0092163-018	MICRO MALHA EVO P/ ASSOALHO ORBITAL 18MM
	0092163-030	MICRO MALHA EVO P/ ASSOALHO ORBITAL 30MM
	0092163-040	MICRO MALHA EVO P/ ASSOALHO ORBITAL 40MM
	0092163-046	MICRO MALHA EVO P/ ASSOALHO ORBITAL MAX
	0092164-118	MICRO TELA EVO 118X118MM
	0092164-158	MICRO TELA EVO 158X158MM
	0092164-588	MICRO TELA EVO 58X88MM
	0092151-000	MICRO PLACA EVO LE FORT PB DIR. C/ OBLONGO SEM AVANÇO
	0092151-002	MICRO PLACA EVO LE FORT PB DIR. C/ OBLONGO AVANÇO 2MM
	0092151-003	MICRO PLACA EVO LE FORT PB DIR. C/ OBLONGO AVANÇO 3MM
	0092151-004	MICRO PLACA EVO LE FORT PB DIR. C/ OBLONGO AVANÇO 4MM
	0092151-005	MICRO PLACA EVO LE FORT PB DIR. C/ OBLONGO AVANÇO 5MM
	0092151-006	MICRO PLACA EVO LE FORT PB DIR. C/ OBLONGO AVANÇO 6MM









IMAGEM ILUSTRATIVA	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO COMPLETA
	0092151-007	MICRO PLACA EVO LE FORT PB DIR. C/ OBLONGO AVANÇO 7MM
	0092151-009	MICRO PLACA EVO LE FORT PB DIR. C/ OBLONGO AVANÇO 9MM
	0092151-011	MICRO PLACA EVO LE FORT PB DIR. C/ OBLONGO AVANÇO 11MM
	0092151-100	MICRO PLACA EVO LE FORT PB ESQ. C/ OBLONGO SEM AVANÇO
	0092151-102	MICRO PLACA EVO LE FORT PB ESQ. C/ OBLONGO AVANÇO 2MM
	0092151-103	MICRO PLACA EVO LE FORT PB ESQ. C/ OBLONGO AVANÇO 3MM
	0092151-104	MICRO PLACA EVO LE FORT PB ESQ. C/ OBLONGO AVANÇO 4MM
	0092151-105	MICRO PLACA EVO LE FORT PB ESQ. C/ OBLONGO AVANÇO 5MM
	0092151-106	MICRO PLACA EVO LE FORT PB ESQ. C/ OBLONGO AVANÇO 6MM
	0092151-107	MICRO PLACA EVO LE FORT PB ESQ. C/ OBLONGO AVANÇO 7MM
	0092151-109	MICRO PLACA EVO LE FORT PB ESQ. C/ OBLONGO AVANÇO 9MM
0092151-111	MICRO PLACA EVO LE FORT PB ESQ. C/ OBLONGO AVANÇO 11MM	
	0092153-000	MICRO PLACA EVO LE FORT PB DIREITA SEM AVANÇO
	0092153-002	MICRO PLACA EVO LE FORT PB DIREITA AVANÇO 2MM
	0092153-003	MICRO PLACA EVO LE FORT PB DIREITA AVANÇO 3MM
	0092153-004	MICRO PLACA EVO LE FORT PB DIREITA AVANÇO 4MM
	0092153-005	MICRO PLACA EVO LE FORT PB DIREITA AVANÇO 5MM
	0092153-006	MICRO PLACA EVO LE FORT PB DIREITA AVANÇO 6MM
	0092153-007	MICRO PLACA EVO LE FORT PB DIREITA AVANÇO 7MM
	0092153-009	MICRO PLACA EVO LE FORT PB DIREITA AVANÇO 9MM
0092153-011	MICRO PLACA EVO LE FORT PB DIREITA AVANÇO 11MM	
	0092153-100	MICRO PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA SEM AVANÇO
	0092153-102	MICRO PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA AVANÇO 2MM
	0092153-103	MICRO PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA AVANÇO 3MM
	0092153-104	MICRO PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA AVANÇO 4MM
	0092153-105	MICRO PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA AVANÇO 5MM
	0092153-106	MICRO PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA AVANÇO 6MM
	0092153-107	MICRO PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA AVANÇO 7MM
	0092153-109	MICRO PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA AVANÇO 9MM
0092153-111	MICRO PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA AVANÇO 11MM	
	0092155-000	MICRO PLACA EVO LF-PB 110° DIREITA SEM AVANÇO
	0092155-002	MICRO PLACA EVO LF-PB 110° DIREITA AVANÇO 2MM
	0092155-003	MICRO PLACA EVO LF-PB 110° DIREITA AVANÇO 3MM
	0092155-004	MICRO PLACA EVO LF-PB 110° DIREITA AVANÇO 4MM
	0092155-005	MICRO PLACA EVO LF-PB 110° DIREITA AVANÇO 5MM






IMAGEM ILUSTRATIVA	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO COMPLETA
	0092155-006	MICRO PLACA EVO LF-PB 110° DIREITA AVANÇO 6MM
	0092155-007	MICRO PLACA EVO LF-PB 110° DIREITA AVANÇO 7MM
	0092155-009	MICRO PLACA EVO LF-PB 110° DIREITA AVANÇO 9MM
	0092155-011	MICRO PLACA EVO LF-PB 110° DIREITA AVANÇO 11MM
	0092155-100	MICRO PLACA EVO LF-PB 110° ESQUERDA SEM AVANÇO
	0092155-102	MICRO PLACA EVO LF-PB 110° ESQUERDA AVANÇO 2MM
	0092155-103	MICRO PLACA EVO LF-PB 110° ESQUERDA AVANÇO 3MM
	0092155-104	MICRO PLACA EVO LF-PB 110° ESQUERDA AVANÇO 4MM
	0092155-105	MICRO PLACA EVO LF-PB 110° ESQUERDA AVANÇO 5MM
	0092155-106	MICRO PLACA EVO LF-PB 110° ESQUERDA AVANÇO 6MM
	0092155-107	MICRO PLACA EVO LF-PB 110° ESQUERDA AVANÇO 7MM
	0092155-109	MICRO PLACA EVO LF-PB 110° ESQUERDA AVANÇO 9MM
	0092155-111	MICRO PLACA EVO LF-PB 110° ESQUERDA AVANÇO 11MM
	0092156-101	MICRO PLACA EVO PARA MENTO PB AVANÇO 1MM
	0092156-102	MICRO PLACA EVO PARA MENTO PB AVANÇO 2MM
	0092156-103	MICRO PLACA EVO PARA MENTO PB AVANÇO 3MM
	0092156-104	MICRO PLACA EVO PARA MENTO PB AVANÇO 4MM
	0092156-105	MICRO PLACA EVO PARA MENTO PB AVANÇO 5MM
	0092156-106	MICRO PLACA EVO PARA MENTO PB AVANÇO 6MM
	0092156-107	MICRO PLACA EVO PARA MENTO PB AVANÇO 7MM
	0092156-109	MICRO PLACA EVO PARA MENTO PB AVANÇO 9MM
	0092156-111	MICRO PLACA EVO PARA MENTO PB AVANÇO 11MM
	0092156-201	MICRO PLACA EVO PARA MENTO PB AVANÇO 1MM MAX
	0092156-202	MICRO PLACA EVO PARA MENTO PB AVANÇO 2MM MAX
	0092156-203	MICRO PLACA EVO PARA MENTO PB AVANÇO 3MM MAX
	0092156-204	MICRO PLACA EVO PARA MENTO PB AVANÇO 4MM MAX
	0092156-205	MICRO PLACA EVO PARA MENTO PB AVANÇO 5MM MAX
	0092156-206	MICRO PLACA EVO PARA MENTO PB AVANÇO 6MM MAX
	0092156-207	MICRO PLACA EVO PARA MENTO PB AVANÇO 7MM MAX
	0092156-209	MICRO PLACA EVO PARA MENTO PB AVANÇO 9MM MAX
	0092156-211	MICRO PLACA EVO PARA MENTO PB AVANÇO 11MM MAX
	0092800-004	MINI PLACA EVO STR 4 F
	0092800-006	MINI PLACA EVO STR 6 F
	0092800-008	MINI PLACA EVO STR 8 F
	0092800-010	MINI PLACA EVO STR 10 F
	0092800-012	MINI PLACA EVO STR 12 F
	0092800-014	MINI PLACA EVO STR 14 F
	0092800-016	MINI PLACA EVO STR 16 F
	0092801-002	MINI PLACA EVO PONTE STR 2 F
	0092802-040	MINI PLACA EVO PONTE STR 4 F STANDARD
	0092802-042	MINI PLACA EVO PONTE STR 4 F PEQUENA

IMAGEM ILUSTRATIVA	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO COMPLETA
	0092802-044	MINI PLACA EVO PONTE STR 4 F MÉDIA
	0092802-046	MINI PLACA EVO PONTE STR 4 F LONGA
	0092802-048	MINI PLACA EVO PONTE STR 4 F EXTRA LONGA
	0092802-064	MINI PLACA EVO PONTE STR 6 F MÉDIA
	0092802-066	MINI PLACA EVO PONTE STR 6 F LONGA
	0092802-084	MINI PLACA EVO PONTE STR 8 F MÉDIA
	0092802-086	MINI PLACA EVO PONTE STR 8 F LONGA
	0092802-140	MINI PLACA EVO PONTE STR 4 F ESPECIAL
	0092804-240	MINI PLACA EVO STR DUPLA PONTE 2X4 F
	0092804-242	MINI PLACA EVO STR DUPLA PONTE PEQUENA 2X4 F
	0092804-244	MINI PLACA EVO STR DUPLA PONTE MÉDIA 2X4 F
	0092804-246	MINI PLACA EVO STR DUPLA PONTE LONGA 2X4 F
	0092804-248	MINI PLACA EVO STR DUPLA PONTE EXTRA LONGA 2X4 F
	0092804-249	MINI PLACA EVO STR DUPLA PONTE ESPECIAL 2X4 F
	0092803-220	MINI PLACA EVO L PB DIR 2X2 F MAX
	0092803-222	MINI PLACA EVO L PB DIR PEQUENA 2X2 F MAX
	0092803-224	MINI PLACA EVO L PB DIR MÉDIA 2X2 F MAX
	0092803-226	MINI PLACA EVO L PB DIR LONGA 2X2 F MAX
	0092803-228	MINI PLACA EVO L PB DIR EXTRA LONGA 2X2 F MAX
	0092803-221	MINI PLACA EVO L PB ESQ 2X2 F MAX
	0092803-223	MINI PLACA EVO L PB ESQ PEQUENA 2X2 F MAX
	0092803-225	MINI PLACA EVO L PB ESQ MÉDIA 2X2 F MAX
	0092803-227	MINI PLACA EVO L PB ESQ LONGA 2X2 F MAX
	0092803-229	MINI PLACA EVO L PB ESQ EXTRA LONGA 2X2 F MAX
	0092806-220	MINI PLACA EVO L DIR 2X2 F
	0092806-222	MINI PLACA EVO L DIR PEQUENA 2X2 F
	0092806-224	MINI PLACA EVO L DIR MÉDIA 2X2 F
	0092806-226	MINI PLACA EVO L DIR LONGA 2X2 F
	0092806-228	MINI PLACA EVO L DIR EXTRA LONGA 2X2 F
	0092806-221	MINI PLACA EVO L ESQ 2X2 F
	0092806-223	MINI PLACA EVO L ESQ PEQUENA 2X2 F
	0092806-225	MINI PLACA EVO L ESQ MÉDIA 2X2 F
	0092806-227	MINI PLACA EVO L ESQ LONGA 2X2 F
	0092806-229	MINI PLACA EVO L ESQ EXTRA LONGA 2X2 F
	0092805-220	MINI PLACA EVO REFORÇADA L DIR 2X2 F MAX
	0092805-222	MINI PLACA EVO REFORÇADA L DIR PEQUENA 2X2 F MAX
	0092805-224	MINI PLACA EVO REFORÇADA L DIR MÉDIA 2X2 F MAX
	0092805-226	MINI PLACA EVO REFORÇADA L DIR LONGA 2X2 F MAX
	0092805-228	MINI PLACA EVO REFORÇADA L DIR EXTRA LONGA 2X2 F MAX
	0092805-221	MINI PLACA EVO REFORÇADA L ESQ 2X2 F MAX
	0092805-223	MINI PLACA EVO REFORÇADA L ESQ PEQUENA 2X2 F MAX
	0092805-225	MINI PLACA EVO REFORÇADA L ESQ MÉDIA 2X2 F MAX

IMAGEM ILUSTRATIVA	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO COMPLETA
	0092805-227	MINI PLACA EVO REFORÇADA L ESQ LONGA 2X2 F MAX
	0092805-229	MINI PLACA EVO REFORÇADA L ESQ EXTRA LONGA 2X2 F MAX
	0092817-220	MINI PLACA EVO REFORÇADA L DIR EXTRA PEQUENA 2X2 F MAX
	0092817-221	MINI PLACA EVO REFORÇADA L ESQ EXTRA PEQUENA 2X2 F MAX
	0092806-330	MINI PLACA EVO L DIR 3X3 F
	0092806-332	MINI PLACA EVO L DIR PEQUENA 3X3 F
	0092806-334	MINI PLACA EVO L DIR MÉDIA 3X3 F
	0092806-336	MINI PLACA EVO L DIR LONGA 3X3 F
	0092806-338	MINI PLACA EVO L DIR EXTRA LONGA 3X3 F
	0092806-331	MINI PLACA EVO L ESQ 3X3 F
	0092806-333	MINI PLACA EVO L ESQ PEQUENA 3X3 F
	0092806-335	MINI PLACA EVO L ESQ MÉDIA 3X3 F
	0092806-337	MINI PLACA EVO L ESQ LONGA 3X3 F
	0092806-339	MINI PLACA EVO L ESQ EXTRA LONGA 3X3 F
	0092808-230	MINI PLACA EVO L 100° DIR 2X3 F
	0092808-232	MINI PLACA EVO L 100° DIR PEQUENA 2X3 F
	0092808-234	MINI PLACA EVO L 100° DIR MÉDIA 2X3 F
	0092808-236	MINI PLACA EVO L 100° DIR LONGA 2X3 F
	0092808-231	MINI PLACA EVO L 100° ESQ 2X3 F
	0092808-233	MINI PLACA EVO L 100° ESQ PEQUENA 2X3 F
	0092808-235	MINI PLACA EVO L 100° ESQ MÉDIA 2X3 F
	0092808-237	MINI PLACA EVO L 100° ESQ LONGA 2X3 F
	0092808-340	MINI PLACA EVO L 100° DIR 3X4 F
	0092808-341	MINI PLACA EVO L 100° ESQ 3X4 F
	0092808-342	MINI PLACA EVO L 100° DIR 3X4 F MAX
	0092808-343	MINI PLACA EVO L 100° ESQ 3X4 F MAX




IMAGEM ILUSTRATIVA	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO COMPLETA
	0092808-450	MINI PLACA EVO L 100° DIR 4X5 F
	0092808-451	MINI PLACA EVO L 100° ESQ 4X5 F
	0092808-452	MINI PLACA EVO L 100° DIR 4X5 F MAX
	0092808-453	MINI PLACA EVO L 100° ESQ 4X5 F MAX
	0092810-420	MINI PLACA EVO L 100° DIR ESPECIAL 4X2 F
	0092810-422	MINI PLACA EVO L 100° DIR ESPECIAL PEQUENA 4X2 F
	0092810-424	MINI PLACA EVO L 100° DIR ESPECIAL MÉDIA 4X2 F
	0092810-426	MINI PLACA EVO L 100° DIR ESPECIAL LONGA 4X2 F
	0092810-428	MINI PLACA EVO L 100° DIR ESPECIAL EXTRA LONGA 4X2 F
	0092810-421	MINI PLACA EVO L 100° ESQ ESPECIAL 4X2 F
	0092810-423	MINI PLACA EVO L 100° ESQ ESPECIAL PEQUENA 4X2 F
	0092810-425	MINI PLACA EVO L 100° ESQ ESPECIAL MÉDIA 4X2 F
	0092810-427	MINI PLACA EVO L 100° ESQ ESPECIAL LONGA 4X2 F
	0092810-429	MINI PLACA EVO L 100° ESQ ESPECIAL EXTRA LONGA 4X2 F
	0092810-430	MINI PLACA EVO L 100° DIR ESPECIAL 4X3 F
	0092810-432	MINI PLACA EVO L 100° DIR ESPECIAL PEQUENA 4X3 F
	0092810-434	MINI PLACA EVO L 100° DIR ESPECIAL MÉDIA 4X3 F
	0092810-436	MINI PLACA EVO L 100° DIR ESPECIAL LONGA 4X3 F
	0092810-438	MINI PLACA EVO L 100° DIR ESPECIAL EXTRA LONGA 4X3 F
	0092810-431	MINI PLACA EVO L 100° ESQ ESPECIAL 4X3 F
	0092810-433	MINI PLACA EVO L 100° ESQ ESPECIAL PEQUENA 4X3 F
	0092810-435	MINI PLACA EVO L 100° ESQ ESPECIAL MÉDIA 4X3 F
	0092810-437	MINI PLACA EVO L 100° ESQ ESPECIAL LONGA 4X3 F
	0092810-439	MINI PLACA EVO L 100° ESQ ESPECIAL EXTRA LONGA 4X3 F
	0092812-222	MINI PLACA EVO L 110° DIR, OBLÍQUA ABERTA, 2X2 F PEQUENA
	0092812-224	MINI PLACA EVO L 110° DIR, OBLÍQUA ABERTA, 2X2 F MÉDIA
	0092812-226	MINI PLACA EVO L 110° DIR, OBLÍQUA ABERTA, 2X2 F LONGA
	0092812-228	MINI PLACA EVO L 110° DIR, OBLÍQUA ABERTA, 2X2 F EXTRA LONGA
	0092812-223	MINI PLACA EVO L 110° ESQ, OBLÍQUA ABERTA, 2X2 F PEQUENA
	0092812-225	MINI PLACA EVO L 110° ESQ, OBLÍQUA ABERTA, 2X2 F MÉDIA
	0092812-227	MINI PLACA EVO L 110° ESQ, OBLÍQUA ABERTA, 2X2 F LONGA
	0092812-229	MINI PLACA EVO L 110° ESQ, OBLÍQUA ABERTA, 2X2 F EXTRA LONGA
	0092812-232	MINI PLACA EVO L 110° DIR, OBLÍQUA ABERTA, 2X3 F PEQUENA
	0092812-234	MINI PLACA EVO L 110° DIR, OBLÍQUA ABERTA, 2X3 F MÉDIA












IMAGEM ILUSTRATIVA	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO COMPLETA
	0092812-236	MINI PLACA EVO L 110° DIR, OBLÍQUA ABERTA, 2X3 F LONGA
	0092812-238	MINI PLACA EVO L 110° DIR, OBLÍQUA ABERTA, 2X3 F EXTRA LONGA
	0092812-233	MINI PLACA EVO L 110° ESQ, OBLÍQUA ABERTA, 2X3 F PEQUENA
	0092812-235	MINI PLACA EVO L 110° ESQ, OBLÍQUA ABERTA, 2X3 F MÉDIA
	0092812-237	MINI PLACA EVO L 110° ESQ, OBLÍQUA ABERTA, 2X3 F LONGA
	0092812-239	MINI PLACA EVO L 110° ESQ, OBLÍQUA ABERTA, 2X3 F EXTRA LONGA
	0092814-222	MINI PLACA EVO L 110° DIR, OBLÍQUA FECHADA, 2X2 F PEQUENA
	0092814-224	MINI PLACA EVO L 110° DIR, OBLÍQUA FECHADA, 2X2 F MÉDIA
	0092814-226	MINI PLACA EVO L 110° DIR, OBLÍQUA FECHADA, 2X2 F LONGA
	0092814-228	MINI PLACA EVO L 110° DIR, OBLÍQUA FECHADA, 2X2 F EXTRA LONGA
	0092814-223	MINI PLACA EVO L 110° ESQ, OBLÍQUA FECHADA, 2X2 F PEQUENA
	0092814-225	MINI PLACA EVO L 110° ESQ, OBLÍQUA FECHADA, 2X2 F MÉDIA
	0092814-227	MINI PLACA EVO L 110° ESQ, OBLÍQUA FECHADA, 2X2 F LONGA
	0092814-229	MINI PLACA EVO L 110° ESQ, OBLÍQUA FECHADA, 2X2 F EXTRA LONGA
	0092814-232	MINI PLACA EVO L 110° DIR, OBLÍQUA FECHADA, 2X3 F PEQUENA
	0092814-234	MINI PLACA EVO L 110° DIR, OBLÍQUA FECHADA, 2X3 F MÉDIA
	0092814-236	MINI PLACA EVO L 110° DIR, OBLÍQUA FECHADA, 2X3 F LONGA
	0092814-238	MINI PLACA EVO L 110° DIR, OBLÍQUA FECHADA, 2X3 F EXTRA LONGA
	0092814-233	MINI PLACA EVO L 110° ESQ, OBLÍQUA FECHADA, 2X3 F PEQUENA
	0092814-235	MINI PLACA EVO L 110° ESQ, OBLÍQUA FECHADA, 2X3 F MÉDIA
	0092814-237	MINI PLACA EVO L 110° ESQ, OBLÍQUA FECHADA, 2X3 F LONGA
	0092814-239	MINI PLACA EVO L 110° ESQ, OBLÍQUA FECHADA, 2X3 F EXTRA LONGA
	0092807-220	MINI PLACA EVO L 2X2 F - DUAL FACE
	0092807-222	MINI PLACA EVO L PEQUENA 2X2 F - DUAL FACE
	0092807-224	MINI PLACA EVO L MÉDIA 2X2 F - DUAL FACE
	0092807-226	MINI PLACA EVO L LONGA 2X2 F - DUAL FACE
	0092807-228	MINI PLACA EVO L EXTRA LONGA 2X2 F - DUAL FACE
	0092807-330	MINI PLACA EVO L 3X3 F - DUAL FACE
	0092807-332	MINI PLACA EVO L PEQUENA 3X3 F - DUAL FACE
	0092807-334	MINI PLACA EVO L MÉDIA 3X3 F - DUAL FACE
	0092807-336	MINI PLACA EVO L LONGA 3X3 F - DUAL FACE
	0092807-338	MINI PLACA EVO L EXTRA LONGA 3X3 F - DUAL FACE
	0092809-230	MINI PLACA EVO L 100° 2X3 F - DUAL FACE
	0092809-232	MINI PLACA EVO L 100° PEQUENA 2X3 F - DUAL FACE
	0092809-234	MINI PLACA EVO L 100° MÉDIA 2X3 F - DUAL FACE
	0092809-236	MINI PLACA EVO L 100° LONGA 2X3 F - DUAL FACE
	0092809-340	MINI PLACA EVO L 100° 3X4 F - DUAL FACE
	0092809-342	MINI PLACA EVO L 100° 3X4 F - DUAL FACE MAX

IMAGEM ILUSTRATIVA	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO COMPLETA
	0092809-450	MINI PLACA EVO L 100° 4X5 F - DUAL FACE
	0092809-452	MINI PLACA EVO L 100° 4X5 F - DUAL FACE MAX
	0092811-420	MINI PLACA EVO L 100° ESPECIAL 4X2 F - DUAL FACE
	0092811-422	MINI PLACA EVO L 100° ESPECIAL PEQUENA 4X2 F - DUAL FACE
	0092811-424	MINI PLACA EVO L 100° ESPECIAL MÉDIA 4X2 F - DUAL FACE
	0092811-426	MINI PLACA EVO L 100° ESPECIAL LONGA 4X2 F - DUAL FACE
	0092811-428	MINI PLACA EVO L 100° ESPECIAL EXTRA LONGA 4X2 F - DUAL FACE
	0092811-430	MINI PLACA EVO L 100° ESPECIAL 4X3 F - DUAL FACE
	0092811-432	MINI PLACA EVO L 100° ESPECIAL PEQUENA 4X3 F - DUAL FACE
	0092811-434	MINI PLACA EVO L 100° ESPECIAL MÉDIA 4X3 F - DUAL FACE
	0092811-436	MINI PLACA EVO L 100° ESPECIAL LONGA 4X3 F - DUAL FACE
	0092811-438	MINI PLACA EVO L 100° ESPECIAL EXTRA LONGA 4X3 F - DUAL FACE
	0092813-222	MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA ABERTA, 2X2 F PEQUENA - DUAL FACE
	0092813-224	MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA ABERTA, 2X2 F MÉDIA - DUAL FACE
	0092813-226	MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA ABERTA, 2X2 F LONGA - DUAL FACE
	0092813-228	MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA ABERTA, 2X2 F EXTRA LONGA - DUAL FACE
	0092813-232	MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA ABERTA, 2X3 F PEQUENA - DUAL FACE
	0092813-234	MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA ABERTA, 2X3 F MÉDIA - DUAL FACE
	0092813-236	MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA ABERTA, 2X3 F LONGA - DUAL FACE
	0092813-238	MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA ABERTA, 2X3 F EXTRA LONGA - DUAL FACE
	0092815-222	MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA FECHADA, 2X2 F PEQUENA - DUAL FACE
	0092815-224	MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA FECHADA, 2X2 F MÉDIA - DUAL FACE
	0092815-226	MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA FECHADA, 2X2 F LONGA - DUAL FACE
	0092815-228	MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA FECHADA, 2X2 F EXTRA LONGA - DUAL FACE
	0092815-232	MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA FECHADA, 2X3 F PEQUENA - DUAL FACE
	0092815-234	MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA FECHADA, 2X3 F MÉDIA - DUAL FACE
	0092815-236	MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA FECHADA, 2X3 F LONGA - DUAL FACE
	0092815-238	MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA FECHADA, 2X3 F EXTRA LONGA - DUAL FACE
	0092807-221	MINI PLACA EVO L 2X2 F - DUAL FACE PB
	0092807-223	MINI PLACA EVO L PEQUENA 2X2 F - DUAL FACE PB
	0092807-225	MINI PLACA EVO L MÉDIA 2X2 F - DUAL FACE PB
	0092807-227	MINI PLACA EVO L LONGA 2X2 F - DUAL FACE PB
	0092807-229	MINI PLACA EVO L EXTRA LONGA 2X2 F - DUAL FACE PB
	0092807-331	MINI PLACA EVO L 3X3 F - DUAL FACE PB
	0092807-333	MINI PLACA EVO L PEQUENA 3X3 F - DUAL FACE PB
	0092807-335	MINI PLACA EVO L MÉDIA 3X3 F - DUAL FACE PB
	0092807-337	MINI PLACA EVO L LONGA 3X3 F - DUAL FACE PB
	0092807-339	MINI PLACA EVO L EXTRA LONGA 3X3 F - DUAL FACE PB
	0092809-231	MINI PLACA EVO L 100° 2X3 F - DUAL FACE PB
	0092809-233	MINI PLACA EVO L 100° PEQUENA 2X3 F - DUAL FACE PB

IMAGEM ILUSTRATIVA	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO COMPLETA
	0092809-235	MINI PLACA EVO L 100° MÉDIA 2X3 F - DUAL FACE PB
	0092809-237	MINI PLACA EVO L 100° LONGA 2X3 F - DUAL FACE PB
	0092809-341	MINI PLACA EVO L 100° 3X4 F - DUAL FACE PB
	0092809-343	MINI PLACA EVO L 100° 3X4 F - DUAL FACE PB MAX
	0092809-451	MINI PLACA EVO L 100° 4X5 F - DUAL FACE PB
	0092809-453	MINI PLACA EVO L 100° 4X5 F - DUAL FACE PB MAX
	0092811-421	MINI PLACA EVO L 100° ESPECIAL 4X2 F - DUAL FACE PB
	0092811-423	MINI PLACA EVO L 100° ESPECIAL PEQUENA 4X2 F - DUAL FACE PB
	0092811-425	MINI PLACA EVO L 100° ESPECIAL MÉDIA 4X2 F - DUAL FACE PB
	0092811-427	MINI PLACA EVO L 100° ESPECIAL LONGA 4X2 F - DUAL FACE PB
	0092811-429	MINI PLACA EVO L 100° ESPECIAL EXTRA LONGA 4X2 F - DUAL FACE PB
	0092811-431	MINI PLACA EVO L 100° ESPECIAL 4X3 F - DUAL FACE PB
	0092811-433	MINI PLACA EVO L 100° ESPECIAL PEQUENA 4X3 F - DUAL FACE PB
	0092811-435	MINI PLACA EVO L 100° ESPECIAL MÉDIA 4X3 F - DUAL FACE PB
	0092811-437	MINI PLACA EVO L 100° ESPECIAL LONGA 4X3 F - DUAL FACE PB
	0092811-439	MINI PLACA EVO L 100° ESPECIAL EXTRA LONGA 4X3 F - DUAL FACE PB
	0092813-223	MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA ABERTA, 2X2 F PEQUENA - DUAL FACE PB
	0092813-225	MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA ABERTA, 2X2 F MÉDIA - DUAL FACE PB
	0092813-227	MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA ABERTA, 2X2 F LONGA - DUAL FACE PB
	0092813-229	MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA ABERTA, 2X2 F EXTRA LONGA - DUAL FACE PB
	0092813-233	MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA ABERTA, 2X3 F PEQUENA - DUAL FACE PB
	0092813-235	MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA ABERTA, 2X3 F MÉDIA - DUAL FACE PB
	0092813-237	MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA ABERTA, 2X3 F LONGA - DUAL FACE PB
	0092813-239	MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA ABERTA, 2X3 F EXTRA LONGA - DUAL FACE PB
	0092815-223	MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA FECHADA, 2X2 F PEQUENA - DUAL FACE PB
	0092815-225	MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA FECHADA, 2X2 F MÉDIA - DUAL FACE PB
	0092815-227	MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA FECHADA, 2X2 F LONGA - DUAL FACE PB
	0092815-229	MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA FECHADA, 2X2 F EXTRA LONGA - DUAL FACE PB
	0092815-233	MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA FECHADA, 2X3 F PEQUENA - DUAL FACE PB
	0092815-235	MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA FECHADA, 2X3 F MÉDIA - DUAL FACE PB












IMAGEM ILUSTRATIVA	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO COMPLETA
	0092815-237	MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA FECHADA, 2X3 F LONGA - DUAL FACE PB
	0092815-239	MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA FECHADA, 2X3 F EXTRA LONGA - DUAL FACE PB
	0092816-320	MINI PLACA EVO T 3X2 F
	0092816-321	MINI PLACA EVO PONTE T 3X2 F
	0092816-322	MINI PLACA EVO PONTE T PEQUENA 3X2 F
	0092816-324	MINI PLACA EVO PONTE T MÉDIA 3X2 F
	0092816-326	MINI PLACA EVO PONTE T LONGA 3X2 F
	0092816-328	MINI PLACA EVO PONTE T EXTRA LONGA 3X2 F
	0092818-330	MINI PLACA EVO T 3X3 F
	0092818-331	MINI PLACA EVO PONTE T 3X3 F
	0092818-332	MINI PLACA EVO PONTE T PEQUENA 3X3 F
	0092818-334	MINI PLACA EVO PONTE T MÉDIA 3X3 F
	0092818-336	MINI PLACA EVO PONTE T LONGA 3X3 F
	0092818-338	MINI PLACA EVO PONTE T EXTRA LONGA 3X3 F
	0092820-320	MINI PLACA EVO T OBLÍQUA 110° DIREITA 3X2 F
	0092820-322	MINI PLACA EVO T OBLÍQUA 110° DIREITA PEQUENA 3X2 F
	0092820-324	MINI PLACA EVO T OBLÍQUA 110° DIREITA MÉDIA 3X2 F
	0092820-326	MINI PLACA EVO T OBLÍQUA 110° DIREITA LONGA 3X2 F
	0092820-328	MINI PLACA EVO T OBLÍQUA 110° DIREITA EXTRA LONGA 3X2 F
	0092820-321	MINI PLACA EVO T OBLÍQUA 110° ESQUERDA 3X2 F
	0092820-323	MINI PLACA EVO T OBLÍQUA 110° ESQUERDA PEQUENA 3X2 F
	0092820-325	MINI PLACA EVO T OBLÍQUA 110° ESQUERDA MÉDIA 3X2 F
	0092820-327	MINI PLACA EVO T OBLÍQUA 110° ESQUERDA LONGA 3X2 F
	0092820-329	MINI PLACA EVO T OBLÍQUA 110° ESQUERDA EXTRA LONGA 3X2 F
	0092821-320	MINI PLACA EVO T OBLÍQUA 110° 3X2 F - DUAL FACE
	0092821-322	MINI PLACA EVO T OBLÍQUA 110° PEQUENA 3X2 F - DUAL FACE
	0092821-324	MINI PLACA EVO T OBLÍQUA 110° MÉDIA 3X2 F - DUAL FACE
	0092821-326	MINI PLACA EVO T OBLÍQUA 110° LONGA 3X2 F - DUAL FACE
	0092821-328	MINI PLACA EVO T OBLÍQUA 110° EXTRA LONGA 3X2 F - DUAL FACE
	0092821-321	MINI PLACA EVO T OBLÍQUA 110° 3X2 F - DUAL FACE PB
	0092821-323	MINI PLACA EVO T OBLÍQUA 110° PEQUENA 3X2 F - DUAL FACE PB
	0092821-325	MINI PLACA EVO T OBLÍQUA 110° MÉDIA 3X2 F - DUAL FACE PB
	0092821-327	MINI PLACA EVO T OBLÍQUA 110° LONGA 3X2 F - DUAL FACE PB
	0092821-329	MINI PLACA EVO T OBLÍQUA 110° EXTRA LONGA 3X2 F - DUAL FACE PB
	0092822-000	MINI PLACA EVO PONTE Y STANDARD










IMAGEM ILUSTRATIVA	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO COMPLETA	
	0092822-002	MINI PLACA EVO PONTE Y PEQUENA	
	0092822-004	MINI PLACA EVO PONTE Y MÉDIA	
	0092822-006	MINI PLACA EVO PONTE Y LONGA	
	0092822-008	MINI PLACA EVO PONTE Y EXTRA LONGA	
	0092823-000	MINI PLACA EVO PONTE Y PB 4X4 F MAX	
	0092824-220	MINI PLACA EVO Y OBLÍQUA ABERTA 2X2 F	
	0092824-222	MINI PLACA EVO Y OBLÍQUA ABERTA PEQUENA 2X2 F	
	0092824-224	MINI PLACA EVO Y OBLÍQUA ABERTA MÉDIA 2X2 F	
	0092824-226	MINI PLACA EVO Y OBLÍQUA ABERTA LONGA 2X2 F	
	0092824-228	MINI PLACA EVO Y OBLÍQUA ABERTA EXTRA LONGA 2X2 F	
	0092826-220	MINI PLACA EVO Y OBLÍQUA FECHADA 2X2 F	
	0092826-222	MINI PLACA EVO Y OBLÍQUA FECHADA PEQUENA 2X2 F	
	0092826-224	MINI PLACA EVO Y OBLÍQUA FECHADA MÉDIA 2X2 F	
	0092826-226	MINI PLACA EVO Y OBLÍQUA FECHADA LONGA 2X2 F	
	0092826-228	MINI PLACA EVO Y OBLÍQUA FECHADA EXTRA LONGA 2X2 F	
	0092825-220	MINI PLACA EVO Y OBLÍQUA 2X2 F - DUAL FACE	
	0092825-222	MINI PLACA EVO Y OBLÍQUA PEQUENA 2X2 F - DUAL FACE	
	0092825-224	MINI PLACA EVO Y OBLÍQUA MÉDIA 2X2 F - DUAL FACE	
	0092825-226	MINI PLACA EVO Y OBLÍQUA LONGA 2X2 F - DUAL FACE	
	0092825-228	MINI PLACA EVO Y OBLÍQUA EXTRA LONGA 2X2 F - DUAL FACE	
	0092825-221	MINI PLACA EVO Y OBLÍQUA 2X2 F - DUAL FACE PB	
	0092825-223	MINI PLACA EVO Y OBLÍQUA PEQUENA 2X2 F - DUAL FACE PB	
	0092825-225	MINI PLACA EVO Y OBLÍQUA MÉDIA 2X2 F - DUAL FACE PB	
	0092825-227	MINI PLACA EVO Y OBLÍQUA LONGA 2X2 F - DUAL FACE PB	
	0092825-229	MINI PLACA EVO Y OBLÍQUA EXTRA LONGA 2X2 F - DUAL FACE PB	
	0092827-440	MINI PLACA EVO PB DUPLO T 3X3 F MAX	
		0092828-330	MINI PLACA EVO DUPLO Y STANDARD
		0092828-332	MINI PLACA EVO DUPLO Y PEQUENA
0092828-334		MINI PLACA EVO DUPLO Y MÉDIA	
0092828-336		MINI PLACA EVO DUPLO Y LONGA	
	0092829-440	MINI PLACA EVO REFORÇADA DUPLO Y STANDARD 4X4 F MAX	
	0092829-442	MINI PLACA EVO REFORÇADA DUPLO Y PEQUENA 4X4 F MAX	
	0092829-444	MINI PLACA EVO REFORÇADA DUPLO Y MÉDIA 4X4 F MAX	
	0092829-446	MINI PLACA EVO REFORÇADA DUPLO Y LONGA 4X4 F MAX	
	0092830-006	MINI PLACA EVO ORBITAL 6 F	
	0092830-008	MINI PLACA EVO ORBITAL 8 F	
	0092830-010	MINI PLACA EVO ORBITAL 10 F	
	0092830-106	MINI PLACA EVO ORBITAL PB 6 F MAX	
	0092830-108	MINI PLACA EVO ORBITAL PB 8 F MAX	
	0092830-110	MINI PLACA EVO ORBITAL PB 10 F MAX	









IMAGEM ILUSTRATIVA	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO COMPLETA
	0092832-220	MINI PLACA EVO Z 100° DIREITA STANDARD
	0092832-222	MINI PLACA EVO Z 100° DIREITA PEQUENA
	0092832-224	MINI PLACA EVO Z 100° DIREITA MÉDIA
	0092832-226	MINI PLACA EVO Z 100° DIREITA LONGA
	0092832-221	MINI PLACA EVO Z 100° ESQUERDA STANDARD
	0092832-223	MINI PLACA EVO Z 100° ESQUERDA PEQUENA
	0092832-225	MINI PLACA EVO Z 100° ESQUERDA MÉDIA
	0092832-227	MINI PLACA EVO Z 100° ESQUERDA LONGA
	0092831-220	MINI PLACA EVO Z 100° STANDARD - DUAL FACE
	0092831-222	MINI PLACA EVO Z 100° PEQUENA - DUAL FACE
	0092831-224	MINI PLACA EVO Z 100° MÉDIA - DUAL FACE
	0092831-226	MINI PLACA EVO Z 100° LONGA - DUAL FACE
	0092831-221	MINI PLACA EVO Z 100° STANDARD - DUAL FACE PB
	0092831-223	MINI PLACA EVO Z 100° PEQUENA - DUAL FACE PB
	0092831-225	MINI PLACA EVO Z 100° MÉDIA - DUAL FACE PB
	0092831-227	MINI PLACA EVO Z 100° LONGA - DUAL FACE PB
	0092833-002	MINI PLACA EVO LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANÇO 2MM
	0092833-003	MINI PLACA EVO LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANÇO 3MM
	0092833-004	MINI PLACA EVO LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANÇO 4MM
	0092833-005	MINI PLACA EVO LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANÇO 5MM
	0092833-006	MINI PLACA EVO LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANÇO 6MM
	0092833-008	MINI PLACA EVO LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANÇO 8MM
	0092833-010	MINI PLACA EVO LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANÇO 10MM
	0092833-012	MINI PLACA EVO LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANÇO 12MM
	0092833-102	MINI PLACA EVO LE FORT ESQUERDA COM OBLONGO AVANÇO 2MM
	0092833-103	MINI PLACA EVO LE FORT ESQUERDA COM OBLONGO AVANÇO 3MM
	0092833-104	MINI PLACA EVO LE FORT ESQUERDA COM OBLONGO AVANÇO 4MM
	0092833-105	MINI PLACA EVO LE FORT ESQUERDA COM OBLONGO AVANÇO 5MM
	0092833-106	MINI PLACA EVO LE FORT ESQUERDA COM OBLONGO AVANÇO 6MM
	0092833-108	MINI PLACA EVO LE FORT ESQUERDA COM OBLONGO AVANÇO 8MM
	0092833-110	MINI PLACA EVO LE FORT ESQUERDA COM OBLONGO AVANÇO 10MM
	0092833-112	MINI PLACA EVO LE FORT ESQUERDA COM OBLONGO AVANÇO 12MM
	0092834-002	MINI PLACA EVO MENTO AVANÇO 2MM
	0092834-004	MINI PLACA EVO MENTO AVANÇO 4MM
	0092834-006	MINI PLACA EVO MENTO AVANÇO 6MM
	0092834-008	MINI PLACA EVO MENTO AVANÇO 8MM
	0092834-010	MINI PLACA EVO MENTO AVANÇO 10MM
	0092834-012	MINI PLACA EVO MENTO AVANÇO 12MM
	0092834-014	MINI PLACA EVO MENTO AVANÇO 14MM
	0092834-016	MINI PLACA EVO MENTO AVANÇO 16MM
	0092835-002	MINI PLACA EVO LE FORT DIREITA AVANÇO 2MM
	0092835-003	MINI PLACA EVO LE FORT DIREITA AVANÇO 3MM
	0092835-004	MINI PLACA EVO LE FORT DIREITA AVANÇO 4MM
	0092835-005	MINI PLACA EVO LE FORT DIREITA AVANÇO 5MM









IMAGEM ILUSTRATIVA	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO COMPLETA
	0092835-006	MINI PLACA EVO LE FORT DIREITA AVANÇO 6MM
	0092835-008	MINI PLACA EVO LE FORT DIREITA AVANÇO 8MM
	0092835-010	MINI PLACA EVO LE FORT DIREITA AVANÇO 10MM
	0092835-012	MINI PLACA EVO LE FORT DIREITA AVANÇO 12MM
	0092835-102	MINI PLACA EVO LE FORT ESQUERDA AVANÇO 2MM
	0092835-103	MINI PLACA EVO LE FORT ESQUERDA AVANÇO 3MM
	0092835-104	MINI PLACA EVO LE FORT ESQUERDA AVANÇO 4MM
	0092835-105	MINI PLACA EVO LE FORT ESQUERDA AVANÇO 5MM
	0092835-106	MINI PLACA EVO LE FORT ESQUERDA AVANÇO 6MM
	0092835-108	MINI PLACA EVO LE FORT ESQUERDA AVANÇO 8MM
	0092835-110	MINI PLACA EVO LE FORT ESQUERDA AVANÇO 10MM
	0092835-112	MINI PLACA EVO LE FORT ESQUERDA AVANÇO 12MM
	0092836-002	MINI PLACA EVO CHIN AVANÇO 2,5MM
	0092836-004	MINI PLACA EVO CHIN AVANÇO 4MM
	0092836-006	MINI PLACA EVO CHIN AVANÇO 6MM
	0092836-008	MINI PLACA EVO CHIN AVANÇO 8MM
	0092836-010	MINI PLACA EVO CHIN AVANÇO 10MM
	0092836-012	MINI PLACA EVO CHIN AVANÇO 12MM
	0092836-014	MINI PLACA EVO CHIN AVANÇO 14MM
	0092836-016	MINI PLACA EVO CHIN AVANÇO 16MM
	0092837-000	MINI PLACA EVO NASAL X
	0092838-000	MINI PLACA EVO NASAL T
	0092839-000	MINI PLACA EVO NASAL Y
	0092840-000	MINI PLACA EVO NASAL H
	0092840-002	MINI PLACA EVO NASAL H ASSIMÉTRICA
	0092842-000	MINI PLACA EVO TRIANGULAR



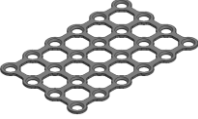

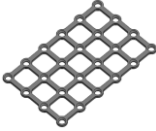


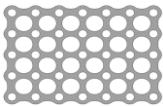
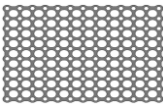
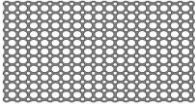
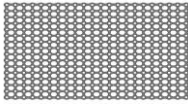
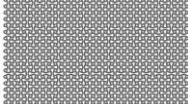
IMAGEM ILUSTRATIVA	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO COMPLETA
	0092844-202	MINI PLACA EVO QUADRADA 2X2 F
	0092844-203	MINI PLACA EVO QUADRADA 2X3 F
	0092844-204	MINI PLACA EVO QUADRADA 2X4 F
	0092844-206	MINI PLACA EVO QUADRADA 2X6 F
	0092844-208	MINI PLACA EVO QUADRADA 2X8 F
	0092844-210	MINI PLACA EVO QUADRADA 2X10 F
	0092844-212	MINI PLACA EVO QUADRADA 2X12 F
	0092844-214	MINI PLACA EVO QUADRADA 2X14 F
	0092844-404	MINI PLACA EVO QUADRADA 4X4 F
	0092844-406	MINI PLACA EVO QUADRADA 4X6 F
	0092845-202	MINI PLACA EVO QUADRADA PLUS 2X2 F
	0092845-203	MINI PLACA EVO QUADRADA PLUS 2X3 F
	0092845-204	MINI PLACA EVO QUADRADA PLUS 2X4 F
	0092845-404	MINI PLACA EVO QUADRADA PLUS 4X4 F
	0092845-406	MINI PLACA EVO QUADRADA PLUS 4X6 F
	0092846-202	MINI PLACA EVO RETANGULAR 2X2 F
	0092846-203	MINI PLACA EVO RETANGULAR 2X3 F
	0092846-204	MINI PLACA EVO RETANGULAR 2X4 F
	0092846-404	MINI PLACA EVO RETANGULAR 4X4 F
	0092846-406	MINI PLACA EVO RETANGULAR 4X6 F
	0092847-043	MINI MALHA EVO 40X30MM
	0092847-080	MINI MALHA EVO 60X80MM
	0092847-115	MINI MALHA EVO 75X115MM
	0092847-140	MINI MALHA EVO 100X140MM
	0092847-230	MINI MALHA EVO 140X230MM

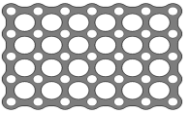
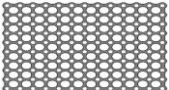
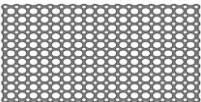
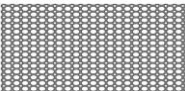
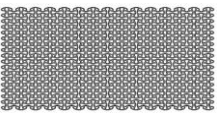





IMAGEM ILUSTRATIVA	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO COMPLETA
	0092848-043	MINI TELA EVO 40X30MM
	0092848-080	MINI TELA EVO 60X80MM
	0092848-115	MINI TELA EVO 75X115MM
	0092848-140	MINI TELA EVO 100X140MM
	0092848-230	MINI TELA EVO 140X230MM
	0092849-202	MINI PLACA EVO DUPLA 2X2 F TIPO MATRIX
	0092849-204	MINI PLACA EVO DUPLA 2X4 F TIPO MATRIX
	0092849-206	MINI PLACA EVO DUPLA 2X6 F TIPO MATRIX
	0092849-208	MINI PLACA EVO DUPLA 2X8 F TIPO MATRIX
	0092849-214	MINI PLACA EVO DUPLA CURVADA 2X4 F TIPO MATRIX
	0092849-216	MINI PLACA EVO DUPLA CURVADA 2X6 F TIPO MATRIX
	0092849-218	MINI PLACA EVO DUPLA CURVADA 2X8 F TIPO MATRIX
	0092850-004	MINI PLACA EVO REFORÇADA STR 4 F
	0092850-006	MINI PLACA EVO REFORÇADA STR 6 F
	0092850-008	MINI PLACA EVO REFORÇADA STR 8 F
	0092850-010	MINI PLACA EVO REFORÇADA STR 10 F
	0092850-012	MINI PLACA EVO REFORÇADA STR 12 F
	0092850-014	MINI PLACA EVO REFORÇADA STR 14 F
	0092850-016	MINI PLACA EVO REFORÇADA STR 16 F
	0092850-104	MINI PLACA EVO REFORÇADA STR 4 F MAX
	0092850-106	MINI PLACA EVO REFORÇADA STR 6 F MAX
	0092850-108	MINI PLACA EVO REFORÇADA STR 8 F MAX
	0092850-110	MINI PLACA EVO REFORÇADA STR 10 F MAX
	0092850-112	MINI PLACA EVO REFORÇADA STR 12 F MAX
	0092850-114	MINI PLACA EVO REFORÇADA STR 14 F MAX
	0092850-116	MINI PLACA EVO REFORÇADA STR 16 F MAX
	0092850-120	MINI PLACA EVO REFORÇADA STR 20 F MAX
	0092850-204	MINI PLACA EVO REFORÇADA CURTA STR 4 F MAX
	0092850-206	MINI PLACA EVO REFORÇADA CURTA STR 6 F MAX
	0092850-208	MINI PLACA EVO REFORÇADA CURTA STR 8 F MAX
	0092850-210	MINI PLACA EVO REFORÇADA CURTA STR 10 F MAX
	0092850-212	MINI PLACA EVO REFORÇADA CURTA STR 12 F MAX
	0092850-214	MINI PLACA EVO REFORÇADA CURTA STR 14 F MAX












IMAGEM ILUSTRATIVA	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO COMPLETA
	0092850-216	MINI PLACA EVO REFORÇADA CURTA STR 16 F MAX
	0092850-220	MINI PLACA EVO REFORÇADA CURTA STR 20 F MAX
	0092851-004	MINI PLACA EVO REFORÇADA STR AC MÉDIA 04 F
	0092851-006	MINI PLACA EVO REFORÇADA STR AC MÉDIA 06 F
	0092851-008	MINI PLACA EVO REFORÇADA STR AC MÉDIA 08 F
	0092851-104	MINI PLACA EVO REFORÇADA STR AC LONGA 04 F
	0092852-024	MINI PLACA EVO REFORÇADA PONTE STR MÉDIA 2 F
	0092852-044	MINI PLACA EVO REFORÇADA PONTE STR MÉDIA 4 F
	0092852-046	MINI PLACA EVO REFORÇADA PONTE STR LONGA 4 F
	0092852-048	MINI PLACA EVO REFORÇADA PONTE STR EXTRA LONGA 4 F
	0092852-064	MINI PLACA EVO REFORÇADA PONTE STR MÉDIA 6 F
	0092852-066	MINI PLACA EVO REFORÇADA PONTE STR LONGA 6 F
	0092852-068	MINI PLACA EVO REFORÇADA PONTE STR EXTRA LONGA 6 F
	0092852-084	MINI PLACA EVO REFORÇADA PONTE STR MÉDIA 8 F
	0092853-024	MINI PLACA EVO REFORÇADA PONTE STR MÉDIA 2 F MAX
	0092853-044	MINI PLACA EVO REFORÇADA PONTE STR MÉDIA 4 F MAX
	0092853-046	MINI PLACA EVO REFORÇADA PONTE STR LONGA 4 F MAX
	0092853-048	MINI PLACA EVO REFORÇADA PONTE STR EXTRA LONGA 4 F MAX
	0092853-064	MINI PLACA EVO REFORÇADA PONTE STR MÉDIA 6 F MAX
	0092853-066	MINI PLACA EVO REFORÇADA PONTE STR LONGA 6 F MAX
	0092853-068	MINI PLACA EVO REFORÇADA PONTE STR EXTRA LONGA 6 F MAX
	0092853-084	MINI PLACA EVO REFORÇADA PONTE STR MÉDIA 8 F MAX
	0092854-040	MINI PLACA EVO EXTRA REFORÇADA STR 4 F
	0092854-046	MINI PLACA EVO EXTRA REFORÇADA PONTE STR LONGA 4 F
	0092854-048	MINI PLACA EVO EXTRA REFORÇADA PONTE STR EXTRA LONGA 4 F





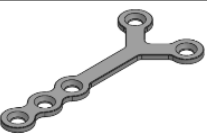



IMAGEM ILUSTRATIVA	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO COMPLETA
	0092854-066	MINI PLACA EVO EXTRA REFORÇADA PONTE STR LONGA 6 F
	0092854-068	MINI PLACA EVO EXTRA REFORÇADA PONTE STR EXTRA LONGA 6 F
	0092856-220	MINI PLACA EVO REFORÇADA T 2X2 F
	0092856-222	MINI PLACA EVO REFORÇADA T PEQUENA 2X2 F
	0092856-224	MINI PLACA EVO REFORÇADA T MÉDIA 2X2 F
	0092856-240	MINI PLACA EVO REFORÇADA T 2X4 F
	0092856-242	MINI PLACA EVO REFORÇADA T PEQUENA 2X4 F
	0092856-244	MINI PLACA EVO REFORÇADA T MÉDIA 2X4 F
	0092857-220	MINI PLACA EVO REFORÇADA T 2X2 F MAX
	0092857-221	MINI PLACA EVO REFORÇADA T EXTRA PEQUENA 2X2 F MAX
	0092857-222	MINI PLACA EVO REFORÇADA T PEQUENA 2X2 F MAX
	0092857-224	MINI PLACA EVO REFORÇADA T MÉDIA 2X2 F MAX
	0092857-240	MINI PLACA EVO REFORÇADA T 2X4 F MAX
	0092857-241	MINI PLACA EVO REFORÇADA T EXTRA PEQUENA 2X4 F MAX
	0092857-242	MINI PLACA EVO REFORÇADA T PEQUENA 2X4 F MAX
	0092857-244	MINI PLACA EVO REFORÇADA T MÉDIA 2X4 F MAX
	0092857-330	MINI PLACA EVO REFORÇADA T 3X3 F MAX
	0092858-220	MINI PLACA EVO REFORÇADA Y 2X2 F
	0092858-222	MINI PLACA EVO REFORÇADA Y PEQUENA 2X2 F
	0092858-224	MINI PLACA EVO REFORÇADA Y MÉDIA 2X2 F
	0092858-226	MINI PLACA EVO REFORÇADA Y LONGA 2X2 F
	0092858-230	MINI PLACA EVO REFORÇADA Y 2X3 F
	0092858-232	MINI PLACA EVO REFORÇADA Y PEQUENA 2X3 F
	0092858-234	MINI PLACA EVO REFORÇADA Y MÉDIA 2X3 F
	0092858-236	MINI PLACA EVO REFORÇADA Y LONGA 2X3 F
	0092858-320	MINI PLACA EVO REFORÇADA Y 3X2 F
	0092858-322	MINI PLACA EVO REFORÇADA Y PEQUENA 3X2 F
	0092858-324	MINI PLACA EVO REFORÇADA Y MÉDIA 3X2 F
	0092858-326	MINI PLACA EVO REFORÇADA Y LONGA 3X2 F
	0092859-220	MINI PLACA EVO REFORÇADA Y 2X2 F MAX
	0092859-222	MINI PLACA EVO REFORÇADA Y PEQUENA 2X2 F MAX
	0092859-224	MINI PLACA EVO REFORÇADA Y MÉDIA 2X2 F MAX
	0092859-226	MINI PLACA EVO REFORÇADA Y LONGA 2X2 F MAX
	0092859-230	MINI PLACA EVO REFORÇADA Y 2X3 F MAX
	0092859-232	MINI PLACA EVO REFORÇADA Y PEQUENA 2X3 F MAX
	0092859-234	MINI PLACA EVO REFORÇADA Y MÉDIA 2X3 F MAX
	0092859-236	MINI PLACA EVO REFORÇADA Y LONGA 2X3 F MAX
	0092859-320	MINI PLACA EVO REFORÇADA Y 3X2 F MAX
	0092859-322	MINI PLACA EVO REFORÇADA Y PEQUENA 3X2 F MAX
	0092859-324	MINI PLACA EVO REFORÇADA Y MÉDIA 3X2 F MAX
	0092859-326	MINI PLACA EVO REFORÇADA Y LONGA 3X2 F MAX
	0092860-002	MINI PLACA EVO CHIN REFORÇADA AVANÇO 2MM

IMAGEM ILUSTRATIVA	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO COMPLETA
	0092860-004	MINI PLACA EVO CHIN REFORÇADA AVANÇO 4MM
	0092860-006	MINI PLACA EVO CHIN REFORÇADA AVANÇO 6MM
	0092860-008	MINI PLACA EVO CHIN REFORÇADA AVANÇO 8MM
	0092860-010	MINI PLACA EVO CHIN REFORÇADA AVANÇO 10MM
	0092860-012	MINI PLACA EVO CHIN REFORÇADA AVANÇO 12MM
	0092860-014	MINI PLACA EVO CHIN REFORÇADA AVANÇO 14MM
	0092860-016	MINI PLACA EVO CHIN REFORÇADA AVANÇO 16MM
	0092862-006	MINI PLACA EVO OSTEOTOMIA SAGITAL CURVA 6MM
	0092862-012	MINI PLACA EVO OSTEOTOMIA SAGITAL CURVA 12MM
	0092862-016	MINI PLACA EVO OSTEOTOMIA SAGITAL CURVA 16,5MM
	0092862-106	MINI PLACA EVO OSTEOTOMIA SAGITAL STR 6MM
	0092862-112	MINI PLACA EVO OSTEOTOMIA SAGITAL STR 12MM
	0092862-115	MINI PLACA EVO OSTEOTOMIA SAGITAL STR 15MM
	0092862-120	MINI PLACA EVO OSTEOTOMIA SAGITAL STR 20MM
	0092864-006	MINI PLACA EVO OSTEOTOMIA SAGITAL PONTE STR 6MM
	0092864-008	MINI PLACA EVO OSTEOTOMIA SAGITAL PONTE STR 8MM
	0092864-010	MINI PLACA EVO OSTEOTOMIA SAGITAL PONTE STR 10MM
	0092864-012	MINI PLACA EVO OSTEOTOMIA SAGITAL PONTE STR 12MM
	0092866-008	MINI PLACA EVO OSTEOTOMIA SAGITAL AJUSTE HORIZONTAL 8MM
	0092866-012	MINI PLACA EVO OSTEOTOMIA SAGITAL AJUSTE HORIZONTAL 12MM
	0092870-033	MINI PLACA EVO OSTEOTOMIA SAGITAL 33MM TIPO SPLITFIX
	0092870-040	MINI PLACA EVO OSTEOTOMIA SAGITAL 40MM TIPO SPLITFIX
	0092872-004	MINI PLACA EVO OSTEOTOMIA SAGITAL AJUSTÁVEL 4 F TIPO SLIDING
	0092872-008	MINI PLACA EVO OSTEOTOMIA SAGITAL AJUSTÁVEL 8 F TIPO SLIDING
	0092874-006	MINI PLACA EVO OSTEOTOMIA SAGITAL 6 F TIPO SLIDER
	0092874-008	MINI PLACA EVO OSTEOTOMIA SAGITAL 8 F TIPO SLIDER
	0092876-004	MINI PLACA EVO BSSO 4 F
	0092876-006	MINI PLACA EVO BSSO 6 F
	0092878-006	MINI PLACA EVO REFORÇADA ANGULADA 6 F
	0092878-008	MINI PLACA EVO REFORÇADA ANGULADA 8 F
	0092879-070	MINI PLACA EVO SUBCONDÍLEA DIREITA 7 F
	0092879-071	MINI PLACA EVO SUBCONDÍLEA ESQUERDA 7 F










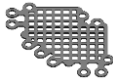



IMAGEM ILUSTRATIVA	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO COMPLETA
	0092879-072	MINI PLACA EVO SUBCONDÍLEA 7 F - DUAL FACE
	0092879-073	MINI PLACA EVO SUBCONDÍLEA 7 F - DUAL FACE PB
	0092880-013	MINI PLACA EVO CRÂNIO TOMIA 13MM
	0092880-018	MINI PLACA EVO CRÂNIO TOMIA 18MM
	0092880-022	MINI PLACA EVO CRÂNIO TOMIA 22MM
	0092880-025	MINI PLACA EVO CRÂNIO TOMIA 25MM
	0092890-000	MINI MALHA EVO P/ ASSOALHO ORBITAL PEQUENA
	0092890-005	MINI MALHA EVO P/ ASSOALHO ORBITAL MÉDIA
	0092890-010	MINI MALHA EVO P/ ASSOALHO ORBITAL GRANDE
	0092890-015	MINI MALHA EVO P/ ASSOALHO ORBITAL PARCIAL
	0092890-018	MINI MALHA EVO P/ ASSOALHO ORBITAL 18MM
	0092890-030	MINI MALHA EVO P/ ASSOALHO ORBITAL 30MM
	0092890-040	MINI MALHA EVO P/ ASSOALHO ORBITAL 40MM
	0092895-000	MINI MALHA EVO NASAL
	0092837-002	MINI PLACA EVO LE FORT PB DIREITA C/ OBLONGO AVANÇO 2MM
	0092837-003	MINI PLACA EVO LE FORT PB DIREITA C/ OBLONGO AVANÇO 3MM
	0092837-004	MINI PLACA EVO LE FORT PB DIREITA C/ OBLONGO AVANÇO 4MM
	0092837-005	MINI PLACA EVO LE FORT PB DIREITA C/ OBLONGO AVANÇO 5MM
	0092837-006	MINI PLACA EVO LE FORT PB DIREITA C/ OBLONGO AVANÇO 6MM
	0092837-008	MINI PLACA EVO LE FORT PB DIREITA C/ OBLONGO AVANÇO 8MM
	0092837-010	MINI PLACA EVO LE FORT PB DIREITA C/ OBLONGO AVANÇO 10MM
	0092837-012	MINI PLACA EVO LE FORT PB DIREITA C/ OBLONGO AVANÇO 12MM
	0092837-102	MINI PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA C/ OBLONGO AVANÇO 2MM
	0092837-103	MINI PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA C/ OBLONGO AVANÇO 3MM
	0092837-104	MINI PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA C/ OBLONGO AVANÇO 4MM
	0092837-105	MINI PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA C/ OBLONGO AVANÇO 5MM

IMAGEM ILUSTRATIVA	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO COMPLETA
	0092837-106	MINI PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA C/ OBLONGO AVANÇO 6MM
	0092837-108	MINI PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA C/ OBLONGO AVANÇO 8MM
	0092837-110	MINI PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA C/ OBLONGO AVANÇO 10MM
	0092837-112	MINI PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA C/ OBLONGO AVANÇO 12MM
	0092834-102	MINI PLACA EVO MENTO PB AVANÇO 2MM
	0092834-104	MINI PLACA EVO MENTO PB AVANÇO 4MM
	0092834-106	MINI PLACA EVO MENTO PB AVANÇO 6MM
	0092834-108	MINI PLACA EVO MENTO PB AVANÇO 8MM
	0092834-110	MINI PLACA EVO MENTO PB AVANÇO 10MM
	0092834-112	MINI PLACA EVO MENTO PB AVANÇO 12MM
	0092834-114	MINI PLACA EVO MENTO PB AVANÇO 14MM
	0092838-002	MINI PLACA EVO LE FORT PB DIREITA AVANÇO 2MM
	0092838-003	MINI PLACA EVO LE FORT PB DIREITA AVANÇO 3MM
	0092838-004	MINI PLACA EVO LE FORT PB DIREITA AVANÇO 4MM
	0092838-005	MINI PLACA EVO LE FORT PB DIREITA AVANÇO 5MM
	0092838-006	MINI PLACA EVO LE FORT PB DIREITA AVANÇO 6MM
	0092838-008	MINI PLACA EVO LE FORT PB DIREITA AVANÇO 8MM
	0092838-010	MINI PLACA EVO LE FORT PB DIREITA AVANÇO 10MM
	0092838-012	MINI PLACA EVO LE FORT PB DIREITA AVANÇO 12MM
	0092838-102	MINI PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA AVANÇO 2MM
	0092838-103	MINI PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA AVANÇO 3MM
	0092838-104	MINI PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA AVANÇO 4MM
	0092838-105	MINI PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA AVANÇO 5MM
	0092838-106	MINI PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA AVANÇO 6MM
	0092838-108	MINI PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA AVANÇO 8MM
	0092838-110	MINI PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA AVANÇO 10MM
	0092838-112	MINI PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA AVANÇO 12MM
	0092836-102	MINI PLACA EVO CHIN PB AVANÇO 2,5MM
	0092836-104	MINI PLACA EVO CHIN PB AVANÇO 4MM
	0092836-106	MINI PLACA EVO CHIN PB AVANÇO 6MM
	0092836-108	MINI PLACA EVO CHIN PB AVANÇO 8MM
	0092836-110	MINI PLACA EVO CHIN PB AVANÇO 10MM
	0092836-112	MINI PLACA EVO CHIN PB AVANÇO 12MM
	0092836-114	MINI PLACA EVO CHIN PB AVANÇO 14MM
	0092836-116	MINI PLACA EVO CHIN PB AVANÇO 16MM
	0092860-102	MINI PLACA EVO CHIN PB REFORÇADA AVANÇO 2MM
	0092860-104	MINI PLACA EVO CHIN PB REFORÇADA AVANÇO 4MM
	0092860-106	MINI PLACA EVO CHIN PB REFORÇADA AVANÇO 6MM
	0092860-108	MINI PLACA EVO CHIN PB REFORÇADA AVANÇO 8MM
	0092860-110	MINI PLACA EVO CHIN PB REFORÇADA AVANÇO 10MM
	0092860-112	MINI PLACA EVO CHIN PB REFORÇADA AVANÇO 12MM
	0092860-114	MINI PLACA EVO CHIN PB REFORÇADA AVANÇO 14MM
	0092860-116	MINI PLACA EVO CHIN PB REFORÇADA AVANÇO 16MM












IMAGEM ILUSTRATIVA	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO COMPLETA
	0092860-202	MINI PLACA EVO CHIN PB AVANÇO 2MM MAX
	0092860-204	MINI PLACA EVO CHIN PB AVANÇO 4MM MAX
	0092860-206	MINI PLACA EVO CHIN PB AVANÇO 6MM MAX
	0092860-208	MINI PLACA EVO CHIN PB AVANÇO 8MM MAX
	0092860-210	MINI PLACA EVO CHIN PB AVANÇO 10MM MAX
	0092860-212	MINI PLACA EVO CHIN PB AVANÇO 12MM MAX
	0092860-214	MINI PLACA EVO CHIN PB AVANÇO 14MM MAX
	0092860-216	MINI PLACA EVO CHIN PB AVANÇO 16MM MAX
	0092881-222	MINI PLACA EVO PONTE 2X2 F PEQUENA
	0092881-224	MINI PLACA EVO PONTE 2X2 F MÉDIA
	0092881-226	MINI PLACA EVO PONTE 2X2 F LONGA
	0092881-228	MINI PLACA EVO PONTE 2X2 F EXTRA LONGA
	0092881-338	MINI PLACA EVO PONTE 3X3 F EXTRA LONGA
	0092881-223	MINI PLACA EVO PONTE PB 2X2 F PEQUENA
	0092881-225	MINI PLACA EVO PONTE PB 2X2 F MÉDIA
	0092881-227	MINI PLACA EVO PONTE PB 2X2 F LONGA
	0092881-229	MINI PLACA EVO PONTE PB 2X2 F EXTRA LONGA
	0092881-339	MINI PLACA EVO PONTE PB 3X3 F EXTRA LONGA

IMAGEM ILUSTRATIVA	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO COMPLETA
	0092882-222	MINI PLACA EVO L 2X2 F PEQUENA - DUAL FACE
	0092882-224	MINI PLACA EVO L 2X2 F MÉDIA - DUAL FACE
	0092882-226	MINI PLACA EVO L 2X2 F LONGA - DUAL FACE
	0092882-228	MINI PLACA EVO L 2X2 F EXTRA LONGA - DUAL FACE
	0092882-223	MINI PLACA EVO L 2X2 F PEQUENA - DUAL FACE PB
	0092882-225	MINI PLACA EVO L 2X2 F MÉDIA - DUAL FACE PB
	0092882-227	MINI PLACA EVO L 2X2 F LONGA - DUAL FACE PB
	0092882-229	MINI PLACA EVO L 2X2 F EXTRA LONGA - DUAL FACE PB
	0092883-222	MINI PLACA EVO C 2X2 F PEQUENA - DUAL FACE
	0092883-224	MINI PLACA EVO C 2X2 F MÉDIA - DUAL FACE

IMAGEM ILUSTRATIVA	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO COMPLETA
	0092883-226	MINI PLACA EVO C 2X2 F LONGA - DUAL FACE
	0092883-228	MINI PLACA EVO C 2X2 F EXTRA LONGA - DUAL FACE
	0092883-223	MINI PLACA EVO C 2X2 F PEQUENA - DUAL FACE PB
	0092883-225	MINI PLACA EVO C 2X2 F MÉDIA - DUAL FACE PB
	0092883-227	MINI PLACA EVO C 2X2 F LONGA - DUAL FACE PB
	0092883-229	MINI PLACA EVO C 2X2 F EXTRA LONGA - DUAL FACE PB
	0092884-222	MINI PLACA EVO T 2X2 F PEQUENA - DUAL FACE
	0092884-224	MINI PLACA EVO T 2X2 F MÉDIA - DUAL FACE
	0092884-226	MINI PLACA EVO T 2X2 F LONGA - DUAL FACE
	0092884-223	MINI PLACA EVO T 2X2 F PEQUENA - DUAL FACE PB
	0092884-225	MINI PLACA EVO T 2X2 F MÉDIA - DUAL FACE PB











IMAGEM ILUSTRATIVA	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO COMPLETA
	0092884-227	MINI PLACA EVO T 2X2 F LONGA - DUAL FACE PB
	0092836-202	MINI PLACA EVO CHIN PB ANATÔMICA AVANÇO 2MM
	0092836-203	MINI PLACA EVO CHIN PB ANATÔMICA AVANÇO 3MM
	0092836-204	MINI PLACA EVO CHIN PB ANATÔMICA AVANÇO 4MM
	0092836-206	MINI PLACA EVO CHIN PB ANATÔMICA AVANÇO 6MM
	0092836-208	MINI PLACA EVO CHIN PB ANATÔMICA AVANÇO 8MM
	0092836-210	MINI PLACA EVO CHIN PB ANATÔMICA AVANÇO 10MM
	0092817-522	MINI PLACA EVO PONTE T PEQUENA 5X2 F
	0092817-524	MINI PLACA EVO PONTE T MÉDIA 5X2 F
	0092817-526	MINI PLACA EVO PONTE T LONGA 5X2 F
	0092829-221	MINI PLACA EVO Z 100° PB ESQUERDA STANDARD
	0092829-223	MINI PLACA EVO Z 100° PB ESQUERDA PEQUENA
	0092829-225	MINI PLACA EVO Z 100° PB ESQUERDA MÉDIA
	0092829-227	MINI PLACA EVO Z 100° PB ESQUERDA LONGA
	0092829-220	MINI PLACA EVO Z 100° PB DIREITA STANDARD
	0092829-222	MINI PLACA EVO Z 100° PB DIREITA PEQUENA
	0092829-224	MINI PLACA EVO Z 100° PB DIREITA MÉDIA
	0092829-226	MINI PLACA EVO Z 100° PB DIREITA LONGA
	0092904-010	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PBAC STR 10 F
	0092904-012	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PBAC STR 12 F
	0092904-014	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PBAC STR 14 F
	0092904-016	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PBAC STR 16 F
	0092906-040	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PBAC PONTE STR 4 F
	0092906-044	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PBAC PONTE STR MÉDIA 4 F
	0092906-046	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PBAC PONTE STR LONGA 4 F
	0092906-060	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PBAC PONTE STR 6 F
	0092906-064	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PBAC PONTE STR MÉDIA 6 F
	0092906-066	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PBAC PONTE STR LONGA 6 F
	0092906-080	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PBAC PONTE STR 8 F
	0092906-084	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PBAC PONTE STR MÉDIA 8 F
	0092906-086	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PBAC PONTE STR LONGA 8 F










IMAGEM ILUSTRATIVA	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO COMPLETA
	0092908-060	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PBAC CURVADA 6 F
	0092910-330	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PBAC ANGULADA 3+3 F
	0092910-440	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PBAC ANGULADA 4+4 F
	0092930-070	PLACA SUBCONDÍLEA EVO DIREITA 7 F
	0092930-071	PLACA SUBCONDÍLEA EVO ESQUERDA 7 F
	0092950-006	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO STR 6 F
	0092950-008	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO STR 8 F
	0092950-010	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO STR 10 F
	0092950-012	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO STR 12 F
	0092950-014	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO STR 14 F
	0092950-016	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO STR 16 F
	0092950-018	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO STR 18 F
	0092950-020	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO STR 20 F
	0092950-022	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO STR 22 F
	0092952-040	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PONTE STR 4 F
	0092952-044	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PONTE STR MÉDIA 4 F
	0092952-046	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PONTE STR LONGA 4 F
	0092952-060	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PONTE STR 6 F
	0092952-064	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PONTE STR MÉDIA 6 F
	0092952-066	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PONTE STR LONGA 6 F
	0092952-080	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PONTE STR 8 F
	0092952-084	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PONTE STR MÉDIA 8 F
	0092952-086	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PONTE STR LONGA 8 F
	0092964-090	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO DIREITA 4+9 F
	0092964-091	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO ESQUERDA 4+9 F
	0092964-170	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO DIREITA 4+17 F

IMAGEM ILUSTRATIVA	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO COMPLETA
	0092964-171	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO ESQUERDA 4+17 F
	0092965-110	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO DIREITA 5+11 F
	0092965-111	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO ESQUERDA 5+11 F
	0092965-220	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO DIREITA 5+22 F
	0092965-221	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO ESQUERDA 5+22 F
	0092967-230	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO DIREITA 7+23 F
	0092967-231	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO ESQUERDA 7+23 F
	0092974-144	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL PRÉ-CONTORNADA 4+14+4 F
	0092974-164	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL PRÉ-CONTORNADA 4+16+4 F
	0092974-184	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL PRÉ-CONTORNADA 4+18+4 F
	0092974-205	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL PRÉ-CONTORNADA 5+20+5 F
	0092974-225	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL PRÉ-CONTORNADA 5+22+5 F




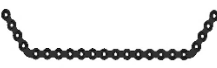


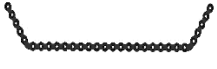






IMAGEM ILUSTRATIVA	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO COMPLETA
	0092974-226	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL PRÉ-CONTORNADA 6+22+6 F
	0092974-245	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL PRÉ-CONTORNADA 5+24+5 F
	0092974-246	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL PRÉ-CONTORNADA 6+24+6 F
	0092975-144	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL 4+14+4 F
	0092975-164	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL 4+16+4 F
	0092975-184	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL 4+18+4 F
	0092975-205	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL 5+20+5 F
	0092975-225	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL 5+22+5 F
	0092975-245	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL 5+24+5 F
	0092976-226	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL 6+22+6 F
	0092976-246	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL 6+24+6 F
	0092977-018	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO ARQUEADA 18 F
	0092977-020	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO ARQUEADA 20 F

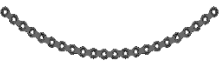
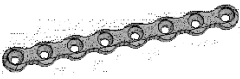






IMAGEM ILUSTRATIVA	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO COMPLETA
	0092977-022	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO ARQUEADA 22 F
	0092950-106	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA STR 6 F
	0092950-108	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA STR 8 F
	0092950-110	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA STR 10 F
	0092950-112	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA STR 12 F
	0092950-114	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA STR 14 F
	0092950-116	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA STR 16 F
	0092950-118	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA STR 18 F
	0092950-120	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA STR 20 F
	0092950-122	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA STR 22 F
	0092950-124	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA STR 24 F
	0092952-140	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA PONTE STR 4 F
	0092952-144	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA PONTE STR MÉDIA 4 F
	0092952-146	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA PONTE STR LONGA 4 F
	0092952-160	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA PONTE STR 6 F
	0092952-164	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA PONTE STR MÉDIA 6 F
	0092952-166	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA PONTE STR LONGA 6 F
	0092952-180	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA PONTE STR 8 F
	0092952-184	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA PONTE STR MÉDIA 8 F
0092952-186	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA PONTE STR LONGA 8 F	
	0092980-510	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA 110° DIREITA 5+10 F
	0092980-511	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA 110° DIREITA 5+11 F
	0092980-512	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA 110° DIREITA 5+12 F
	0092981-510	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA 110° ESQUERDA 5+10 F
	0092981-511	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA 110° ESQUERDA 5+11 F

IMAGEM ILUSTRATIVA	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO COMPLETA
	0092981-512	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA 110° ESQUERDA 5+12 F
	0092982-515	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL REFORÇADA 110° 5+15+5 F
	0092982-517	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL REFORÇADA 110° 5+17+5 F
	0092982-519	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL REFORÇADA 110° 5+19+5 F
	0092982-521	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL REFORÇADA 110° 5+21+5 F
	0092982-623	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL REFORÇADA 110° 6+23+6 F
	0092982-625	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL REFORÇADA 110° 6+25+6 F
	0092983-510	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA 120° DIREITA 5+10 F
	0092983-511	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA 120° DIREITA 5+11 F
	0092983-512	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA 120° DIREITA 5+12 F
	0092984-510	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA 120° ESQUERDA 5+10 F
	0092984-511	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA 120° ESQUERDA 5+11 F

IMAGEM ILUSTRATIVA	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO COMPLETA
	0092984-512	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA 120° ESQUERDA 5+12 F
	0092985-515	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL REFORÇADA 120° 5+15+5 F
	0092985-517	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL REFORÇADA 120° 5+17+5 F
	0092985-519	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL REFORÇADA 120° 5+19+5 F
	0092985-521	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL REFORÇADA 120° 5+21+5 F
	0092985-623	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL REFORÇADA 120° 6+23+6 F
	0092985-625	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL REFORÇADA 120° 6+25+6 F
	0092986-510	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA 130° DIREITA 5+10 F
	0092986-511	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA 130° DIREITA 5+11 F
	0092986-512	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA 130° DIREITA 5+12 F
	0092987-510	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA 130° ESQUERDA 5+10 F
	0092987-511	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA 130° ESQUERDA 5+11 F
	0092987-512	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA 130° ESQUERDA 5+12 F
	0092988-515	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL REFORÇADA 130° 5+15+5 F

IMAGEM ILUSTRATIVA	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO COMPLETA
	0092988-517	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL REFORÇADA 130° 5+17+5 F
	0092988-519	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL REFORÇADA 130° 5+19+5 F
	0092988-521	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL REFORÇADA 130° 5+21+5 F
	0092988-623	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL REFORÇADA 130° 6+23+6 F
	0092988-625	PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL REFORÇADA 130° 6+25+6 F

ACESSÓRIOS

As Placas Especiais CMF EVO Maxifix possuem acessórios, sendo eles os cursores, conforme apresentado no Quadro 2.

Quadro 2 – Acessórios (cursores) – Placas Especiais CMF EVO Maxifix

IMAGEM ILUSTRATIVA	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO COMPLETA	DIMENSÕES
	0092770-100	CURSOR P/ MINI PLACA SAGITAL EVO TIPO SPLITFIX	1,5mm
	0092772-100	CURSOR P/ MINI PLACA SAGITAL EVO TIPO SLIDING	Ø9 x 1,2mm
	0092774-120	CURSOR P/ MINI PLACA SAGITAL EVO TIPO SLIDER DIAM. 2,0MM	Ø10 x 0,8mm
	0092774-123	CURSOR P/ MINI PLACA SAGITAL EVO TIPO SLIDER DIAM. 2,3MM	Ø10 x 0,8mm

Durante o procedimento cirúrgico, os cursores auxiliam o posicionamento das Mini Placas em relação a oclusão planejada no tratamento.

Os cursores são utilizados apenas como fixação provisória e, após o posicionamento definitivo da placa durante o procedimento cirúrgico, devem ser removidos e devidamente descartados.

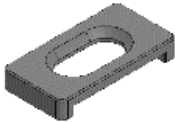



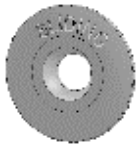



A utilização desses cursores não é mandatória, ficando a critério do profissional de saúde decidir pela sua aplicação conforme as particularidades do caso clínico, conforme situações que demandem maior complexidade ou necessitem de ajustes oclusais mais precisos.



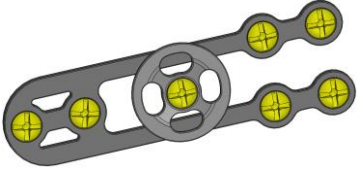
COMPATIBILIDADE COM OS ACESSÓRIOS

As placas sagitais foram projetadas para serem utilizadas com seus acessórios (quando necessário) de acordo com a finalidade prevista.

A seguir é apresentada a compatibilidade entre os produtos:

Quadro 3 – Compatibilidade Cursores (acessórios) x Mini Placas

ACESSÓRIOS	PLACAS COMPATÍVEIS	EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
<p>0092770-100 CURSOR P/ MINI PLACA SAGITAL EVO TIPO SPLITFIX</p> 	<p>0092870-033 - Mini Placa EVO Osteotomia Sagital 33mm Tipo Splitfix</p> <p>----- OU -----</p> <p>0092870-040 - Mini Placa EVO Osteotomia Sagital 40mm Tipo Splitfix</p>  	 <p>Mini Placa com o Cursor sendo utilizado como acessório provisoriamente.</p>
<p>0092772-100 CURSOR P/ MINI PLACA SAGITAL EVO TIPO SLIDING</p> 	<p>0092872-004 - Mini Placa EVO Osteotomia Sagital Ajustável 4 F Tipo Sliding</p> <p>----- OU -----</p> <p>0092872-008 - Mini Placa EVO Osteotomia Sagital Ajustável 8 F Tipo Sliding</p>  	 <p>Mini Placa com o Cursor sendo utilizado como acessório provisoriamente.</p>

ACESSÓRIOS	PLACAS COMPATÍVEIS	EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
<p>0092774-120 CURSOR P/ MINI PLACA SAGITAL EVO TIPO SLIDER DIAM. 2,0MM</p>  <p>----- OU ----- (utilizado conforme Ø parafuso a ser utilizado)</p> <p>0092774-123 CURSOR P/ MINI PLACA SAGITAL EVO TIPO SLIDER DIAM. 2,3MM</p> 	<p>0092874-006 - Mini Placa EVO Osteotomia Sagital 6 F Tipo Slider</p> <p>----- OU -----</p> <p>0092874-008 - Mini Placa EVO Osteotomia Sagital 8 F Tipo Slider</p>	 <p>Mini Placa com o Cursor sendo utilizado como acessório provisoriamente.</p>

É necessário que os implantes e acessórios sejam da Sartori e compatíveis entre si (conforme tabela acima), pois os mesmos foram projetados para tais combinações, observando acabamento, tratamento superficial e outros fatores exigidos em projetos, que podem interferir no desempenho do produto. Alertamos que o uso de implantes de diferentes fabricantes não é recomendado por motivos de incompatibilidade química, física, biológica e funcional.

COMPATIBILIDADE ENTRE OS COMPONENTES ANCILARES

Para o uso e desempenho pretendido das Placas Especiais CMF EVO Maxifix é necessário a utilização dos Parafusos para Microfragmentos, considerados ancilares (Registro ANVISA, à parte).

No Quadro 4 constam os códigos e descrições dos ancilares.

Quadro 4 – Modelos comerciais - ancilares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO - ANCILARES
AB35 0 300 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 1,5 X 04 MM
AB35 0 310 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 1,5 X 06 MM
AB35 0 320 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 1,5 X 08 MM
AB35 0 330 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 1,5 X 10 MM

CÓDIGO E DESCRIÇÃO - ANCILARES
AB35 0 340 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 1,5 X 12 MM
AB35 0 350 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 1,5 X 14 MM
AB35 0 360 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 1,8 X 04 MM
AB35 0 370 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 1,8 X 06 MM
AB35 0 380 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 1,8 X 08 MM
AB35 0 390 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 1,8 X 10 MM
AB35 0 400 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 1,8 X 12 MM
AB35 0 410 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 1,8 X 14 MM
AB35 0 420 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,0 X 06 MM
AB35 0 430 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,0 X 08 MM
AB35 0 440 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,0 X 10 MM
AB35 0 450 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,0 X 12 MM
AB35 0 460 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,0 X 14 MM
AB35 0 470 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,0 X 16 MM
AB35 0 480 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,0 X 18 MM
AB35 0 490 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,0 X 20 MM
AB35 0 500 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,3 X 06 MM
AB35 0 510 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,3 X 08 MM
AB35 0 520 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,3 X 10 MM
AB35 0 530 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,3 X 12 MM
AB35 0 540 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,3 X 14 MM
AB35 0 550 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,3 X 16 MM
AB35 0 560 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,3 X 18 MM
AB35 0 570 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,3 X 20 MM
AB35 0 580 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,4 X 06 MM
AB35 0 590 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,4 X 08 MM
AB35 0 600 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,4 X 10 MM
AB35 0 610 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,4 X 12 MM
AB35 0 620 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,4 X 14 MM
AB35 0 630 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,4 X 16 MM
AB35 0 640 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,4 X 18 MM
AB35 0 650 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,4 X 20 MM
AB35 0 660 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,4 X 22 MM
AB35 0 670 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,4 X 24 MM
AB35 0 680 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,7 X 06 MM
AB35 0 690 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,7 X 08 MM
AB35 0 700 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,7 X 10 MM
AB35 0 710 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,7 X 12 MM
AB35 0 720 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,7 X 14 MM
AB35 0 730 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,7 X 16 MM
AB35 0 740 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,7 X 18 MM
AB35 0 750 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,7 X 20 MM
AB35 0 760 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,7 X 22 MM
AB35 0 770 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,7 X 24 MM
0052012-003 - PARAFUSO NANO TI DIAM.1,2 X 03MM - FENDA CRUZ
0052012-004 - PARAFUSO NANO TI DIAM.1,2 X 04MM - FENDA CRUZ
0052012-005 - PARAFUSO NANO TI DIAM.1,2 X 05MM - FENDA CRUZ
0052012-006 - PARAFUSO NANO TI DIAM.1,2 X 06MM - FENDA CRUZ
0052012-007 - PARAFUSO NANO TI DIAM.1,2 X 07MM - FENDA CRUZ
0052012-008 - PARAFUSO NANO TI DIAM.1,2 X 08MM - FENDA CRUZ
0052012-009 - PARAFUSO NANO TI DIAM.1,2 X 09MM - FENDA CRUZ

CÓDIGO E DESCRIÇÃO - ANCILARES
0052012-010 - PARAFUSO NANO TI DIAM.1,2 X 10MM - FENDA CRUZ
0052112-003 - PARAFUSO NANO TI PURO DIAM.1,2 X 03MM - FENDA CRUZ
0052112-004 - PARAFUSO NANO TI PURO DIAM.1,2 X 04MM - FENDA CRUZ
0052112-005 - PARAFUSO NANO TI PURO DIAM.1,2 X 05MM - FENDA CRUZ
0052112-006 - PARAFUSO NANO TI PURO DIAM.1,2 X 06MM - FENDA CRUZ
0052112-007 - PARAFUSO NANO TI PURO DIAM.1,2 X 07MM - FENDA CRUZ
0052112-008 - PARAFUSO NANO TI PURO DIAM.1,2 X 08MM - FENDA CRUZ
0052112-009 - PARAFUSO NANO TI PURO DIAM.1,2 X 09MM - FENDA CRUZ
0052112-010 - PARAFUSO NANO TI PURO DIAM.1,2 X 10MM - FENDA CRUZ
0052015-003 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,5X3,0MM - FENDA CRUZ
0052015-004 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,5X4,0MM - FENDA CRUZ
0052015-005 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,5X5,0MM - FENDA CRUZ
0052015-006 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,5X6,0MM - FENDA CRUZ
0052015-007 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,5X7,0MM - FENDA CRUZ
0052015-008 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,5X8,0MM - FENDA CRUZ
0052015-009 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,5X9,0MM - FENDA CRUZ
0052015-010 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,5X10,0MM - FENDA CRUZ
0052015-011 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,5X11,0MM - FENDA CRUZ
0052015-012 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,5X12,0MM - FENDA CRUZ
0052015-013 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,5X13,0MM - FENDA CRUZ
0052015-014 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,5X14,0MM - FENDA CRUZ
0052015-015 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,5X15,0MM - FENDA CRUZ
0052015-016 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,5X16,0MM - FENDA CRUZ
0052015-017 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,5X17,0MM - FENDA CRUZ
0052015-018 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,5X18,0MM - FENDA CRUZ
0052015-019 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,5X19,0MM - FENDA CRUZ
0052015-020 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,5X20,0MM - FENDA CRUZ
0052018-003 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,8X3,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052018-004 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,8X4,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052018-005 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,8X5,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052018-006 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,8X6,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052018-007 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,8X7,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052018-008 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,8X8,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052018-009 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,8X9,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052018-010 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,8X10,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052018-011 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,8X11,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052018-012 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,8X12,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052018-013 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,8X13,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052018-014 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,8X14,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052018-015 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,8X15,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052018-016 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,8X16,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052018-017 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,8X17,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052018-018 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,8X18,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052018-019 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,8X19,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052018-020 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,8X20,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052020-004 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X4,0MM - FENDA CRUZ
0052020-005 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X5,0MM - FENDA CRUZ
0052020-006 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X6,0MM - FENDA CRUZ
0052020-007 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X7,0MM - FENDA CRUZ
0052020-008 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X8,0MM - FENDA CRUZ
0052020-009 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X9,0MM - FENDA CRUZ


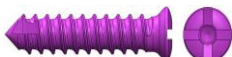



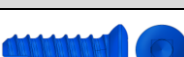




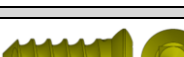





CÓDIGO E DESCRIÇÃO - ANCILARES
0052020-010 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X10,0MM - FENDA CRUZ
0052020-011 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X11,0MM - FENDA CRUZ
0052020-012 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X12,0MM - FENDA CRUZ
0052020-013 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X13,0MM - FENDA CRUZ
0052020-014 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X14,0MM - FENDA CRUZ
0052020-015 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X15,0MM - FENDA CRUZ
0052020-016 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X16,0MM - FENDA CRUZ
0052020-017 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X17,0MM - FENDA CRUZ
0052020-018 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X18,0MM - FENDA CRUZ
0052020-019 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X19,0MM - FENDA CRUZ
0052020-020 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X20,0MM - FENDA CRUZ
0052020-021 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X21,0MM - FENDA CRUZ
0052020-022 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X22,0MM - FENDA CRUZ
0052020-023 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X23,0MM - FENDA CRUZ
0052020-024 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X24,0MM - FENDA CRUZ
0052020-025 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X25,0MM - FENDA CRUZ
0052023-004 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,3X4,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052023-005 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,3X5,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052023-006 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,3X6,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052023-007 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,3X7,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052023-008 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,3X8,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052023-009 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,3X9,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052023-010 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,3X10,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052023-011 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,3X11,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052023-012 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,3X12,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052023-013 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,3X13,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052023-014 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,3X14,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052023-015 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,3X15,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052023-016 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,3X16,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052023-017 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,3X17,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052023-018 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,3X18,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052023-019 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,3X19,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052023-020 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,3X20,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052023-021 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,3X21,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052023-022 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,3X22,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052023-023 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,3X23,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052023-024 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,3X24,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052023-025 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,3X25,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052024-006 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X6,0MM - FENDA CRUZ
0052024-007 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X7,0MM - FENDA CRUZ
0052024-008 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X8,0MM - FENDA CRUZ
0052024-009 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X9,0MM - FENDA CRUZ
0052024-010 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X10,0MM - FENDA CRUZ
0052024-011 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X11,0MM - FENDA CRUZ
0052024-012 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X12,0MM - FENDA CRUZ
0052024-013 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X13,0MM - FENDA CRUZ
0052024-014 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X14,0MM - FENDA CRUZ
0052024-015 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X15,0MM - FENDA CRUZ
0052024-016 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X16,0MM - FENDA CRUZ
0052024-017 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X17,0MM - FENDA CRUZ
0052024-018 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X18,0MM - FENDA CRUZ

CÓDIGO E DESCRIÇÃO - ANCILARES
0052024-019 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X19,0MM - FENDA CRUZ
0052024-020 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X20,0MM - FENDA CRUZ
0052024-021 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X21,0MM - FENDA CRUZ
0052024-022 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X22,0MM - FENDA CRUZ
0052024-023 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X23,0MM - FENDA CRUZ
0052024-024 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X24,0MM - FENDA CRUZ
0052024-025 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X25,0MM - FENDA CRUZ
0052024-026 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X26,0MM - FENDA CRUZ
0052024-027 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X27,0MM - FENDA CRUZ
0052024-028 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X28,0MM - FENDA CRUZ
0052024-029 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X29,0MM - FENDA CRUZ
0052024-030 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X30,0MM - FENDA CRUZ
0052027-006 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X6,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052027-007 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X7,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052027-008 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X8,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052027-009 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X9,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052027-010 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X10,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052027-011 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X11,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052027-012 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X12,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052027-013 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X13,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052027-014 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X14,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052027-015 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X15,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052027-016 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X16,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052027-017 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X17,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052027-018 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X18,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052027-019 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X19,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052027-020 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X20,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052027-021 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X21,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052027-022 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X22,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052027-023 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X23,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052027-024 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X24,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052027-025 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X25,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052027-026 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X26,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052027-027 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X27,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052027-028 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X28,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052027-029 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X29,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052027-030 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X30,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ
0052115-003 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,5X3,0MM AUTOPERFURANTE - FENDA CRUZ
0052115-004 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,5X4,0MM AUTOPERFURANTE - FENDA CRUZ
0052115-005 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,5X5,0MM AUTOPERFURANTE - FENDA CRUZ
0052115-006 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,5X6,0MM AUTOPERFURANTE - FENDA CRUZ
0052115-007 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,5X7,0MM AUTOPERFURANTE - FENDA CRUZ
0052115-008 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,5X8,0MM AUTOPERFURANTE - FENDA CRUZ
0052120-004 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X4,0MM AUTOPERFURANTE - FENDA CRUZ
0052120-005 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X5,0MM AUTOPERFURANTE - FENDA CRUZ
0052120-006 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X6,0MM AUTOPERFURANTE - FENDA CRUZ
0052120-007 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X7,0MM AUTOPERFURANTE - FENDA CRUZ
0052120-008 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X8,0MM AUTOPERFURANTE - FENDA CRUZ

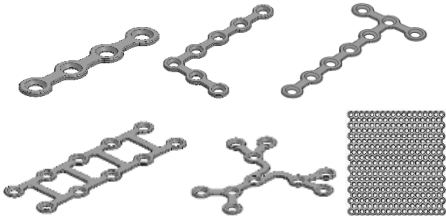

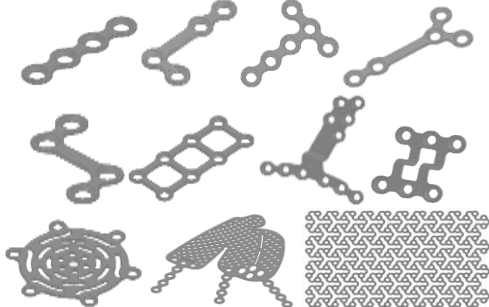


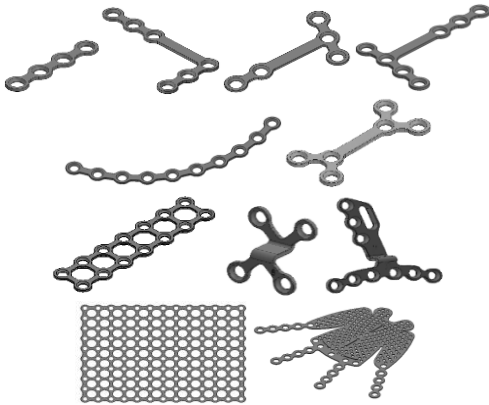


COMBINAÇÃO INDICADA ENTRE PLACAS/MALHAS/ TELAS E PARAFUSOS




As Placas Especiais CMF EVO Maxifix estão relacionadas aos seguintes componentes ancilares (Registro Anvisa, à parte) apresentados no Quadro 5 e 6.

Quadro 5 – Relação dos ancilares compatíveis com as Placas Especiais CMF EVO Maxifix

Objeto Registro	Ancilares		
Placas / Malhas / Telas	Códigos ancilares (Parafusos)	Registro Anvisa	
Nano 00925XX-XXX	Ø1,2mm – 0052012-003 a 010		Em desenvolvimento 80083650XXX
	Ø1,2mm – 0052112-003 a 010		
Micro 00921XX-XXX	Ø1,5mm – AB35 0 300 a 350		80083650024
	Ø1,5mm – 0052015-003 a 020		
	Ø1,5mm – 0052115-003 a 008		
	Ø1,8mm – AB35 0 360 a 410		
	Ø1,8mm – 0052018-003 a 020		
Mini 00928XX-XXX	Ø2,0mm – AB35 0 420 a 490		80083650024
	Ø2,0mm – 0052020-004 a 025		
	Ø2,0mm – 0052120-004 a 008		
	Ø2,3mm – AB35 0 500 a 570		
	Ø2,3mm – 0052023-004 a 025		
Reconstrução 00929XX-XXX	Ø2,4mm – AB35 0 580 a 670		80083650024
	Ø2,4mm – 0052024-006 a 030		
	Ø2,7mm – AB35 0 680 a 770		
	Ø2,7mm – 0052027-006 a 030		

Quadro 6 – Ilustração de exemplos de modelos comerciais de Placas Especiais CMF EVO Maxifix com seus respectivos ancilares

Objeto Registro - Placas / Malhas / Telas	+	Ancilares - Parafusos
<p>Nano (00925XX-XXX)</p> 	+	<p>Parafusos Ø1,2mm (0052012-003 a 010 / 0052112-003 a 010)</p> 
<p>Micro (00921XX-XXX)</p> 	+	<p>Parafusos Ø1,5mm (AB35 0 300 a 350 / 0052015-003 a 020 / 0052115-003 a 008)</p>  <p>***** OU *****</p> <p>Parafusos Ø1,8mm (AB35 0 360 a 410 / 0052018-003 a 020)</p> 
<p>Mini (00928XX-XXX)</p> 	+	<p>Parafusos Ø2,0mm (AB35 0 420 a 490 / 0052020-004 a 025 / 0052120-004 a 008)</p>  <p>***** OU *****</p> <p>Parafusos Ø2,3mm (AB35 0 500 a 570 / 0052023-004 a 025)</p> 

Objeto Registro - Placas / Malhas / Telas	+	Ancilares - Parafusos
<p data-bbox="325 450 660 479">Reconstrução (00929XX-XXX)</p> 	+	<p data-bbox="863 338 1310 400">Parafusos Ø2,4mm (AB35 0 580 a 670 / 0052024-006 a 030)</p>  <p data-bbox="999 551 1171 573">***** OU *****</p> <p data-bbox="863 629 1310 692">Parafusos Ø2,7mm (AB35 0 680 a 770 / 0052027-006 a 030)</p> 

MATERIAL DE APOIO

O Quadro 7 apresentado a seguir, refere-se aos instrumentais utilizados como apoio para a implantação das Placas Especiais CMF EVO Maxifix. Os instrumentais abaixo não são objetos desse registro, ou seja, são notificados separadamente, portanto, devem ser adquiridos separadamente e sempre da Sartori, para não ocorrer incongruência entre os encaixes.

Quadro 7 – Instrumentais de apoio

Anvisa Nº	Nome comercial
80083650035	Brocas
80083650057	Instrumental Cirúrgico – Aço Inoxidável

Os instrumentais são fornecidos descontaminados, porém não esterilizados. A esterilização inadequada do instrumental cirúrgico pode causar infecção cruzada.

Os instrumentais cirúrgicos estão sujeitos a desgastes durante a sua utilização normal podendo, portanto, quebrar ou se desgastar. Os instrumentais devem ser verificados regularmente, para análise de possíveis desgastes e danos.

Para mais informações acerca do instrumental, consulte o distribuidor/fornecedor do produto.

COMPOSIÇÃO

Os modelos comerciais das Placas Especiais CMF EVO Maxifix são fabricados de Titânio Puro Grau 2, conforme as especificações da norma ASTM F67. O Quadro 8 descreve as características da matéria-prima utilizada na fabricação dos modelos comerciais das Placas Especiais CMF EVO Maxifix.

Quadro 8 - Características das matérias-primas das Placas Especiais CMF EVO Maxifix

Componente	Matéria-prima	Norma	Forma	Condição	Dimensão (mm)
Placas / Malhas / Telas	Titânio Puro Grau 2	ASTM F67	Chapa	Recozido	Conforme desenho técnico

Os acessórios Cursor para Mini Placa Sagital EVO Tipo Sliding e Cursor para Mini Placa Sagital EVO Tipo Slider são fabricados em Liga de Titânio Ti6Al4V, conforme as especificações da norma ASTM F136. Com exceção do Cursor para Mini Placa Sagital EVO Tipo Splitfix que é fabricado com Titânio Puro Grau 2, conforme as especificações da norma ASTM F67. O Quadro 9 descreve as características das matérias-primas utilizadas na fabricação dos acessórios.

Quadro 9 - Características das matérias-primas – Cursores

Componente	Matéria-prima	Norma	Forma	Condição	Dimensão (mm)
Cursor Sliding e Slider	Liga de Titânio Ti6Al4V	ASTM F136	Barra (perfil circular)	Recozido	Conforme desenho técnico
Cursor Splitfix	Titânio Puro Grau 2	ASTM F67	Chapa	Recozido	Conforme desenho técnico

INDICAÇÃO DE USO/ FINALIDADE

As Placas Especiais CMF EVO Maxifix são utilizadas em procedimentos cirúrgicos para fixação óssea exclusiva nas regiões da mandíbula, maxila e crânio humano. As indicações são:

- Reconstruções e fraturas no terço médio da face;
- Reconstruções e fraturas maxilares e do tipo Le Fort;
- Reconstruções e fraturas mandibulares e de mento;
- Cirurgias Ortognáticas maxilares e/ou mandibulares;
- Reconstruções associadas a ressecção de Tumores;

- Reconstruções e fraturas dos ossos do crânio, cranioplastias e craniotomias.

FUNDAMENTOS DE SEU FUNCIONAMENTO E AÇÃO

A ação das placas no osso é estabilizar, restringir a movimentação dos fragmentos ósseos, auxiliar na redução de fraturas, corrigir o alinhamento, promovendo estabilidade à região afetada da mandíbula, maxila e/ou crânio humano.

O desenvolvimento das placas fundamenta-se nas cargas e forças as quais estão sujeitas e no mecanismo da consolidação óssea. As placas foram projetadas para suportarem cargas de compressão, flexão, tração, torção e cisalhamento, proporcionando estabilidade estrutural e também alívio de cargas mecânicas sobre os ossos da mandíbula, maxila e crânio.

DESEMPENHO PRETENDIDO

O desempenho pretendido, incluindo as indicações de uso e as contraindicações do dispositivo médico foram estabelecidos considerando os requisitos normativos aplicáveis, a literatura científica e clínica disponível, os resultados de ensaios validados e os princípios atualizados da tecnologia.

PROPÓSITO PRETENDIDO

O propósito pretendido das Placas Especiais CMF EVO Maxifix é proporcionar fixação de segmentos ósseos, bem como garantir a estabilidade e restaurar as funções da face e crânio. Além disso, as placas também têm a função de auxiliar no reposicionamento de ossos em procedimentos de reconstrução.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO MÉDICO, ASSIM COMO SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

CONTRAIINDICAÇÕES

A seguir estão listadas as contraindicações relativas e absolutas para a utilização das Placas Especiais CMF EVO Maxifix, ficando a cargo do cirurgião responsável, após um estudo minucioso do caso, a indicação do procedimento cirúrgico:

- Infecções ativas que possam dar origem a complicações;
- Condição clínica pré-operatória desfavorável;

- Pacientes com sensibilidade a corpos estranhos, sendo que nestes casos testes deverão ser realizados;
- Pacientes que não querem ou estão impossibilitados de seguir as instruções pré-operatórias devido às condições que apresentam (mental ou física);
- Pacientes que fazem uso de substâncias entorpecentes, alcoólicas ou fumo;
- Pacientes em estado geral comprometido e/ou imunodeprimidos impossibilitados de se submeter a um procedimento cirúrgico;
- Desordens metabólicas ou sistêmicas, ou tratamentos médicos que levam à deterioração progressiva dos ossos (terapias com corticóides);
- Estoque ósseo comprometido por doença, infecção ou implantação prévia, que não pode fornecer apoio adequado e/ou fixação dos implantes;
- Imaturidade esquelética;
- Pacientes com radioterapia pré-operatória possuem um risco aumentado de complicações relacionadas com as placas para CMF;
- Pacientes com histórico de alergia ao titânio;
- Pacientes que apresentam tumores malignos ou metástases;
- Pacientes com cobertura tissular pobre na região afetada;
- Utilização para fixação de outros ossos aqueles não mencionados na indicação de uso do produto.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Para a utilização do dispositivo médico a equipe responsável deve considerar as seguintes precauções e advertências:

- Antes da utilização do implante é necessária a leitura completa das instruções de uso do produto assim como a análise detalhada do procedimento cirúrgico a ser adotado. Alertamos que é necessário observar a correlação entre a versão da Instrução de Uso disponível no site, ou impressa, com a versão indicada no rótulo do produto;
- A má seleção dos implantes pode acarretar resultados indesejados, o cirurgião deve possuir conhecimento do produto e sua técnica de manuseio;
- A correta colocação das placas é primordial para a estabilização bem-sucedida de fraturas ou osteotomias;
- São de responsabilidade do cirurgião o conhecimento e domínio da técnica a serem utilizados, pois os resultados clínicos e a durabilidade dos implantes são extremamente dependentes de que exista uma técnica cirúrgica precisa;

- Erros no procedimento cirúrgico, como má manipulação e técnica de aplicação incorreta podem ocasionar a falha ou soltura do implante, pois nenhum implante corrige os inconvenientes decorrentes de uma técnica cirúrgica inadequada;
- O produto não deve ser utilizado caso não se consiga um suporte ósseo adequado que garanta a estabilidade do implante;
- O limite para a moldagem da placa é de 105°. Uma vez moldada não pode ser retornada a sua forma original, o que pode acarretar fratura da mesma e consequentemente falha na função do dispositivo médico;
- O dispositivo médico foi desenvolvido para fixação exclusiva dos ossos da região do crânio-maxilo-facial. A utilização do produto em outras regiões não foi prevista no projeto dos implantes e, portanto, podem acarretar sua falha, tanto por cargas estáticas quanto cíclicas (fadiga). Sendo assim, a utilização do produto para indicações que não correspondam às previamente mencionadas são contraindicadas;
- À critério do médico pode-se fazer uso de antibioticoterapia profilática pré e peri operatória, bem como antibioticoterapia em casos em que haja predisposição local e/ou sistêmica ou ocorrência de infecções;
- A função principal de um implante durante o processo de osteossíntese é auxiliar na proteção mecânica do local afetado, entretanto, não possui o desempenho do osso normal, portanto pode quebrar, deformar ou soltar, em decorrência de esforços ou atividades excessivas e carga precoce e outras situações;
- Dispositivo médico de uso único - não reutilizar, PROIBIDO REPROCESSAR;
- Não utilizar o dispositivo se a embalagem estiver aberta ou danificada;
- Este produto deve ser manipulado por equipe especializada e devidamente habilitada;
- A correta seleção e colocação dos implantes são primordiais para a estabilização bem-sucedida da região tratada;
- A utilização em pacientes com predisposição a desobedecer às orientações médicas e restrições pós-operatórias, como crianças e adolescentes, com alterações neurológicas ou dependentes químicos, representam um risco maior para falha do dispositivo médico;
- Durante o período pós-operatório, os riscos de falha do produto são maiores quando carregado além de sua capacidade funcional, contrariando as orientações médicas;
- O paciente deve fazer acompanhamento médico periódico para verificar as condições do implante, osso e do tecido adjacente;
- O dispositivo médico foi projetado para ser utilizado com instrumentais desenvolvidos para este fim, ou seja, necessários para inserção e posicionamento

adequado do dispositivo. Quaisquer improvisações com diferentes instrumentais ou técnica cirúrgica imprecisa, podem comprometer a qualidade da fixação e/ou posicionamento dos implantes;

- Os implantes nunca devem ser reutilizados, embora pareçam não danificados, as tensões prévias e que os mesmos foram submetidos, podem originar imperfeições que reduziriam o tempo de vida útil do produto num reimplante e/ou provocar infecção, rejeição e quebra;
- O sucesso de um implante de fixação metálica depende do manuseio cuidadoso e habilidade do cirurgião. Além disso, é necessário cuidado para não danificar a superfície do implante (arranhar ou fazer fenda), durante o processo de inclinação, ao utilizar instrumentos cortantes.

POSSÍVEIS EFEITOS ADVERSOS

Os efeitos indesejáveis ou anomalias a seguir indicados são susceptíveis à ocorrência. No entanto, relatórios clínicos e outras referências científicas apoiam que estes eventos adversos ou patologias são recuperados naturalmente ao longo do tempo ou são adequadamente tratados com terapia secundária simples. Os eventos adversos relatados na literatura incluem, mas não estão limitados a:

- Palpabilidade;
- Dor;
- Infecção;
- Impacto nos dentes;
- Remoção dos dentes;
- Remoção das placas;
- Alergia ao titânio;
- Periodontite;
- Perda da placa;
- Fratura da placa;
- Deiscência;
- Sinusite maxilar;
- Sensibilidade nos nervos;
- Exposição das raízes dentárias;
- Deslocamento das placas;
- Má oclusão;
- Redução da abertura bucal;
- Redução da mobilidade maxilar;

- Comprometimento da força de mordida;
- Má estabilidade da fratura;
- Exposição das placas.

INFORMAÇÕES AO USUÁRIO DO PRODUTO

A equipe médica deve orientar o paciente:

- Antes da utilização do produto é necessária a leitura completa das instruções de uso do produto assim como a análise detalhada do procedimento cirúrgico a ser adotado. Alertamos que é necessário observar a correlação entre a versão da Instrução de Uso disponível no site, ou impressa, com a versão indicada no rótulo do produto;
- O fato que o produto não substitui e não possui as mesmas características do osso normal e que, portanto, pode quebrar-se, deformar-se ou soltar-se em decorrência de esforços ou atividades excessivas, de carga precoce e outras situações que envolvam excesso de solicitação mecânica;
- Os cuidados adequados e as restrições durante o período pós-operatório. A capacidade e a vontade do paciente em seguir essas orientações constituem um dos aspectos mais importantes em um procedimento cirúrgico;
- A necessidade de acompanhamento médico periódico para checar as condições do implante, osso implantado e tecidos adjacentes;
- A necessidade de uma cirurgia de revisão, em casos de soltura e/ou fratura de componentes;
- A utilização em pacientes com predisposição a desobedecer às orientações médicas e restrições pós-operatórias, como crianças e adolescentes, com alterações neurológicas ou dependentes químicos, representam um risco maior para falha do produto;
- A necessidade de informar ser portador de implante em caso de se submeter a exame de Ressonância Magnética.

RESTRICÇÕES DE USO

- Produto de uso único, não reusar;
- O produto deve ser desprezado caso a embalagem esteja violada;
- Antes da utilização, o cirurgião deve realizar uma análise detalhada dos instrumentais (material de apoio e notificados separadamente) que irá

utilizar para a colocação do produto. Esses instrumentais devem estar íntegros e completos.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DO PRODUTO EM AMBIENTE DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM)

As informações de segurança demonstraram que os dispositivos são CONDICIONAIS por RM. Um paciente pode ser digitalizado com segurança em um scanner de RM que atenda às seguintes condições:

- Campo magnético estático de 1,5 Tesla e 3,0 Tesla, apenas.
- Campo de gradiente espacial máximo de 20 T/m.
- Taxa máxima de absorção específica (SAR) média: 2 W/kg durante 15 minutos.

INSTRUÇÕES DE USO

Para a correta utilização do produto, as seguintes instruções devem ser seguidas:


- Este produto deve ser manipulado com os devidos cuidados em locais adequados, por equipe especializada e devidamente habilitada;
- Os cuidados com este material são de responsabilidade de pessoal habilitado, os quais devem seguir normalizações e/ou demais regulamentos locais aplicáveis;
- O produto somente deve ser utilizado por profissionais da área médico-hospitalar, treinados e especializados em procedimentos para CMF, sendo de responsabilidade do cirurgião a escolha e o domínio da técnica a ser aplicada;
- Para a aplicação do produto é necessário o uso de instrumental específico, indicado no tópico "Material de Apoio", não devendo, devido à possibilidade de incompatibilidade dimensional e/ou funcional, ser utilizado com outros instrumentos que não os indicados pelo fabricante;
- Antes da cirurgia, o cirurgião deve realizar um rigoroso planejamento pré-operatório, com o estudo detalhado de cada caso e paciente. Para um planejamento completo o cirurgião deve conhecer em detalhes as opções que este produto oferece.

MANUSEIO

- A correta manipulação das Placas Especiais CMF EVO Maxifix e seus acessórios é extremamente importante, para evitar danos aos produtos médicos;
- O manuseio deste produto deve ser realizado exclusivamente por profissionais da área médico-hospitalar, treinados e especializados para este procedimento, e de acordo com as normas e práticas hospitalares adequadas a cada caso.
- Antes de qualquer utilização, é fundamental certificar-se que a embalagem está íntegra e a selagem não apresenta danos ou sinais de violação. Também é necessário confirmar que o prazo de validade não expirou.

ARMAZENAMENTO

As Placas Especiais CMF EVO Maxifix devem ser armazenadas e conservadas em:

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO	SIMBOLOGIA APRESENTADA NA ROTULAGEM (CONFORME ABNT NBR 15223-1)
Manter seco	
Proteger de luz solar	
Não usar se a embalagem estiver danificada e consultar as instruções de uso	
Frágil, manusear com cuidado	

TRANSPORTE

- O produto deve ser transportado com o devido cuidado, de forma a impedir qualquer dano ou alteração às suas características físicas e embalagens;
- Evite a queda do produto durante o transporte;
- O ambiente deve ser limpo, arejado, seco e livre da ação de intempéries;
- O agente transportador deve ser informado do conteúdo e sobre o prazo de entrega dele;

- Verifique sempre a integridade da embalagem. Não usar se a embalagem estiver danificada e consultar as instruções de uso.

LIMPEZA

As Placas Especiais CMF EVO Maxifix são fornecidas limpas, e devem ser desembaladas em ambiente controlado e logo em seguida serem esterilizadas, de forma a preservar suas condições de limpeza.

ESTERILIZAÇÃO

As Placas Especiais CMF EVO Maxifix são fornecidas na condição de produto Não Estéril, embaladas unitariamente, devendo ser retiradas de sua embalagem original e acondicionadas em recipiente apropriado para esterilização, antes da sua utilização.

O método indicado é a esterilização por calor úmido (autoclave).

Os implantes são fornecidos descontaminados pelo fabricante, porém devem ser manipulados e esterilizados adequadamente, conforme informações a seguir, de forma a evitar a contaminação do implante e conseqüentemente infecção do paciente.

Assim como o processo de limpeza do produto antes da embalagem foi validado pelo fabricante Sartori, o processo de esterilização no qual o produto é submetido – calor úmido (autoclave), também se encontra validado, demonstrando segurança e eficácia em sua aplicação.

PARÂMETROS PARA ESTERILIZAÇÃO

O método recomendado de Esterilização é por calor úmido (autoclave) conforme parâmetros abaixo:

Quadro 10 – Parâmetros para Esterilização – Calor úmido (autoclave)

Método	Temperatura	Tempo de Exposição
Calor úmido (autoclave)	134°C - 137°C	4 minutos (contados a partir do momento em que a temperatura for atingida)

VALIDADE

O prazo de validade é de 05 anos a partir da data de fabricação.

A data de fabricação, o prazo de validade, o código e número de lote devem ser consultados na rotulagem do produto.

DESCARTE

Após a utilização e a eventual remoção do paciente, as Placas Especiais CMF EVO Maxifix devem ser descartadas pelo hospital.

Recomenda-se que o produto seja completamente descaracterizado e inutilizado para o uso. Essa descaracterização é de inteira responsabilidade da instituição hospitalar.

Após a descaracterização, os produtos devem ser identificados como sendo impróprios para o uso, e descartados de acordo com a Resolução RDC nº 222/2018 que dispõe sobre as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde; e pela ABNT NBR ISO 12891-1 “Remoção e análise de implantes cirúrgicos - Parte 1 - Remoção e manuseio”.

O produto que for danificado durante o procedimento cirúrgico ou apresentar a embalagem danificada também deve ser descartado seguindo as orientações anteriormente descritas.

FORMA DE APRESENTAÇÃO DO DISPOSITIVO MÉDICO**EMBALAGEM**

Todos os modelos comerciais de Placas Especiais CMF EVO Maxifix são disponibilizados para comercialização na condição NÃO ESTÉRIL, embalados unitariamente.

As Placas são acondicionadas em embalagens plásticas EPD (PP/PE 45 µm) seladas termicamente e rotuladas, contendo as informações necessárias para a identificação do produto. Dentro da embalagem do produto, seguem cinco vias da etiqueta de rastreabilidade e um alerta de instrução de uso.

As dimensões externas das embalagens plásticas EPD utilizadas são 90 (largura) x 173 mm (comprimento) ou 75 (largura) x 280 mm (comprimento), dependendo do dimensional do produto.

O acessório também é acondicionado em embalagem plástica EPD (PP/PE 45 µm) selada termicamente e rotulada, contendo as informações necessárias para a identificação do produto. A dimensão externa da embalagem plástica EPD utilizada é 90 (largura) x 173 mm (comprimento).

Figura 1 – Imagem ilustrativa da embalagem plástica EPD



Na superfície da embalagem contém informações que identificam o produto, como código, descrição, número de lote, número do registro do produto na ANVISA etc. Dentro da embalagem são disponibilizadas 5 etiquetas de rastreabilidade e 1 alerta de instrução de uso.

A superfície da embalagem também apresenta as seguintes informações: Instrução de Uso disponível em http://www.sartori.ind.br/instrucao_uso. Reg. ANVISA: 8008365XXXX – Revisão: XX. Para obter a versão impressa sem custo de emissão e envio, contatar +55 19 3538-1910 ou e-mail: info@sartori.ind.br.

RASTREABILIDADE

A rastreabilidade das Placas Especiais CMF EVO Maxifix é realizada por meio das informações apresentadas nas etiquetas de rastreabilidade, nas quais estão disponíveis informações a respeito do fabricante, nome e modelo comercial do produto, número de lote, código do produto e o número de registro Anvisa, possibilitando traçar o caminho reverso até a fabricação do produto. Desse modo é possível verificar a matéria-prima, seus fornecedores e informações sobre os controles de qualidade realizados do início ao fim do processo de fabricação. Na embalagem dos componentes são fornecidas 5 unidades de etiqueta de rastreabilidade e sua fixação é obrigatória no prontuário clínico, no documento a ser entregue ao paciente, e na documentação fiscal que gera a cobrança.

O modelo de etiqueta de rastreabilidade das Placas Especiais CMF EVO Maxifix, é apresentado na Figura 2.

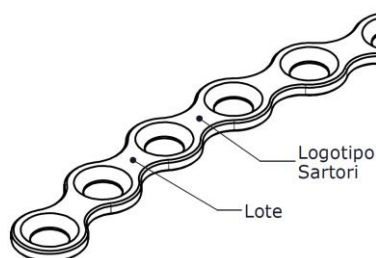
Figura 2 - Modelo de etiqueta de rastreabilidade das Placas Especiais CMF EVO Maxifix

Luiz Guilherme Sartori & Cia Ltda	
Lote: XXXXXX	Fab.: XX/XX/20XX
Código: 0092802-064	Val.: XX/XX/20XX
Reg.Anvisa:	
MINI PLACA EVO PONTE STR 6 F MEDIA	
	Matéria-prima:
	TITANIO PURO F67
(01)XXXXXXXX (17)XXXXXX(10)XXXXX	

GRAVAÇÃO

Os modelos comerciais das Placas Especiais CMF EVO Maxifix e seus acessórios, além da rastreabilidade por meio de dados impressos, também recebe uma gravação a laser com a logomarca do fabricante e número do lote. Caso seja necessária a retirada do implante do corpo do paciente, todas as informações contidas no dispositivo permanecerão inalteradas.

Figura 3 – Imagem ilustrativa de um exemplo de local de gravação a laser.
















LEGENDA DOS SÍMBOLOS CONTIDOS NA ROTULAGEM

As simbologias apresentadas no rótulo do componente estão ilustradas no Quadro 11 abaixo e seguem denominações em conformidade com as normas ABNT NBR ISO 15223-1 e ASTM F2503.

Quadro 11 – Símbolos segundo ABNT NBR ISO 15223-1 e ASTM F2503

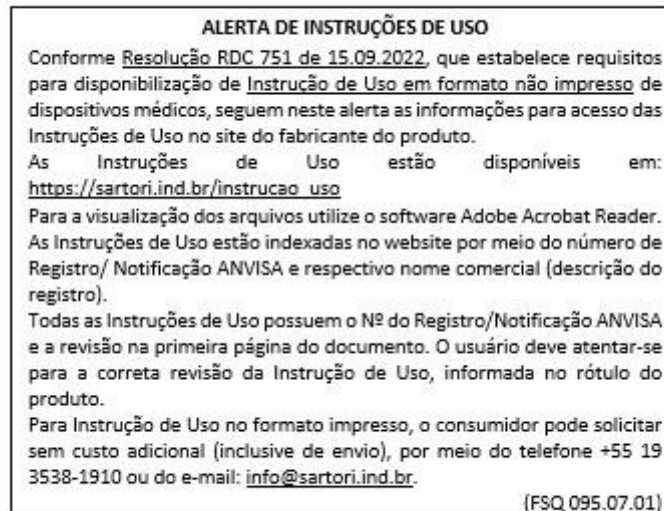
REF	Número de catálogo (código do produto embalado)
QTD	Quantidade do produto embalado
LOT	Código de remessa (número de lote do produto embalado)

	Data de Fabricação
	Usar até a data (validade)
	Não estéril
	Não Reusar
	Seguro Condicionalmente – Ressonância Magnética
	Consultar Instruções de uso ou consultar instruções eletrônicas de uso
	Fabricante
	Não usar se a embalagem estiver danificada e consultar as instruções de uso
	Proteger de luz solar
	Manter seco
	Frágil, manusear com cuidado
	Dispositivo médico
	Identificador único do dispositivo

ALERTA DE INSTRUÇÃO DE USO

Todos os produtos são acompanhados de um alerta de Instrução de Uso, contendo todas as informações para acesso no site do fabricante, além de informações de solicitação de Instrução de Uso no formato impresso.

Figura 4 – Modelo de Alerta de Instrução de Uso



NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS

Na ocorrência de qualquer evento adverso ou a necessidade de registrar queixa técnica, a SARTORI e a Anvisa devem ser notificadas por meio dos seguintes canais:

- SARTORI: <https://sartori.ind.br>
- Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) através do telefone +55 (19) 3538-1910 ou pelo e-mail: info@sartori.ind.br
- Sistema NOTIVISA (Anvisa): www.gov.br/anvisa

Fabricante Legal/ Detentor do Registro:

LUIZ GUILHERME SARTORI E CIA LTDA.

Avenida Brasil, nº 13500 - Distrito de Ajapi - Rio Claro - SP

CEP: 13508-500 Tel.: (19) 3538-1910

CNPJ: 04.861.623/0001-00 - Indústria Brasileira

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: (19) 3538-1910

e-mail: info@sartori.ind.br

Registro ANVISA nº: 80083650124

Responsável Técnico: Engº Sergio Roberto Alves de Oliveira

CREA/SP: 5070105936