

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

## CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

**Nome Técnico:** Placa especial não absorvível para osteossíntese

**Nome Comercial:** Placas Especiais CMF EVO Maxifix

**Nº Registro ANVISA:** 80083650124

**Matéria-Prima:** Placas/Malhas/Telas: Titânio Puro Grau 2 - ASTM F67

Cursor Sliding e Slider: Liga de Titânio Ti6Al4V – ASTM F136

Cursor Splitfix: Titânio Puro – Grau 2 – ASTM F67

**Produto Não Estéril – Esterilizar antes do uso**

**Validade:** 5 anos

**Dispositivo Médico de Uso Único – PROIBIDO REPROCESSAR**

### 1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

As Placas Especiais CMF EVO Maxifix, fabricadas pela Sartori, consistem em dispositivos médicos implantáveis, não ativos, invasivos cirurgicamente, de uso único.

São considerados produtos de uso em longo prazo, ou seja, até que ocorra a consolidação óssea, cuja principal função é proporcionar fixação estável aos ossos da mandíbula, maxila e crânio.

O design das placas foi projetado para aplicações no terço médio da face, crânio e mandíbula, onde possuem formas adaptadas que possibilitam a escolha dos implantes mais adequados segundo as necessidades de cada paciente.

### 2. APRESENTAÇÃO COMERCIAL

As Placas Especiais CMF EVO Maxifix fabricadas pela Sartori apresentam-se nas seguintes características geométricas que permitem o profissional escolher o modelo mais adequado conforme o caso clínico.

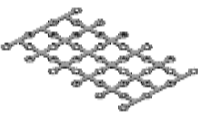
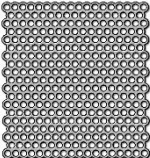
|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

Quadro 1 – Lista de Modelos Comerciais de Placas Especiais CMF EVO Maxifix

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
|    | 0092500-004       | NANO PLACA EVO STR 4 F                   |
|                                                                                     | 0092500-006       | NANO PLACA EVO STR 6 F                   |
|                                                                                     | 0092500-008       | NANO PLACA EVO STR 8 F                   |
|                                                                                     | 0092500-010       | NANO PLACA EVO STR 10 F                  |
|                                                                                     | 0092500-012       | NANO PLACA EVO STR 12 F                  |
|                                                                                     | 0092500-014       | NANO PLACA EVO STR 14 F                  |
|                                                                                     | 0092500-016       | NANO PLACA EVO STR 16 F                  |
|    | 0092503-230       | NANO PLACA EVO STR DUPLA PONTE 2X3 F     |
|                                                                                     | 0092503-240       | NANO PLACA EVO STR DUPLA PONTE 2X4 F     |
|                                                                                     | 0092503-250       | NANO PLACA EVO STR DUPLA PONTE 2X5 F     |
|  | 0092504-200       | NANO PLACA EVO PONTE STR 2 F PEQUENA     |
|                                                                                     | 0092504-201       | NANO PLACA EVO PONTE STR 2 F MÉDIA       |
|                                                                                     | 0092504-202       | NANO PLACA EVO PONTE STR 2 F LONGA       |
|                                                                                     | 0092504-203       | NANO PLACA EVO PONTE STR 2 F EXTRA LONGA |
|                                                                                     | 0092504-401       | NANO PLACA EVO PONTE STR 4 F             |
|                                                                                     | 0092504-402       | NANO PLACA EVO PONTE STR 4 F LONGA       |
|                                                                                     | 0092504-601       | NANO PLACA EVO PONTE STR 6 F             |
|                                                                                     | 0092504-602       | NANO PLACA EVO PONTE STR 6 F LONGA       |
|  | 0092505-007       | NANO PLACA EVO H 7 F                     |
|                                                                                     | 0092505-011       | NANO PLACA EVO H 11 F                    |
|  | 0092506-220       | NANO PLACA EVO L DIREITA 2X2 F           |
|                                                                                     | 0092506-230       | NANO PLACA EVO L DIREITA 2X3 F           |
|                                                                                     | 0092506-330       | NANO PLACA EVO L DIREITA 3X3 F           |
|                                                                                     | 0092506-340       | NANO PLACA EVO L DIREITA 3X4 F           |
|                                                                                     | 0092506-350       | NANO PLACA EVO L DIREITA 3X5 F           |

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
|    | 0092506-221       | NANO PLACA EVO L ESQUERDA 2X2 F |
|                                                                                     | 0092506-231       | NANO PLACA EVO L ESQUERDA 2X3 F |
|                                                                                     | 0092506-331       | NANO PLACA EVO L ESQUERDA 3X3 F |
|                                                                                     | 0092506-341       | NANO PLACA EVO L ESQUERDA 3X4 F |
|                                                                                     | 0092506-351       | NANO PLACA EVO L ESQUERDA 3X5 F |
|    | 0092516-310       | NANO PLACA EVO T 3X1 F          |
|                                                                                     | 0092516-320       | NANO PLACA EVO T 3X2 F          |
|                                                                                     | 0092516-330       | NANO PLACA EVO T 3X3 F          |
|                                                                                     | 0092516-340       | NANO PLACA EVO T 3X4 F          |
|                                                                                     | 0092516-350       | NANO PLACA EVO T 3X5 F          |
|  | 0092524-230       | NANO PLACA EVO Y 2X3 F          |
|                                                                                     | 0092524-240       | NANO PLACA EVO Y 2X4 F          |
|                                                                                     | 0092524-250       | NANO PLACA EVO Y 2X5 F          |
|                                                                                     | 0092524-430       | NANO PLACA EVO Y 4X3 F          |
|  | 0092528-420       | NANO PLACA EVO DUPLO Y 4X2 F    |
|                                                                                     | 0092528-430       | NANO PLACA EVO DUPLO Y 4X3 F    |
|                                                                                     | 0092528-440       | NANO PLACA EVO DUPLO Y 4X4 F    |
|  | 0092540-220       | NANO PLACA EVO QUADRADA 2X2 F   |
|                                                                                     | 0092540-230       | NANO PLACA EVO QUADRADA 2X3 F   |
|                                                                                     | 0092540-240       | NANO PLACA EVO QUADRADA 2X4 F   |
|  | 0092542-220       | NANO PLACA EVO RETANGULAR 2X2 F |
|                                                                                     | 0092542-230       | NANO PLACA EVO RETANGULAR 2X3 F |
|                                                                                     | 0092542-240       | NANO PLACA EVO RETANGULAR 2X4 F |
|  | 0092544-004       | NANO PLACA EVO ORBITAL 4 F      |
|                                                                                     | 0092544-006       | NANO PLACA EVO ORBITAL 6 F      |
|                                                                                     | 0092544-008       | NANO PLACA EVO ORBITAL 8 F      |
|  | 0092546-000       | NANO PLACA EVO NASAL H          |

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
|    | 0092546-004       | NANO PLACA EVO NASAL T          |
|    | 0092546-006       | NANO PLACA EVO NASAL Y          |
|    | 0092558-012       | NANO PLACA EVO CRANIOTOMIA 12MM |
|                                                                                     | 0092558-019       | NANO PLACA EVO CRANIOTOMIA 19MM |
|    | 0092564-404       | NANO TELA EVO 4X4 F             |
|                                                                                     | 0092564-406       | NANO TELA EVO 4X6 F             |
|   | 0092565-308       | NANO TELA EVO PLUS 3+8 F        |
|                                                                                     | 0092565-524       | NANO TELA EVO PLUS 15+24 F      |
|                                                                                     | 0092565-916       | NANO TELA EVO PLUS 9+16 F       |
|  | 0092566-132       | NANO TELA EVO 32X32MM MAX       |
|  | 0092100-004       | MICRO PLACA EVO STR 4 F         |
|                                                                                     | 0092100-006       | MICRO PLACA EVO STR 6 F         |
|                                                                                     | 0092100-008       | MICRO PLACA EVO STR 8 F         |
|                                                                                     | 0092100-010       | MICRO PLACA EVO STR 10 F        |
|                                                                                     | 0092100-012       | MICRO PLACA EVO STR 12 F        |
|                                                                                     | 0092100-014       | MICRO PLACA EVO STR 14 F        |
|                                                                                     | 0092100-016       | MICRO PLACA EVO STR 16 F        |
|  | 0092100-104       | MICRO PLACA EVO STR 4 F MAX     |
|                                                                                     | 0092100-106       | MICRO PLACA EVO STR 6 F MAX     |
|                                                                                     | 0092100-108       | MICRO PLACA EVO STR 8 F MAX     |
|                                                                                     | 0092100-110       | MICRO PLACA EVO STR 10 F MAX    |
|                                                                                     | 0092100-112       | MICRO PLACA EVO STR 12 F MAX    |
|                                                                                     | 0092100-114       | MICRO PLACA EVO STR 14 F MAX    |

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                     | 0092100-116       | MICRO PLACA EVO STR 16 F MAX               |
|    | 0092102-208       | MICRO PLACA EVO STR DUPLA 2X8 F            |
|                                                                                     | 0092102-216       | MICRO PLACA EVO STR DUPLA 2X16 F           |
|    | 0092104-200       | MICRO PLACA EVO PONTE STR 2 F              |
|                                                                                     | 0092104-201       | MICRO PLACA EVO PONTE STR 2 F LONGA        |
|                                                                                     | 0092104-400       | MICRO PLACA EVO PONTE STR 4 F              |
|                                                                                     | 0092104-401       | MICRO PLACA EVO PONTE STR 4 F MÉDIA        |
|                                                                                     | 0092104-402       | MICRO PLACA EVO PONTE STR 4 F LONGA        |
|                                                                                     | 0092104-600       | MICRO PLACA EVO PONTE STR 6 F              |
|                                                                                     | 0092104-601       | MICRO PLACA EVO PONTE STR 6 F MÉDIA        |
|  | 0092104-602       | MICRO PLACA EVO PONTE STR 6 F LONGA        |
|                                                                                     | 0092104-410       | MICRO PLACA EVO PONTE STR 4 F MAX          |
|                                                                                     | 0092104-610       | MICRO PLACA EVO PONTE STR 6 F MAX          |
|  | 0092105-007       | MICRO PLACA EVO H 7 F                      |
|                                                                                     | 0092105-011       | MICRO PLACA EVO H 11 F                     |
|  | 0092106-220       | MICRO PLACA EVO L DIREITA 2X2 F            |
|                                                                                     | 0092106-222       | MICRO PLACA EVO L DIREITA MÉDIA 2X2 F      |
|                                                                                     | 0092106-224       | MICRO PLACA EVO L DIREITA LONGA 2X2 F      |
|  | 0092106-221       | MICRO PLACA EVO L ESQUERDA 2X2 F           |
|                                                                                     | 0092106-223       | MICRO PLACA EVO L ESQUERDA MÉDIA 2X2 F     |
|                                                                                     | 0092106-225       | MICRO PLACA EVO L ESQUERDA LONGA 2X2 F     |
|  | 0092107-220       | MICRO PLACA EVO L DIREITA 2X2 F MAX        |
|                                                                                     | 0092107-222       | MICRO PLACA EVO L DIREITA MÉDIA 2X2 F MAX  |
|                                                                                     | 0092107-224       | MICRO PLACA EVO L DIREITA LONGA 2X2 F MAX  |
|  | 0092107-221       | MICRO PLACA EVO L ESQUERDA 2X2 F MAX       |
|                                                                                     | 0092107-223       | MICRO PLACA EVO L ESQUERDA MÉDIA 2X2 F MAX |
|                                                                                     | 0092107-225       | MICRO PLACA EVO L ESQUERDA LONGA 2X2 F MAX |

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
|    | 0092108-220       | MICRO PLACA EVO L 100° DIREITA 2X2 F              |
|                                                                                     | 0092108-222       | MICRO PLACA EVO L 100° DIREITA MÉDIA 2X2 F        |
|                                                                                     | 0092108-224       | MICRO PLACA EVO L 100° DIREITA LONGA 2X2 F        |
|    | 0092108-221       | MICRO PLACA EVO L 100° ESQUERDA 2X2 F             |
|                                                                                     | 0092108-223       | MICRO PLACA EVO L 100° ESQUERDA MÉDIA 2X2 F       |
|                                                                                     | 0092108-225       | MICRO PLACA EVO L 100° ESQUERDA LONGA 2X2 F       |
|    | 0092110-230       | MICRO PLACA EVO L 100° DIREITA 2X3 F              |
|                                                                                     | 0092110-232       | MICRO PLACA EVO L 100° DIREITA MÉDIA 2X3 F        |
|                                                                                     | 0092110-234       | MICRO PLACA EVO L 100° DIREITA LONGA 2X3 F        |
|   | 0092110-231       | MICRO PLACA EVO L 100° ESQUERDA 2X3 F             |
|                                                                                     | 0092110-233       | MICRO PLACA EVO L 100° ESQUERDA MÉDIA 2X3 F       |
|                                                                                     | 0092110-235       | MICRO PLACA EVO L 100° ESQUERDA LONGA 2X3 F       |
|  | 0092111-230       | MICRO PLACA EVO L 100° DIREITA 2X3 F MAX          |
|                                                                                     | 0092111-232       | MICRO PLACA EVO L 100° DIREITA MÉDIA 2X3 F MAX    |
|                                                                                     | 0092111-234       | MICRO PLACA EVO L 100° DIREITA LONGA 2X3 F MAX    |
|  | 0092111-231       | MICRO PLACA EVO L 100° ESQUERDA 2X3 F MAX         |
|                                                                                     | 0092111-233       | MICRO PLACA EVO L 100° ESQUERDA MÉDIA 2X3 F MAX   |
|                                                                                     | 0092111-235       | MICRO PLACA EVO L 100° ESQUERDA LONGA 2X3 F MAX   |
|  | 0092112-330       | MICRO PLACA EVO L 100° DIREITA 3X3 F              |
|                                                                                     | 0092112-332       | MICRO PLACA EVO L 100° DIREITA MÉDIA 3X3 F        |
|                                                                                     | 0092112-334       | MICRO PLACA EVO L 100° DIREITA LONGA 3X3 F        |
|                                                                                     | 0092112-336       | MICRO PLACA EVO L 100° DIREITA EXTRA LONGA 3X3 F  |
|  | 0092112-331       | MICRO PLACA EVO L 100° ESQUERDA 3X3 F             |
|                                                                                     | 0092112-333       | MICRO PLACA EVO L 100° ESQUERDA MÉDIA 3X3 F       |
|                                                                                     | 0092112-335       | MICRO PLACA EVO L 100° ESQUERDA LONGA 3X3 F       |
|                                                                                     | 0092112-337       | MICRO PLACA EVO L 100° ESQUERDA EXTRA LONGA 3X3 F |
|                                                                                     | 0092113-330       | MICRO PLACA EVO L 100° DIREITA 3X3 F MAX          |
|                                                                                     | 0092113-332       | MICRO PLACA EVO L 100° DIREITA MÉDIA 3X3 F MAX    |

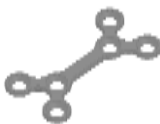
|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
|    | 0092113-334       | MICRO PLACA EVO L 100° DIREITA LONGA 3X3 F MAX    |
|                                                                                     | 0092113-331       | MICRO PLACA EVO L 100° ESQUERDA 3X3 F MAX         |
|                                                                                     | 0092113-333       | MICRO PLACA EVO L 100° ESQUERDA MÉDIA 3X3 F MAX   |
|    | 0092113-335       | MICRO PLACA EVO L 100° ESQUERDA LONGA 3X3 F MAX   |
|                                                                                     | 0092114-340       | MICRO PLACA EVO L 100° DIREITA 3X4 F              |
|                                                                                     | 0092114-342       | MICRO PLACA EVO L 100° DIREITA MÉDIA 3X4 F        |
|    | 0092114-344       | MICRO PLACA EVO L 100° DIREITA LONGA 3X4 F        |
|                                                                                     | 0092114-346       | MICRO PLACA EVO L 100° DIREITA EXTRA LONGA 3X4 F  |
|                                                                                     | 0092114-341       | MICRO PLACA EVO L 100° ESQUERDA 3X4 F             |
|   | 0092114-343       | MICRO PLACA EVO L 100° ESQUERDA MÉDIA 3X4 F       |
|                                                                                     | 0092114-345       | MICRO PLACA EVO L 100° ESQUERDA LONGA 3X4 F       |
|                                                                                     | 0092114-347       | MICRO PLACA EVO L 100° ESQUERDA EXTRA LONGA 3X4 F |
|  | 0092115-340       | MICRO PLACA EVO L 100° DIREITA 3X4 F MAX          |
|                                                                                     | 0092115-342       | MICRO PLACA EVO L 100° DIREITA MÉDIA 3X4 F MAX    |
|                                                                                     | 0092115-344       | MICRO PLACA EVO L 100° DIREITA LONGA 3X4 F MAX    |
|  | 0092115-341       | MICRO PLACA EVO L 100° ESQUERDA 3X4 F MAX         |
|                                                                                     | 0092115-343       | MICRO PLACA EVO L 100° ESQUERDA MÉDIA 3X4 F MAX   |
|                                                                                     | 0092115-345       | MICRO PLACA EVO L 100° ESQUERDA LONGA 3X4 F MAX   |
|  | 0092116-320       | MICRO PLACA EVO T 3X2 F                           |
|                                                                                     | 0092116-330       | MICRO PLACA EVO T 3X3 F                           |
|                                                                                     | 0092118-340       | MICRO PLACA EVO T 3X4 F                           |
|  | 0092116-321       | MICRO PLACA EVO T 3X2 F MAX                       |
|                                                                                     | 0092116-337       | MICRO PLACA EVO T 3X3 F MAX                       |
|                                                                                     | 0092118-347       | MICRO PLACA EVO T 3X4 F MAX                       |
|  | 0092116-331       | MICRO PLACA EVO PONTE T PEQUENA 3X3 F             |
|                                                                                     | 0092116-332       | MICRO PLACA EVO PONTE T MÉDIA 3X3 F               |
|                                                                                     | 0092116-333       | MICRO PLACA EVO PONTE T LONGA 3X3 F               |

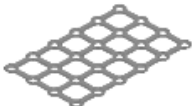
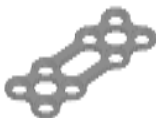
|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
|    | 0092116-334       | MICRO PLACA EVO PONTE T PEQUENA 3X3 F MAX           |
|                                                                                     | 0092116-335       | MICRO PLACA EVO PONTE T MÉDIA 3X3 F MAX             |
|                                                                                     | 0092116-336       | MICRO PLACA EVO PONTE T LONGA 3X3 F MAX             |
|    | 0092118-341       | MICRO PLACA EVO PONTE T PEQUENA 3X4 F               |
|                                                                                     | 0092118-342       | MICRO PLACA EVO PONTE T MÉDIA 3X4 F                 |
|                                                                                     | 0092118-343       | MICRO PLACA EVO PONTE T LONGA 3X4 F                 |
|    | 0092118-344       | MICRO PLACA EVO PONTE T PEQUENA 3X4 F MAX           |
|                                                                                     | 0092118-345       | MICRO PLACA EVO PONTE T MÉDIA 3X4 F MAX             |
|                                                                                     | 0092118-346       | MICRO PLACA EVO PONTE T LONGA 3X4 F MAX             |
|   | 0092120-770       | MICRO PLACA EVO T 7X7 F                             |
|                                                                                     | 0092120-771       | MICRO PLACA EVO T MÉDIA 7X7 F                       |
|  | 0092122-330       | MICRO PLACA EVO T OBLÍQUA 100° DIREITA 3X3 F        |
|                                                                                     | 0092122-332       | MICRO PLACA EVO T OBLÍQUA 100° DIREITA MÉDIA 3X3 F  |
|                                                                                     | 0092122-334       | MICRO PLACA EVO T OBLÍQUA 100° DIREITA LONGA 3X3 F  |
|  | 0092122-331       | MICRO PLACA EVO T OBLÍQUA 100° ESQUERDA 3X3 F       |
|                                                                                     | 0092122-333       | MICRO PLACA EVO T OBLÍQUA 100° ESQUERDA MÉDIA 3X3 F |
|                                                                                     | 0092122-335       | MICRO PLACA EVO T OBLÍQUA 100° ESQUERDA LONGA 3X3 F |
|  | 0092123-320       | MICRO PLACA EVO Y 3X2 F MAX                         |
|  | 0092124-230       | MICRO PLACA EVO Y 2X3 F                             |
|                                                                                     | 0092124-231       | MICRO PLACA EVO Y 2X3 F MÉDIA                       |
|                                                                                     | 0092124-232       | MICRO PLACA EVO Y 2X3 F LONGA                       |
|                                                                                     | 0092124-233       | MICRO PLACA EVO Y 2X3 F EXTRA LONGA                 |
|  | 0092125-231       | MICRO PLACA EVO Y 2X3 F MÉDIA MAX                   |
|                                                                                     | 0092125-232       | MICRO PLACA EVO Y 2X3 F LONGA MAX                   |
|  | 0092126-330       | MICRO PLACA EVO Y 3X3 F                             |
|                                                                                     | 0092126-331       | MICRO PLACA EVO Y 3X3 F MÉDIA                       |
|                                                                                     | 0092126-332       | MICRO PLACA EVO Y 3X3 F LONGA                       |

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                                                                                     | 0092126-333       | MICRO PLACA EVO Y 3X3 F EXTRA LONGA   |
|    | 0092128-330       | MICRO PLACA EVO DUPLO Y               |
|                                                                                     | 0092128-331       | MICRO PLACA EVO DUPLO Y MÉDIA         |
|                                                                                     | 0092128-332       | MICRO PLACA EVO DUPLO Y LONGA         |
|    | 0092128-333       | MICRO PLACA EVO DUPLO Y MAX           |
|    | 0092130-000       | MICRO PLACA EVO X                     |
|                                                                                     | 0092130-001       | MICRO PLACA EVO X MÉDIA               |
|    | 0092130-002       | MICRO PLACA EVO X MAX                 |
|   | 0092132-220       | MICRO PLACA EVO I                     |
|                                                                                     | 0092132-221       | MICRO PLACA EVO I MÉDIA               |
|  | 0092134-000       | MICRO PLACA EVO TRIANGULAR            |
|  | 0092136-220       | MICRO PLACA EVO Z 100° DIREITA        |
|                                                                                     | 0092136-222       | MICRO PLACA EVO Z 100° DIREITA MÉDIA  |
|                                                                                     | 0092136-224       | MICRO PLACA EVO Z 100° DIREITA LONGA  |
|  | 0092136-221       | MICRO PLACA EVO Z 100° ESQUERDA       |
|                                                                                     | 0092136-223       | MICRO PLACA EVO Z 100° ESQUERDA MÉDIA |
|                                                                                     | 0092136-225       | MICRO PLACA EVO Z 100° ESQUERDA LONGA |
|  | 0092138-220       | MICRO PLACA EVO Z 110° DIREITA        |
|                                                                                     | 0092138-222       | MICRO PLACA EVO Z 110° DIREITA MÉDIA  |
|                                                                                     | 0092138-224       | MICRO PLACA EVO Z 110° DIREITA LONGA  |
|  | 0092138-221       | MICRO PLACA EVO Z 110° ESQUERDA       |
|                                                                                     | 0092138-223       | MICRO PLACA EVO Z 110° ESQUERDA MÉDIA |
|                                                                                     | 0092138-225       | MICRO PLACA EVO Z 110° ESQUERDA LONGA |
|  | 0092140-220       | MICRO PLACA EVO QUADRADA 2X2 F        |
|                                                                                     | 0092140-230       | MICRO PLACA EVO QUADRADA 2X3 F        |
|                                                                                     | 0092140-240       | MICRO PLACA EVO QUADRADA 2X4 F        |

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
|    | 0092140-460       | MICRO PLACA EVO QUADRADA 4X6 F         |
|    | 0092142-220       | MICRO PLACA EVO RETANGULAR 2X2 F       |
|                                                                                     | 0092142-230       | MICRO PLACA EVO RETANGULAR 2X3 F       |
|                                                                                     | 0092142-240       | MICRO PLACA EVO RETANGULAR 2X4 F       |
|                                                                                     | 0092142-242       | MICRO PLACA EVO RETANGULAR 2X4 F LARGA |
|    | 0092142-440       | MICRO PLACA EVO RETANGULAR 4X4 F       |
|                                                                                     | 0092142-460       | MICRO PLACA EVO RETANGULAR 4X6 F       |
|   | 0092144-004       | MICRO PLACA EVO ORBITAL 4 F            |
|                                                                                     | 0092144-006       | MICRO PLACA EVO ORBITAL 6 F            |
|                                                                                     | 0092144-008       | MICRO PLACA EVO ORBITAL 8 F            |
|                                                                                     | 0092144-010       | MICRO PLACA EVO ORBITAL 10 F           |
|  | 0092144-104       | MICRO PLACA EVO ORBITAL 4 F MAX        |
|                                                                                     | 0092144-106       | MICRO PLACA EVO ORBITAL 6 F MAX        |
|                                                                                     | 0092144-108       | MICRO PLACA EVO ORBITAL 8 F MAX        |
|                                                                                     | 0092144-110       | MICRO PLACA EVO ORBITAL 10 F MAX       |
|  | 0092146-000       | MICRO PLACA EVO NASAL H                |
|  | 0092146-002       | MICRO PLACA EVO NASAL H ASSIMÉTRICA    |
|  | 0092146-004       | MICRO PLACA EVO NASAL T                |
|  | 0092146-006       | MICRO PLACA EVO NASAL Y                |
|                                                                                     | 0092146-011       | MICRO PLACA EVO NASAL 11 F             |

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
|    | 0092146-012       | MICRO PLACA EVO NASAL 12 F                              |
|    | 0092150-000       | MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA COM OBLONGO SEM AVANÇO  |
|   | 0092150-002       | MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANÇO 2MM  |
|                                                                                     | 0092150-003       | MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANÇO 3MM  |
|                                                                                     | 0092150-004       | MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANÇO 4MM  |
|                                                                                     | 0092150-005       | MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANÇO 5MM  |
|                                                                                     | 0092150-006       | MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANÇO 6MM  |
|                                                                                     | 0092150-007       | MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANÇO 7MM  |
|                                                                                     | 0092150-009       | MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANÇO 9MM  |
|                                                                                     | 0092150-011       | MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANÇO 11MM |
|  | 0092150-100       | MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA COM OBLONGO SEM AVANÇO |
|  | 0092150-102       | MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA COM OBLONGO AVANÇO 2MM |
|                                                                                     | 0092150-103       | MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA COM OBLONGO AVANÇO 3MM |
|                                                                                     | 0092150-104       | MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA COM OBLONGO AVANÇO 4MM |
|                                                                                     | 0092150-105       | MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA COM OBLONGO AVANÇO 5MM |

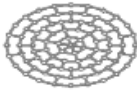
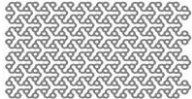
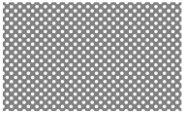
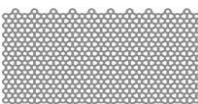
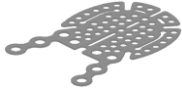
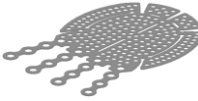
| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                     | 0092150-106       | MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA COM OBLONGO AVANÇO 6MM  |
|                                                                                     | 0092150-107       | MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA COM OBLONGO AVANÇO 7MM  |
|                                                                                     | 0092150-109       | MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA COM OBLONGO AVANÇO 9MM  |
|                                                                                     | 0092150-111       | MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA COM OBLONGO AVANÇO 11MM |
|    | 0092152-000       | MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA SEM AVANÇO               |
|  | 0092152-002       | MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA AVANÇO 2MM               |
|                                                                                     | 0092152-003       | MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA AVANÇO 3MM               |
|                                                                                     | 0092152-004       | MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA AVANÇO 4MM               |
|                                                                                     | 0092152-005       | MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA AVANÇO 5MM               |
|                                                                                     | 0092152-006       | MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA AVANÇO 6MM               |
|                                                                                     | 0092152-007       | MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA AVANÇO 7MM               |
|                                                                                     | 0092152-009       | MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA AVANÇO 9MM               |
|                                                                                     | 0092152-011       | MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA AVANÇO 11MM              |
|  | 0092152-200       | MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA SEM AVANÇO MAX           |
|  | 0092152-202       | MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA AVANÇO 2MM MAX           |
|                                                                                     | 0092152-203       | MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA AVANÇO 3MM MAX           |
|                                                                                     | 0092152-204       | MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA AVANÇO 4MM MAX           |
|                                                                                     | 0092152-205       | MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA AVANÇO 5MM MAX           |
|                                                                                     | 0092152-206       | MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA AVANÇO 6MM MAX           |
|                                                                                     | 0092152-207       | MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA AVANÇO 7MM MAX           |
|                                                                                     | 0092152-209       | MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA AVANÇO 9MM MAX           |
|                                                                                     | 0092152-211       | MICRO PLACA EVO LE FORT DIREITA AVANÇO 11MM MAX          |

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

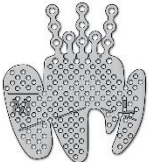
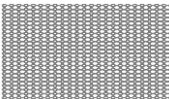
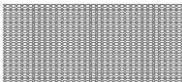
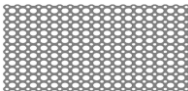
| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
|    | 0092152-100       | MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA SEM AVANÇO      |
|                                                                                     | 0092152-102       | MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA AVANÇO 2MM      |
|                                                                                     | 0092152-103       | MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA AVANÇO 3MM      |
|                                                                                     | 0092152-104       | MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA AVANÇO 4MM      |
|                                                                                     | 0092152-105       | MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA AVANÇO 5MM      |
|                                                                                     | 0092152-106       | MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA AVANÇO 6MM      |
|                                                                                     | 0092152-107       | MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA AVANÇO 7MM      |
|                                                                                     | 0092152-109       | MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA AVANÇO 9MM      |
|  | 0092152-111       | MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA AVANÇO 11MM     |
|                                                                                     | 0092152-300       | MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA SEM AVANÇO MAX  |
|                                                                                     | 0092152-302       | MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA AVANÇO 2MM MAX  |
|                                                                                     | 0092152-303       | MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA AVANÇO 3MM MAX  |
|                                                                                     | 0092152-304       | MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA AVANÇO 4MM MAX  |
|                                                                                     | 0092152-305       | MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA AVANÇO 5MM MAX  |
|                                                                                     | 0092152-306       | MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA AVANÇO 6MM MAX  |
|                                                                                     | 0092152-307       | MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA AVANÇO 7MM MAX  |
|  | 0092152-309       | MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA AVANÇO 9MM MAX  |
|                                                                                     | 0092152-311       | MICRO PLACA EVO LE FORT ESQUERDA AVANÇO 11MM MAX |
|                                                                                     | 0092154-000       | MICRO PLACA EVO LF 110° DIREITA SEM AVANÇO       |
|                                                                                     | 0092154-002       | MICRO PLACA EVO LF 110° DIREITA AVANÇO 2MM       |
|  | 0092154-003       | MICRO PLACA EVO LF 110° DIREITA AVANÇO 3MM       |
|                                                                                     | 0092154-004       | MICRO PLACA EVO LF 110° DIREITA AVANÇO 4MM       |
|                                                                                     | 0092154-005       | MICRO PLACA EVO LF 110° DIREITA AVANÇO 5MM       |

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                     | 0092154-006       | MICRO PLACA EVO LF 110° DIREITA AVANÇO 6MM   |
|                                                                                     | 0092154-007       | MICRO PLACA EVO LF 110° DIREITA AVANÇO 7MM   |
|                                                                                     | 0092154-009       | MICRO PLACA EVO LF 110° DIREITA AVANÇO 9MM   |
|                                                                                     | 0092154-011       | MICRO PLACA EVO LF 110° DIREITA AVANÇO 11MM  |
|    | 0092154-100       | MICRO PLACA EVO LF 110° ESQUERDA SEM AVANÇO  |
|   | 0092154-102       | MICRO PLACA EVO LF 110° ESQUERDA AVANÇO 2MM  |
|                                                                                     | 0092154-103       | MICRO PLACA EVO LF 110° ESQUERDA AVANÇO 3MM  |
|                                                                                     | 0092154-104       | MICRO PLACA EVO LF 110° ESQUERDA AVANÇO 4MM  |
|                                                                                     | 0092154-105       | MICRO PLACA EVO LF 110° ESQUERDA AVANÇO 5MM  |
|                                                                                     | 0092154-106       | MICRO PLACA EVO LF 110° ESQUERDA AVANÇO 6MM  |
|                                                                                     | 0092154-107       | MICRO PLACA EVO LF 110° ESQUERDA AVANÇO 7MM  |
|                                                                                     | 0092154-109       | MICRO PLACA EVO LF 110° ESQUERDA AVANÇO 9MM  |
|                                                                                     | 0092154-111       | MICRO PLACA EVO LF 110° ESQUERDA AVANÇO 11MM |
|  | 0092156-001       | MICRO PLACA EVO PARA MENTO AVANÇO 1MM        |
|                                                                                     | 0092156-002       | MICRO PLACA EVO PARA MENTO AVANÇO 2MM        |
|                                                                                     | 0092156-003       | MICRO PLACA EVO PARA MENTO AVANÇO 3MM        |
|                                                                                     | 0092156-004       | MICRO PLACA EVO PARA MENTO AVANÇO 4MM        |
|                                                                                     | 0092156-005       | MICRO PLACA EVO PARA MENTO AVANÇO 5MM        |
|                                                                                     | 0092156-006       | MICRO PLACA EVO PARA MENTO AVANÇO 6MM        |
|                                                                                     | 0092156-007       | MICRO PLACA EVO PARA MENTO AVANÇO 7MM        |
|                                                                                     | 0092156-009       | MICRO PLACA EVO PARA MENTO AVANÇO 9MM        |
|                                                                                     | 0092156-011       | MICRO PLACA EVO PARA MENTO AVANÇO 11MM       |
|  | 0092158-013       | MICRO PLACA EVO CRANIOTOMIA 13MM             |
|                                                                                     | 0092158-018       | MICRO PLACA EVO CRANIOTOMIA 18MM             |
|                                                                                     | 0092158-022       | MICRO PLACA EVO CRANIOTOMIA 22MM             |
|                                                                                     | 0092158-025       | MICRO PLACA EVO CRANIOTOMIA 25MM             |
|                                                                                     | 0092160-045       | MICRO MALHA EVO CIRCULAR DIAM.45MM           |

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
|    | 0092160-073       | MICRO MALHA EVO CIRCULAR DIAM.73MM          |
|                                                                                     | 0092160-100       | MICRO MALHA EVO CIRCULAR DIAM.100MM         |
|    | 0092162-582       | MICRO MALHA EVO DY 53X82MM                  |
|    | 0092162-584       | MICRO MALHA EVO DS 52X84MM                  |
|    | 0092162-588       | MICRO MALHA EVO DYF 55X88MM                 |
|   | 0092162-590       | MICRO MALHA EVO 53X90MM                     |
|  | 0092163-000       | MICRO MALHA EVO P/ ASSOALHO ORBITAL PEQUENA |
|  | 0092163-005       | MICRO MALHA EVO P/ ASSOALHO ORBITAL MÉDIA   |
|  | 0092163-010       | MICRO MALHA EVO P/ ASSOALHO ORBITAL GRANDE  |
|  | 0092163-015       | MICRO MALHA EVO P/ ASSOALHO ORBITAL PARCIAL |
|  | 0092163-018       | MICRO MALHA EVO P/ ASSOALHO ORBITAL 18MM    |
|  | 0092163-030       | MICRO MALHA EVO P/ ASSOALHO ORBITAL 30MM    |

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
|    | 0092163-040       | MICRO MALHA EVO P/ ASSOALHO ORBITAL 40MM              |
|    | 0092163-046       | MICRO MALHA EVO P/ ASSOALHO ORBITAL MAX               |
|    | 0092164-118       | MICRO TELA EVO 118X118MM                              |
|    | 0092164-158       | MICRO TELA EVO 158X158MM                              |
|  | 0092164-588       | MICRO TELA EVO 58X88MM                                |
|  | 0092151-000       | MICRO PLACA EVO LE FORT PB DIR. C/ OBLONGO SEM AVANÇO |
|  | 0092151-002       | MICRO PLACA EVO LE FORT PB DIR. C/ OBLONGO AVANÇO 2MM |
|                                                                                     | 0092151-003       | MICRO PLACA EVO LE FORT PB DIR. C/ OBLONGO AVANÇO 3MM |
|                                                                                     | 0092151-004       | MICRO PLACA EVO LE FORT PB DIR. C/ OBLONGO AVANÇO 4MM |
|                                                                                     | 0092151-005       | MICRO PLACA EVO LE FORT PB DIR. C/ OBLONGO AVANÇO 5MM |
|                                                                                     | 0092151-006       | MICRO PLACA EVO LE FORT PB DIR. C/ OBLONGO AVANÇO 6MM |
|                                                                                     | 0092151-007       | MICRO PLACA EVO LE FORT PB DIR. C/ OBLONGO AVANÇO 7MM |
|                                                                                     | 0092151-009       | MICRO PLACA EVO LE FORT PB DIR. C/ OBLONGO AVANÇO 9MM |

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                     | 0092151-011       | MICRO PLACA EVO LE FORT PB DIR. C/ OBLONGO AVANÇO 11MM |
|    | 0092151-100       | MICRO PLACA EVO LE FORT PB ESQ. C/ OBLONGO SEM AVANÇO  |
|   | 0092151-102       | MICRO PLACA EVO LE FORT PB ESQ. C/ OBLONGO AVANÇO 2MM  |
|                                                                                     | 0092151-103       | MICRO PLACA EVO LE FORT PB ESQ. C/ OBLONGO AVANÇO 3MM  |
|                                                                                     | 0092151-104       | MICRO PLACA EVO LE FORT PB ESQ. C/ OBLONGO AVANÇO 4MM  |
|                                                                                     | 0092151-105       | MICRO PLACA EVO LE FORT PB ESQ. C/ OBLONGO AVANÇO 5MM  |
|                                                                                     | 0092151-106       | MICRO PLACA EVO LE FORT PB ESQ. C/ OBLONGO AVANÇO 6MM  |
|                                                                                     | 0092151-107       | MICRO PLACA EVO LE FORT PB ESQ. C/ OBLONGO AVANÇO 7MM  |
|                                                                                     | 0092151-109       | MICRO PLACA EVO LE FORT PB ESQ. C/ OBLONGO AVANÇO 9MM  |
|                                                                                     | 0092151-111       | MICRO PLACA EVO LE FORT PB ESQ. C/ OBLONGO AVANÇO 11MM |
|  | 0092153-000       | MICRO PLACA EVO LE FORT PB DIREITA SEM AVANÇO          |
|  | 0092153-002       | MICRO PLACA EVO LE FORT PB DIREITA AVANÇO 2MM          |
|                                                                                     | 0092153-003       | MICRO PLACA EVO LE FORT PB DIREITA AVANÇO 3MM          |
|                                                                                     | 0092153-004       | MICRO PLACA EVO LE FORT PB DIREITA AVANÇO 4MM          |
|                                                                                     | 0092153-005       | MICRO PLACA EVO LE FORT PB DIREITA AVANÇO 5MM          |
|                                                                                     | 0092153-006       | MICRO PLACA EVO LE FORT PB DIREITA AVANÇO 6MM          |
|                                                                                     | 0092153-007       | MICRO PLACA EVO LE FORT PB DIREITA AVANÇO 7MM          |
|                                                                                     | 0092153-009       | MICRO PLACA EVO LE FORT PB DIREITA AVANÇO 9MM          |

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                     | 0092153-011       | MICRO PLACA EVO LE FORT PB DIREITA AVANÇO 11MM  |
|    | 0092153-100       | MICRO PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA SEM AVANÇO  |
|    | 0092153-102       | MICRO PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA AVANÇO 2MM  |
|                                                                                     | 0092153-103       | MICRO PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA AVANÇO 3MM  |
|                                                                                     | 0092153-104       | MICRO PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA AVANÇO 4MM  |
|                                                                                     | 0092153-105       | MICRO PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA AVANÇO 5MM  |
|                                                                                     | 0092153-106       | MICRO PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA AVANÇO 6MM  |
|                                                                                     | 0092153-107       | MICRO PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA AVANÇO 7MM  |
|                                                                                     | 0092153-109       | MICRO PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA AVANÇO 9MM  |
|                                                                                     | 0092153-111       | MICRO PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA AVANÇO 11MM |
|  | 0092155-000       | MICRO PLACA EVO LF-PB 110° DIREITA SEM AVANÇO   |
|  | 0092155-002       | MICRO PLACA EVO LF-PB 110° DIREITA AVANÇO 2MM   |
|                                                                                     | 0092155-003       | MICRO PLACA EVO LF-PB 110° DIREITA AVANÇO 3MM   |
|                                                                                     | 0092155-004       | MICRO PLACA EVO LF-PB 110° DIREITA AVANÇO 4MM   |
|                                                                                     | 0092155-005       | MICRO PLACA EVO LF-PB 110° DIREITA AVANÇO 5MM   |
|                                                                                     | 0092155-006       | MICRO PLACA EVO LF-PB 110° DIREITA AVANÇO 6MM   |
|                                                                                     | 0092155-007       | MICRO PLACA EVO LF-PB 110° DIREITA AVANÇO 7MM   |
|                                                                                     | 0092155-009       | MICRO PLACA EVO LF-PB 110° DIREITA AVANÇO 9MM   |
|                                                                                     | 0092155-011       | MICRO PLACA EVO LF-PB 110° DIREITA AVANÇO 11MM  |
|  | 0092155-100       | MICRO PLACA EVO LF-PB 110° ESQUERDA SEM AVANÇO  |
|  | 0092155-102       | MICRO PLACA EVO LF-PB 110° ESQUERDA AVANÇO 2MM  |
|                                                                                     | 0092155-103       | MICRO PLACA EVO LF-PB 110° ESQUERDA AVANÇO 3MM  |
|                                                                                     | 0092155-104       | MICRO PLACA EVO LF-PB 110° ESQUERDA AVANÇO 4MM  |

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                     | 0092155-105       | MICRO PLACA EVO LF-PB 110° ESQUERDA AVANÇO 5MM  |
|                                                                                     | 0092155-106       | MICRO PLACA EVO LF-PB 110° ESQUERDA AVANÇO 6MM  |
|                                                                                     | 0092155-107       | MICRO PLACA EVO LF-PB 110° ESQUERDA AVANÇO 7MM  |
|                                                                                     | 0092155-109       | MICRO PLACA EVO LF-PB 110° ESQUERDA AVANÇO 9MM  |
|                                                                                     | 0092155-111       | MICRO PLACA EVO LF-PB 110° ESQUERDA AVANÇO 11MM |
|    | 0092156-101       | MICRO PLACA EVO PARA MENTO PB AVANÇO 1MM        |
|                                                                                     | 0092156-102       | MICRO PLACA EVO PARA MENTO PB AVANÇO 2MM        |
|                                                                                     | 0092156-103       | MICRO PLACA EVO PARA MENTO PB AVANÇO 3MM        |
|                                                                                     | 0092156-104       | MICRO PLACA EVO PARA MENTO PB AVANÇO 4MM        |
|                                                                                     | 0092156-105       | MICRO PLACA EVO PARA MENTO PB AVANÇO 5MM        |
|                                                                                     | 0092156-106       | MICRO PLACA EVO PARA MENTO PB AVANÇO 6MM        |
|                                                                                     | 0092156-107       | MICRO PLACA EVO PARA MENTO PB AVANÇO 7MM        |
|                                                                                     | 0092156-109       | MICRO PLACA EVO PARA MENTO PB AVANÇO 9MM        |
|                                                                                     | 0092156-111       | MICRO PLACA EVO PARA MENTO PB AVANÇO 11MM       |
|  | 0092156-201       | MICRO PLACA EVO PARA MENTO PB AVANÇO 1MM MAX    |
|                                                                                     | 0092156-202       | MICRO PLACA EVO PARA MENTO PB AVANÇO 2MM MAX    |
|                                                                                     | 0092156-203       | MICRO PLACA EVO PARA MENTO PB AVANÇO 3MM MAX    |
|                                                                                     | 0092156-204       | MICRO PLACA EVO PARA MENTO PB AVANÇO 4MM MAX    |
|                                                                                     | 0092156-205       | MICRO PLACA EVO PARA MENTO PB AVANÇO 5MM MAX    |
|                                                                                     | 0092156-206       | MICRO PLACA EVO PARA MENTO PB AVANÇO 6MM MAX    |
|                                                                                     | 0092156-207       | MICRO PLACA EVO PARA MENTO PB AVANÇO 7MM MAX    |
|                                                                                     | 0092156-209       | MICRO PLACA EVO PARA MENTO PB AVANÇO 9MM MAX    |
|                                                                                     | 0092156-211       | MICRO PLACA EVO PARA MENTO PB AVANÇO 11MM MAX   |
|  | 0092800-004       | MINI PLACA EVO STR 4 F                          |
|                                                                                     | 0092800-006       | MINI PLACA EVO STR 6 F                          |
|                                                                                     | 0092800-008       | MINI PLACA EVO STR 8 F                          |
|                                                                                     | 0092800-010       | MINI PLACA EVO STR 10 F                         |
|                                                                                     | 0092800-012       | MINI PLACA EVO STR 12 F                         |

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                     | 0092800-014       | MINI PLACA EVO STR 14 F                          |
|                                                                                     | 0092800-016       | MINI PLACA EVO STR 16 F                          |
|    | 0092801-002       | MINI PLACA EVO PONTE STR 2 F                     |
|                                                                                     | 0092802-040       | MINI PLACA EVO PONTE STR 4 F STANDARD            |
|                                                                                     | 0092802-042       | MINI PLACA EVO PONTE STR 4 F PEQUENA             |
|                                                                                     | 0092802-044       | MINI PLACA EVO PONTE STR 4 F MÉDIA               |
|    | 0092802-046       | MINI PLACA EVO PONTE STR 4 F LONGA               |
|                                                                                     | 0092802-048       | MINI PLACA EVO PONTE STR 4 F EXTRA LONGA         |
|                                                                                     | 0092802-064       | MINI PLACA EVO PONTE STR 6 F MÉDIA               |
|                                                                                     | 0092802-066       | MINI PLACA EVO PONTE STR 6 F LONGA               |
|                                                                                     | 0092802-084       | MINI PLACA EVO PONTE STR 8 F MÉDIA               |
|                                                                                     | 0092802-086       | MINI PLACA EVO PONTE STR 8 F LONGA               |
|  | 0092802-140       | MINI PLACA EVO PONTE STR 4 F ESPECIAL            |
|                                                                                     | 0092804-240       | MINI PLACA EVO STR DUPLA PONTE 2X4 F             |
|                                                                                     | 0092804-242       | MINI PLACA EVO STR DUPLA PONTE PEQUENA 2X4 F     |
|                                                                                     | 0092804-244       | MINI PLACA EVO STR DUPLA PONTE MÉDIA 2X4 F       |
|                                                                                     | 0092804-246       | MINI PLACA EVO STR DUPLA PONTE LONGA 2X4 F       |
|                                                                                     | 0092804-248       | MINI PLACA EVO STR DUPLA PONTE EXTRA LONGA 2X4 F |
|  | 0092804-249       | MINI PLACA EVO STR DUPLA PONTE ESPECIAL 2X4 F    |
|                                                                                     | 0092803-220       | MINI PLACA EVO L PB DIR 2X2 F MAX                |
|                                                                                     | 0092803-222       | MINI PLACA EVO L PB DIR PEQUENA 2X2 F MAX        |
|                                                                                     | 0092803-224       | MINI PLACA EVO L PB DIR MÉDIA 2X2 F MAX          |
|                                                                                     | 0092803-226       | MINI PLACA EVO L PB DIR LONGA 2X2 F MAX          |
|  | 0092803-228       | MINI PLACA EVO L PB DIR EXTRA LONGA 2X2 F MAX    |
|                                                                                     | 0092803-221       | MINI PLACA EVO L PB ESQ 2X2 F MAX                |
|                                                                                     | 0092803-223       | MINI PLACA EVO L PB ESQ PEQUENA 2X2 F MAX        |
|                                                                                     | 0092803-225       | MINI PLACA EVO L PB ESQ MÉDIA 2X2 F MAX          |
|                                                                                     | 0092803-227       | MINI PLACA EVO L PB ESQ LONGA 2X2 F MAX          |
|  | 0092803-229       | MINI PLACA EVO L PB ESQ EXTRA LONGA 2X2 F MAX    |
|                                                                                     | 0092806-220       | MINI PLACA EVO L DIR 2X2 F                       |
|                                                                                     | 0092806-222       | MINI PLACA EVO L DIR PEQUENA 2X2 F               |
|                                                                                     | 0092806-224       | MINI PLACA EVO L DIR MÉDIA 2X2 F                 |

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                     | 0092806-226       | MINI PLACA EVO L DIR LONGA 2X2 F                       |
|                                                                                     | 0092806-228       | MINI PLACA EVO L DIR EXTRA LONGA 2X2 F                 |
|    | 0092806-221       | MINI PLACA EVO L ESQ 2X2 F                             |
|                                                                                     | 0092806-223       | MINI PLACA EVO L ESQ PEQUENA 2X2 F                     |
|                                                                                     | 0092806-225       | MINI PLACA EVO L ESQ MÉDIA 2X2 F                       |
|                                                                                     | 0092806-227       | MINI PLACA EVO L ESQ LONGA 2X2 F                       |
|                                                                                     | 0092806-229       | MINI PLACA EVO L ESQ EXTRA LONGA 2X2 F                 |
|   | 0092805-220       | MINI PLACA EVO REFORÇADA L DIR 2X2 F MAX               |
|                                                                                     | 0092805-222       | MINI PLACA EVO REFORÇADA L DIR PEQUENA 2X2 F MAX       |
|                                                                                     | 0092805-224       | MINI PLACA EVO REFORÇADA L DIR MÉDIA 2X2 F MAX         |
|                                                                                     | 0092805-226       | MINI PLACA EVO REFORÇADA L DIR LONGA 2X2 F MAX         |
|                                                                                     | 0092805-228       | MINI PLACA EVO REFORÇADA L DIR EXTRA LONGA 2X2 F MAX   |
|  | 0092805-221       | MINI PLACA EVO REFORÇADA L ESQ 2X2 F MAX               |
|                                                                                     | 0092805-223       | MINI PLACA EVO REFORÇADA L ESQ PEQUENA 2X2 F MAX       |
|                                                                                     | 0092805-225       | MINI PLACA EVO REFORÇADA L ESQ MÉDIA 2X2 F MAX         |
|                                                                                     | 0092805-227       | MINI PLACA EVO REFORÇADA L ESQ LONGA 2X2 F MAX         |
|                                                                                     | 0092805-229       | MINI PLACA EVO REFORÇADA L ESQ EXTRA LONGA 2X2 F MAX   |
|  | 0092817-220       | MINI PLACA EVO REFORÇADA L DIR EXTRA PEQUENA 2X2 F MAX |
|  | 0092817-221       | MINI PLACA EVO REFORÇADA L ESQ EXTRA PEQUENA 2X2 F MAX |
|  | 0092806-330       | MINI PLACA EVO L DIR 3X3 F                             |
|                                                                                     | 0092806-332       | MINI PLACA EVO L DIR PEQUENA 3X3 F                     |
|                                                                                     | 0092806-334       | MINI PLACA EVO L DIR MÉDIA 3X3 F                       |
|                                                                                     | 0092806-336       | MINI PLACA EVO L DIR LONGA 3X3 F                       |
|                                                                                     | 0092806-338       | MINI PLACA EVO L DIR EXTRA LONGA 3X3 F                 |
|                                                                                     | 0092806-331       | MINI PLACA EVO L ESQ 3X3 F                             |
|                                                                                     | 0092806-333       | MINI PLACA EVO L ESQ PEQUENA 3X3 F                     |

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
|    | 0092806-335       | MINI PLACA EVO L ESQ MÉDIA 3X3 F        |
|                                                                                     | 0092806-337       | MINI PLACA EVO L ESQ LONGA 3X3 F        |
|                                                                                     | 0092806-339       | MINI PLACA EVO L ESQ EXTRA LONGA 3X3 F  |
|    | 0092808-230       | MINI PLACA EVO L 100° DIR 2X3 F         |
|                                                                                     | 0092808-232       | MINI PLACA EVO L 100° DIR PEQUENA 2X3 F |
|                                                                                     | 0092808-234       | MINI PLACA EVO L 100° DIR MÉDIA 2X3 F   |
|                                                                                     | 0092808-236       | MINI PLACA EVO L 100° DIR LONGA 2X3 F   |
|    | 0092808-231       | MINI PLACA EVO L 100° ESQ 2X3 F         |
|                                                                                     | 0092808-233       | MINI PLACA EVO L 100° ESQ PEQUENA 2X3 F |
|                                                                                     | 0092808-235       | MINI PLACA EVO L 100° ESQ MÉDIA 2X3 F   |
|                                                                                     | 0092808-237       | MINI PLACA EVO L 100° ESQ LONGA 2X3 F   |
|  | 0092808-340       | MINI PLACA EVO L 100° DIR 3X4 F         |
|  | 0092808-341       | MINI PLACA EVO L 100° ESQ 3X4 F         |
|  | 0092808-342       | MINI PLACA EVO L 100° DIR 3X4 F MAX     |
|  | 0092808-343       | MINI PLACA EVO L 100° ESQ 3X4 F MAX     |
|  | 0092808-450       | MINI PLACA EVO L 100° DIR 4X5 F         |
|  | 0092808-451       | MINI PLACA EVO L 100° ESQ 4X5 F         |
|  | 0092808-452       | MINI PLACA EVO L 100° DIR 4X5 F MAX     |

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
|    | 0092808-453       | MINI PLACA EVO L 100° ESQ 4X5 F MAX                          |
|    | 0092810-420       | MINI PLACA EVO L 100° DIR ESPECIAL 4X2 F                     |
|                                                                                     | 0092810-422       | MINI PLACA EVO L 100° DIR ESPECIAL PEQUENA 4X2 F             |
|                                                                                     | 0092810-424       | MINI PLACA EVO L 100° DIR ESPECIAL MÉDIA 4X2 F               |
|                                                                                     | 0092810-426       | MINI PLACA EVO L 100° DIR ESPECIAL LONGA 4X2 F               |
|                                                                                     | 0092810-428       | MINI PLACA EVO L 100° DIR ESPECIAL EXTRA LONGA 4X2 F         |
|    | 0092810-421       | MINI PLACA EVO L 100° ESQ ESPECIAL 4X2 F                     |
|                                                                                     | 0092810-423       | MINI PLACA EVO L 100° ESQ ESPECIAL PEQUENA 4X2 F             |
|                                                                                     | 0092810-425       | MINI PLACA EVO L 100° ESQ ESPECIAL MÉDIA 4X2 F               |
|                                                                                     | 0092810-427       | MINI PLACA EVO L 100° ESQ ESPECIAL LONGA 4X2 F               |
|                                                                                     | 0092810-429       | MINI PLACA EVO L 100° ESQ ESPECIAL EXTRA LONGA 4X2 F         |
|   | 0092810-430       | MINI PLACA EVO L 100° DIR ESPECIAL 4X3 F                     |
|                                                                                     | 0092810-432       | MINI PLACA EVO L 100° DIR ESPECIAL PEQUENA 4X3 F             |
|                                                                                     | 0092810-434       | MINI PLACA EVO L 100° DIR ESPECIAL MÉDIA 4X3 F               |
|                                                                                     | 0092810-436       | MINI PLACA EVO L 100° DIR ESPECIAL LONGA 4X3 F               |
|                                                                                     | 0092810-438       | MINI PLACA EVO L 100° DIR ESPECIAL EXTRA LONGA 4X3 F         |
|  | 0092810-431       | MINI PLACA EVO L 100° ESQ ESPECIAL 4X3 F                     |
|                                                                                     | 0092810-433       | MINI PLACA EVO L 100° ESQ ESPECIAL PEQUENA 4X3 F             |
|                                                                                     | 0092810-435       | MINI PLACA EVO L 100° ESQ ESPECIAL MÉDIA 4X3 F               |
|                                                                                     | 0092810-437       | MINI PLACA EVO L 100° ESQ ESPECIAL LONGA 4X3 F               |
|                                                                                     | 0092810-439       | MINI PLACA EVO L 100° ESQ ESPECIAL EXTRA LONGA 4X3 F         |
|  | 0092812-222       | MINI PLACA EVO L 110° DIR, OBLÍQUA ABERTA, 2X2 F PEQUENA     |
|                                                                                     | 0092812-224       | MINI PLACA EVO L 110° DIR, OBLÍQUA ABERTA, 2X2 F MÉDIA       |
|                                                                                     | 0092812-226       | MINI PLACA EVO L 110° DIR, OBLÍQUA ABERTA, 2X2 F LONGA       |
|                                                                                     | 0092812-228       | MINI PLACA EVO L 110° DIR, OBLÍQUA ABERTA, 2X2 F EXTRA LONGA |
|  | 0092812-223       | MINI PLACA EVO L 110° ESQ, OBLÍQUA ABERTA, 2X2 F PEQUENA     |
|                                                                                     | 0092812-225       | MINI PLACA EVO L 110° ESQ, OBLÍQUA ABERTA, 2X2 F MÉDIA       |
|                                                                                     | 0092812-227       | MINI PLACA EVO L 110° ESQ, OBLÍQUA ABERTA, 2X2 F LONGA       |
|                                                                                     | 0092812-229       | MINI PLACA EVO L 110° ESQ, OBLÍQUA ABERTA, 2X2 F EXTRA LONGA |
|                                                                                     | 0092812-232       | MINI PLACA EVO L 110° DIR, OBLÍQUA ABERTA, 2X3 F PEQUENA     |

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
|    | 0092812-234       | MINI PLACA EVO L 110° DIR, OBLÍQUA ABERTA, 2X3 F MÉDIA        |
|                                                                                     | 0092812-236       | MINI PLACA EVO L 110° DIR, OBLÍQUA ABERTA, 2X3 F LONGA        |
|                                                                                     | 0092812-238       | MINI PLACA EVO L 110° DIR, OBLÍQUA ABERTA, 2X3 F EXTRA LONGA  |
|    | 0092812-233       | MINI PLACA EVO L 110° ESQ, OBLÍQUA ABERTA, 2X3 F PEQUENA      |
|                                                                                     | 0092812-235       | MINI PLACA EVO L 110° ESQ, OBLÍQUA ABERTA, 2X3 F MÉDIA        |
|                                                                                     | 0092812-237       | MINI PLACA EVO L 110° ESQ, OBLÍQUA ABERTA, 2X3 F LONGA        |
|                                                                                     | 0092812-239       | MINI PLACA EVO L 110° ESQ, OBLÍQUA ABERTA, 2X3 F EXTRA LONGA  |
|  | 0092814-222       | MINI PLACA EVO L 110° DIR, OBLÍQUA FECHADA, 2X2 F PEQUENA     |
|                                                                                     | 0092814-224       | MINI PLACA EVO L 110° DIR, OBLÍQUA FECHADA, 2X2 F MÉDIA       |
|                                                                                     | 0092814-226       | MINI PLACA EVO L 110° DIR, OBLÍQUA FECHADA, 2X2 F LONGA       |
|                                                                                     | 0092814-228       | MINI PLACA EVO L 110° DIR, OBLÍQUA FECHADA, 2X2 F EXTRA LONGA |
|  | 0092814-223       | MINI PLACA EVO L 110° ESQ, OBLÍQUA FECHADA, 2X2 F PEQUENA     |
|                                                                                     | 0092814-225       | MINI PLACA EVO L 110° ESQ, OBLÍQUA FECHADA, 2X2 F MÉDIA       |
|                                                                                     | 0092814-227       | MINI PLACA EVO L 110° ESQ, OBLÍQUA FECHADA, 2X2 F LONGA       |
|                                                                                     | 0092814-229       | MINI PLACA EVO L 110° ESQ, OBLÍQUA FECHADA, 2X2 F EXTRA LONGA |
|  | 0092814-232       | MINI PLACA EVO L 110° DIR, OBLÍQUA FECHADA, 2X3 F PEQUENA     |
|                                                                                     | 0092814-234       | MINI PLACA EVO L 110° DIR, OBLÍQUA FECHADA, 2X3 F MÉDIA       |
|                                                                                     | 0092814-236       | MINI PLACA EVO L 110° DIR, OBLÍQUA FECHADA, 2X3 F LONGA       |
|                                                                                     | 0092814-238       | MINI PLACA EVO L 110° DIR, OBLÍQUA FECHADA, 2X3 F EXTRA LONGA |
|                                                                                     | 0092814-233       | MINI PLACA EVO L 110° ESQ, OBLÍQUA FECHADA, 2X3 F PEQUENA     |
|                                                                                     | 0092814-235       | MINI PLACA EVO L 110° ESQ, OBLÍQUA FECHADA, 2X3 F MÉDIA       |
|                                                                                     | 0092814-237       | MINI PLACA EVO L 110° ESQ, OBLÍQUA FECHADA, 2X3 F LONGA       |

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
|    | 0092814-239       | MINI PLACA EVO L 110° ESQ, OBLÍQUA FECHADA, 2X3 F EXTRA      |
|                                                                                     | 0092807-220       | MINI PLACA EVO L 2X2 F - DUAL FACE                           |
|                                                                                     | 0092807-222       | MINI PLACA EVO L PEQUENA 2X2 F - DUAL FACE                   |
|                                                                                     | 0092807-224       | MINI PLACA EVO L MÉDIA 2X2 F - DUAL FACE                     |
|                                                                                     | 0092807-226       | MINI PLACA EVO L LONGA 2X2 F - DUAL FACE                     |
|                                                                                     | 0092807-228       | MINI PLACA EVO L EXTRA LONGA 2X2 F - DUAL FACE               |
|    | 0092807-330       | MINI PLACA EVO L 3X3 F - DUAL FACE                           |
|                                                                                     | 0092807-332       | MINI PLACA EVO L PEQUENA 3X3 F - DUAL FACE                   |
|                                                                                     | 0092807-334       | MINI PLACA EVO L MÉDIA 3X3 F - DUAL FACE                     |
|                                                                                     | 0092807-336       | MINI PLACA EVO L LONGA 3X3 F - DUAL FACE                     |
|                                                                                     | 0092807-338       | MINI PLACA EVO L EXTRA LONGA 3X3 F - DUAL FACE               |
|    | 0092809-230       | MINI PLACA EVO L 100° 2X3 F - DUAL FACE                      |
|                                                                                     | 0092809-232       | MINI PLACA EVO L 100° PEQUENA 2X3 F - DUAL FACE              |
|                                                                                     | 0092809-234       | MINI PLACA EVO L 100° MÉDIA 2X3 F - DUAL FACE                |
|                                                                                     | 0092809-236       | MINI PLACA EVO L 100° LONGA 2X3 F - DUAL FACE                |
|  | 0092809-340       | MINI PLACA EVO L 100° 3X4 F - DUAL FACE                      |
|  | 0092809-342       | MINI PLACA EVO L 100° 3X4 F - DUAL FACE MAX                  |
|  | 0092809-450       | MINI PLACA EVO L 100° 4X5 F - DUAL FACE                      |
|  | 0092809-452       | MINI PLACA EVO L 100° 4X5 F - DUAL FACE MAX                  |
|  | 0092811-420       | MINI PLACA EVO L 100° ESPECIAL 4X2 F - DUAL FACE             |
|                                                                                     | 0092811-422       | MINI PLACA EVO L 100° ESPECIAL PEQUENA 4X2 F - DUAL FACE     |
|                                                                                     | 0092811-424       | MINI PLACA EVO L 100° ESPECIAL MÉDIA 4X2 F - DUAL FACE       |
|                                                                                     | 0092811-426       | MINI PLACA EVO L 100° ESPECIAL LONGA 4X2 F - DUAL FACE       |
|                                                                                     | 0092811-428       | MINI PLACA EVO L 100° ESPECIAL EXTRA LONGA 4X2 F - DUAL FACE |
|                                                                                     | 0092811-430       | MINI PLACA EVO L 100° ESPECIAL 4X3 F - DUAL FACE             |
|                                                                                     | 0092811-432       | MINI PLACA EVO L 100° ESPECIAL PEQUENA 4X3 F - DUAL FACE     |

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    | 0092811-434       | MINI PLACA EVO L 100° ESPECIAL MÉDIA 4X3 F - DUAL FACE                |
|                                                                                     | 0092811-436       | MINI PLACA EVO L 100° ESPECIAL LONGA 4X3 F - DUAL FACE                |
|                                                                                     | 0092811-438       | MINI PLACA EVO L 100° ESPECIAL EXTRA LONGA 4X3 F - DUAL FACE          |
|    | 0092813-222       | MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA ABERTA, 2X2 F PEQUENA - DUAL FACE      |
|                                                                                     | 0092813-224       | MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA ABERTA, 2X2 F MÉDIA - DUAL FACE        |
|                                                                                     | 0092813-226       | MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA ABERTA, 2X2 F LONGA - DUAL FACE        |
|                                                                                     | 0092813-228       | MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA ABERTA, 2X2 F EXTRA LONGA - DUAL FACE  |
|  | 0092813-232       | MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA ABERTA, 2X3 F PEQUENA - DUAL FACE      |
|                                                                                     | 0092813-234       | MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA ABERTA, 2X3 F MÉDIA - DUAL FACE        |
|                                                                                     | 0092813-236       | MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA ABERTA, 2X3 F LONGA - DUAL FACE        |
|                                                                                     | 0092813-238       | MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA ABERTA, 2X3 F EXTRA LONGA - DUAL FACE  |
|  | 0092815-222       | MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA FECHADA, 2X2 F PEQUENA - DUAL FACE     |
|                                                                                     | 0092815-224       | MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA FECHADA, 2X2 F MÉDIA - DUAL FACE       |
|                                                                                     | 0092815-226       | MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA FECHADA, 2X2 F LONGA - DUAL FACE       |
|                                                                                     | 0092815-228       | MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA FECHADA, 2X2 F EXTRA LONGA - DUAL FACE |
|                                                                                     | 0092815-232       | MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA FECHADA, 2X3 F PEQUENA - DUAL FACE     |

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    | 0092815-234       | MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA FECHADA, 2X3 F MÉDIA - DUAL FACE       |
|                                                                                     | 0092815-236       | MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA FECHADA, 2X3 F LONGA - DUAL FACE       |
|                                                                                     | 0092815-238       | MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA FECHADA, 2X3 F EXTRA LONGA - DUAL FACE |
|    | 0092807-221       | MINI PLACA EVO L 2X2 F - DUAL FACE PB                                 |
|                                                                                     | 0092807-223       | MINI PLACA EVO L PEQUENA 2X2 F - DUAL FACE PB                         |
|                                                                                     | 0092807-225       | MINI PLACA EVO L MÉDIA 2X2 F - DUAL FACE PB                           |
|                                                                                     | 0092807-227       | MINI PLACA EVO L LONGA 2X2 F - DUAL FACE PB                           |
|                                                                                     | 0092807-229       | MINI PLACA EVO L EXTRA LONGA 2X2 F - DUAL FACE PB                     |
|  | 0092807-331       | MINI PLACA EVO L 3X3 F - DUAL FACE PB                                 |
|                                                                                     | 0092807-333       | MINI PLACA EVO L PEQUENA 3X3 F - DUAL FACE PB                         |
|                                                                                     | 0092807-335       | MINI PLACA EVO L MÉDIA 3X3 F - DUAL FACE PB                           |
|                                                                                     | 0092807-337       | MINI PLACA EVO L LONGA 3X3 F - DUAL FACE PB                           |
|                                                                                     | 0092807-339       | MINI PLACA EVO L EXTRA LONGA 3X3 F - DUAL FACE PB                     |
|  | 0092809-231       | MINI PLACA EVO L 100° 2X3 F - DUAL FACE PB                            |
|                                                                                     | 0092809-233       | MINI PLACA EVO L 100° PEQUENA 2X3 F - DUAL FACE PB                    |
|                                                                                     | 0092809-235       | MINI PLACA EVO L 100° MÉDIA 2X3 F - DUAL FACE PB                      |
|                                                                                     | 0092809-237       | MINI PLACA EVO L 100° LONGA 2X3 F - DUAL FACE PB                      |
|  | 0092809-341       | MINI PLACA EVO L 100° 3X4 F - DUAL FACE PB                            |
|  | 0092809-343       | MINI PLACA EVO L 100° 3X4 F - DUAL FACE PB MAX                        |
|  | 0092809-451       | MINI PLACA EVO L 100° 4X5 F - DUAL FACE PB                            |

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|    | 0092809-453       | MINI PLACA EVO L 100° 4X5 F - DUAL FACE PB MAX                          |
|                                                                                     | 0092811-421       | MINI PLACA EVO L 100° ESPECIAL 4X2 F - DUAL FACE PB                     |
|                                                                                     | 0092811-423       | MINI PLACA EVO L 100° ESPECIAL PEQUENA 4X2 F - DUAL FACE PB             |
|                                                                                     | 0092811-425       | MINI PLACA EVO L 100° ESPECIAL MÉDIA 4X2 F - DUAL FACE PB               |
|                                                                                     | 0092811-427       | MINI PLACA EVO L 100° ESPECIAL LONGA 4X2 F - DUAL FACE PB               |
|    | 0092811-429       | MINI PLACA EVO L 100° ESPECIAL EXTRA LONGA 4X2 F - DUAL FACE PB         |
|                                                                                     | 0092811-431       | MINI PLACA EVO L 100° ESPECIAL 4X3 F - DUAL FACE PB                     |
|                                                                                     | 0092811-433       | MINI PLACA EVO L 100° ESPECIAL PEQUENA 4X3 F - DUAL FACE PB             |
|                                                                                     | 0092811-435       | MINI PLACA EVO L 100° ESPECIAL MÉDIA 4X3 F - DUAL FACE PB               |
|                                                                                     | 0092811-437       | MINI PLACA EVO L 100° ESPECIAL LONGA 4X3 F - DUAL FACE PB               |
|  | 0092811-439       | MINI PLACA EVO L 100° ESPECIAL EXTRA LONGA 4X3 F - DUAL FACE PB         |
|                                                                                     | 0092813-223       | MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA ABERTA, 2X2 F PEQUENA - DUAL FACE PB     |
|                                                                                     | 0092813-225       | MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA ABERTA, 2X2 F MÉDIA - DUAL FACE PB       |
|                                                                                     | 0092813-227       | MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA ABERTA, 2X2 F LONGA - DUAL FACE PB       |
|                                                                                     | 0092813-229       | MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA ABERTA, 2X2 F EXTRA LONGA - DUAL FACE PB |
|  | 0092813-233       | MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA ABERTA, 2X3 F PEQUENA - DUAL FACE PB     |
|                                                                                     | 0092813-235       | MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA ABERTA, 2X3 F MÉDIA - DUAL FACE PB       |

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | 0092813-237       | MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA ABERTA, 2X3 F LONGA - DUAL FACE PB        |
|                                                                                     | 0092813-239       | MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA ABERTA, 2X3 F EXTRA LONGA - DUAL FACE PB  |
|    | 0092815-223       | MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA FECHADA, 2X2 F PEQUENA - DUAL FACE PB     |
|                                                                                     | 0092815-225       | MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA FECHADA, 2X2 F MÉDIA - DUAL FACE PB       |
|                                                                                     | 0092815-227       | MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA FECHADA, 2X2 F LONGA - DUAL FACE PB       |
|                                                                                     | 0092815-229       | MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA FECHADA, 2X2 F EXTRA LONGA - DUAL FACE PB |
|  | 0092815-233       | MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA FECHADA, 2X3 F PEQUENA - DUAL FACE PB     |
|                                                                                     | 0092815-235       | MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA FECHADA, 2X3 F MÉDIA - DUAL FACE PB       |
|                                                                                     | 0092815-237       | MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA FECHADA, 2X3 F LONGA - DUAL FACE PB       |
|                                                                                     | 0092815-239       | MINI PLACA EVO L 110°, OBLÍQUA FECHADA, 2X3 F EXTRA LONGA - DUAL FACE PB |
|  | 0092816-320       | MINI PLACA EVO T 3X2 F                                                   |
|  | 0092816-321       | MINI PLACA EVO PONTE T 3X2 F                                             |
|                                                                                     | 0092816-322       | MINI PLACA EVO PONTE T PEQUENA 3X2 F                                     |
|                                                                                     | 0092816-324       | MINI PLACA EVO PONTE T MÉDIA 3X2 F                                       |
|                                                                                     | 0092816-326       | MINI PLACA EVO PONTE T LONGA 3X2 F                                       |
|                                                                                     | 0092816-328       | MINI PLACA EVO PONTE T EXTRA LONGA 3X2 F                                 |
|  | 0092818-330       | MINI PLACA EVO T 3X3 F                                                   |

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
|    | 0092818-331       | MINI PLACA EVO PONTE T 3X3 F                                |
|                                                                                     | 0092818-332       | MINI PLACA EVO PONTE T PEQUENA 3X3 F                        |
|                                                                                     | 0092818-334       | MINI PLACA EVO PONTE T MÉDIA 3X3 F                          |
|                                                                                     | 0092818-336       | MINI PLACA EVO PONTE T LONGA 3X3 F                          |
|    | 0092818-338       | MINI PLACA EVO PONTE T EXTRA LONGA 3X3 F                    |
|                                                                                     | 0092820-320       | MINI PLACA EVO T OBLÍQUA 110° DIREITA 3X2 F                 |
|                                                                                     | 0092820-322       | MINI PLACA EVO T OBLÍQUA 110° DIREITA PEQUENA 3X2 F         |
|                                                                                     | 0092820-324       | MINI PLACA EVO T OBLÍQUA 110° DIREITA MÉDIA 3X2F            |
|    | 0092820-326       | MINI PLACA EVO T OBLÍQUA 110° DIREITA LONGA 3X2 F           |
|                                                                                     | 0092820-328       | MINI PLACA EVO T OBLÍQUA 110° DIREITA EXTRA LONGA 3X2 F     |
|                                                                                     | 0092820-321       | MINI PLACA EVO T OBLÍQUA 110° ESQUERDA 3X2 F                |
|                                                                                     | 0092820-323       | MINI PLACA EVO T OBLÍQUA 110° ESQUERDA PEQUENA 3X2 F        |
|  | 0092820-325       | MINI PLACA EVO T OBLÍQUA 110° ESQUERDA MÉDIA 3X2 F          |
|                                                                                     | 0092820-327       | MINI PLACA EVO T OBLÍQUA 110° ESQUERDA LONGA 3X2 F          |
|                                                                                     | 0092820-329       | MINI PLACA EVO T OBLÍQUA 110° ESQUERDA EXTRA LONGA 3X2 F    |
|                                                                                     | 0092821-320       | MINI PLACA EVO T OBLÍQUA 110° 3X2 F - DUAL FACE             |
|  | 0092821-322       | MINI PLACA EVO T OBLÍQUA 110° PEQUENA 3X2 F - DUAL FACE     |
|                                                                                     | 0092821-324       | MINI PLACA EVO T OBLÍQUA 110° MÉDIA 3X2F - DUAL FACE        |
|                                                                                     | 0092821-326       | MINI PLACA EVO T OBLÍQUA 110° LONGA 3X2 F - DUAL FACE       |
|                                                                                     | 0092821-328       | MINI PLACA EVO T OBLÍQUA 110° EXTRA LONGA 3X2 F - DUAL FACE |
|  | 0092821-321       | MINI PLACA EVO T OBLÍQUA 110° 3X2 F - DUAL FACE PB          |
|                                                                                     | 0092821-323       | MINI PLACA EVO T OBLÍQUA 110° PEQUENA 3X2 F - DUAL FACE PB  |
|                                                                                     | 0092821-325       | MINI PLACA EVO T OBLÍQUA 110° MÉDIA 3X2F - DUAL FACE PB     |
|                                                                                     | 0092821-327       | MINI PLACA EVO T OBLÍQUA 110° LONGA 3X2 F - DUAL FACE PB    |

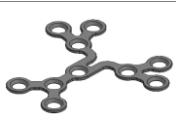
|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | 0092821-329       | MINI PLACA EVO T OBLÍQUA 110° EXTRA LONGA 3X2 F - DUAL FACE PB |
|    | 0092822-000       | MINI PLACA EVO PONTE Y STANDARD                                |
|                                                                                     | 0092822-002       | MINI PLACA EVO PONTE Y PEQUENA                                 |
|                                                                                     | 0092822-004       | MINI PLACA EVO PONTE Y MÉDIA                                   |
|                                                                                     | 0092822-006       | MINI PLACA EVO PONTE Y LONGA                                   |
|                                                                                     | 0092822-008       | MINI PLACA EVO PONTE Y EXTRA LONGA                             |
|    | 0092823-000       | MINI PLACA EVO PONTE Y PB 4X4 F MAX                            |
|   | 0092824-220       | MINI PLACA EVO Y OBLÍQUA ABERTA 2X2 F                          |
|                                                                                     | 0092824-222       | MINI PLACA EVO Y OBLÍQUA ABERTA PEQUENA 2X2 F                  |
|                                                                                     | 0092824-224       | MINI PLACA EVO Y OBLÍQUA ABERTA MÉDIA 2X2 F                    |
|                                                                                     | 0092824-226       | MINI PLACA EVO Y OBLÍQUA ABERTA LONGA 2X2 F                    |
|                                                                                     | 0092824-228       | MINI PLACA EVO Y OBLÍQUA ABERTA EXTRA LONGA 2X2 F              |
|  | 0092826-220       | MINI PLACA EVO Y OBLÍQUA FECHADA 2X2 F                         |
|                                                                                     | 0092826-222       | MINI PLACA EVO Y OBLÍQUA FECHADA PEQUENA 2X2 F                 |
|                                                                                     | 0092826-224       | MINI PLACA EVO Y OBLÍQUA FECHADA MÉDIA 2X2 F                   |
|                                                                                     | 0092826-226       | MINI PLACA EVO Y OBLÍQUA FECHADA LONGA 2X2 F                   |
|                                                                                     | 0092826-228       | MINI PLACA EVO Y OBLÍQUA FECHADA EXTRA LONGA 2X2 F             |
|  | 0092825-220       | MINI PLACA EVO Y OBLÍQUA 2X2 F - DUAL FACE                     |
|                                                                                     | 0092825-222       | MINI PLACA EVO Y OBLÍQUA PEQUENA 2X2 F - DUAL FACE             |
|                                                                                     | 0092825-224       | MINI PLACA EVO Y OBLÍQUA MÉDIA 2X2 F - DUAL FACE               |
|                                                                                     | 0092825-226       | MINI PLACA EVO Y OBLÍQUA LONGA 2X2 F - DUAL FACE               |
|                                                                                     | 0092825-228       | MINI PLACA EVO Y OBLÍQUA EXTRA LONGA 2X2 F - DUAL FACE         |
|  | 0092825-221       | MINI PLACA EVO Y OBLÍQUA 2X2 F - DUAL FACE PB                  |
|                                                                                     | 0092825-223       | MINI PLACA EVO Y OBLÍQUA PEQUENA 2X2 F - DUAL FACE PB          |
|                                                                                     | 0092825-225       | MINI PLACA EVO Y OBLÍQUA MÉDIA 2X2 F - DUAL FACE PB            |
|                                                                                     | 0092825-227       | MINI PLACA EVO Y OBLÍQUA LONGA 2X2 F - DUAL FACE PB            |
|                                                                                     | 0092825-229       | MINI PLACA EVO Y OBLÍQUA EXTRA LONGA 2X2 F - DUAL FACE PB      |

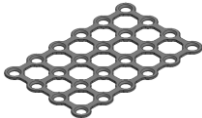
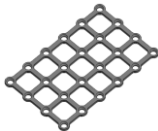
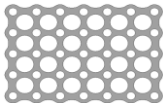
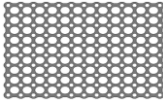
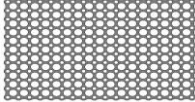
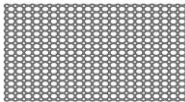
|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
|    | 0092827-440       | MINI PLACA EVO PB DUPLO T 3X3 F MAX                 |
|    | 0092828-330       | MINI PLACA EVO DUPLO Y STANDARD                     |
|                                                                                     | 0092828-332       | MINI PLACA EVO DUPLO Y PEQUENA                      |
|                                                                                     | 0092828-334       | MINI PLACA EVO DUPLO Y MÉDIA                        |
|                                                                                     | 0092828-336       | MINI PLACA EVO DUPLO Y LONGA                        |
|    | 0092829-440       | MINI PLACA EVO REFORÇADA DUPLO Y STANDARD 4X4 F MAX |
|                                                                                     | 0092829-442       | MINI PLACA EVO REFORÇADA DUPLO Y PEQUENA 4X4 F MAX  |
|                                                                                     | 0092829-444       | MINI PLACA EVO REFORÇADA DUPLO Y MÉDIA 4X4 F MAX    |
|                                                                                     | 0092829-446       | MINI PLACA EVO REFORÇADA DUPLO Y LONGA 4X4 F MAX    |
|    | 0092830-006       | MINI PLACA EVO ORBITAL 6 F                          |
|                                                                                     | 0092830-008       | MINI PLACA EVO ORBITAL 8 F                          |
|                                                                                     | 0092830-010       | MINI PLACA EVO ORBITAL 10 F                         |
|   | 0092830-106       | MINI PLACA EVO ORBITAL PB 6 F MAX                   |
|                                                                                     | 0092830-108       | MINI PLACA EVO ORBITAL PB 8 F MAX                   |
|                                                                                     | 0092830-110       | MINI PLACA EVO ORBITAL PB 10 F MAX                  |
|  | 0092832-220       | MINI PLACA EVO Z 100° DIREITA STANDARD              |
|                                                                                     | 0092832-222       | MINI PLACA EVO Z 100° DIREITA PEQUENA               |
|                                                                                     | 0092832-224       | MINI PLACA EVO Z 100° DIREITA MÉDIA                 |
|  | 0092832-226       | MINI PLACA EVO Z 100° DIREITA LONGA                 |
|                                                                                     | 0092832-221       | MINI PLACA EVO Z 100° ESQUERDA STANDARD             |
|                                                                                     | 0092832-223       | MINI PLACA EVO Z 100° ESQUERDA PEQUENA              |
|                                                                                     | 0092832-225       | MINI PLACA EVO Z 100° ESQUERDA MÉDIA                |
|  | 0092832-227       | MINI PLACA EVO Z 100° ESQUERDA LONGA                |
|                                                                                     | 0092831-220       | MINI PLACA EVO Z 100° STANDARD - DUAL FACE          |
|                                                                                     | 0092831-222       | MINI PLACA EVO Z 100° PEQUENA - DUAL FACE           |
|                                                                                     | 0092831-224       | MINI PLACA EVO Z 100° MÉDIA - DUAL FACE             |
|  | 0092831-226       | MINI PLACA EVO Z 100° LONGA - DUAL FACE             |
|                                                                                     | 0092831-221       | MINI PLACA EVO Z 100° STANDARD - DUAL FACE PB       |
|                                                                                     | 0092831-223       | MINI PLACA EVO Z 100° PEQUENA - DUAL FACE PB        |
|                                                                                     | 0092831-225       | MINI PLACA EVO Z 100° MÉDIA - DUAL FACE PB          |
|  | 0092831-227       | MINI PLACA EVO Z 100° LONGA - DUAL FACE PB          |
|                                                                                     | 0092833-002       | MINI PLACA EVO LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANÇO   |
|                                                                                     | 0092833-003       | MINI PLACA EVO LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANÇO   |
|                                                                                     | 0092833-004       | MINI PLACA EVO LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANÇO   |
|                                                                                     | 0092833-005       | MINI PLACA EVO LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANÇO   |

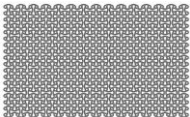
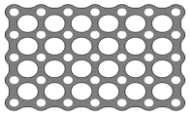
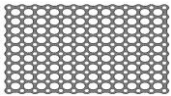
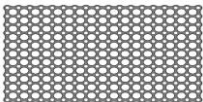
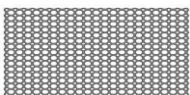
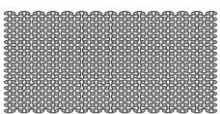
| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
|    | 0092833-006       | MINI PLACA EVO LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANÇO  |
|                                                                                     | 0092833-008       | MINI PLACA EVO LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANÇO  |
|                                                                                     | 0092833-010       | MINI PLACA EVO LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANÇO  |
|                                                                                     | 0092833-012       | MINI PLACA EVO LE FORT DIREITA COM OBLONGO AVANÇO  |
|    | 0092833-102       | MINI PLACA EVO LE FORT ESQUERDA COM OBLONGO AVANÇO |
|                                                                                     | 0092833-103       | MINI PLACA EVO LE FORT ESQUERDA COM OBLONGO AVANÇO |
|                                                                                     | 0092833-104       | MINI PLACA EVO LE FORT ESQUERDA COM OBLONGO AVANÇO |
|                                                                                     | 0092833-105       | MINI PLACA EVO LE FORT ESQUERDA COM OBLONGO AVANÇO |
|                                                                                     | 0092833-106       | MINI PLACA EVO LE FORT ESQUERDA COM OBLONGO AVANÇO |
|                                                                                     | 0092833-108       | MINI PLACA EVO LE FORT ESQUERDA COM OBLONGO AVANÇO |
|                                                                                     | 0092833-110       | MINI PLACA EVO LE FORT ESQUERDA COM OBLONGO AVANÇO |
|                                                                                     | 0092833-112       | MINI PLACA EVO LE FORT ESQUERDA COM OBLONGO AVANÇO |
|   | 0092834-002       | MINI PLACA EVO MENTO AVANÇO 2MM                    |
|                                                                                     | 0092834-004       | MINI PLACA EVO MENTO AVANÇO 4MM                    |
|                                                                                     | 0092834-006       | MINI PLACA EVO MENTO AVANÇO 6MM                    |
|                                                                                     | 0092834-008       | MINI PLACA EVO MENTO AVANÇO 8MM                    |
|                                                                                     | 0092834-010       | MINI PLACA EVO MENTO AVANÇO 10MM                   |
|                                                                                     | 0092834-012       | MINI PLACA EVO MENTO AVANÇO 12MM                   |
|                                                                                     | 0092834-014       | MINI PLACA EVO MENTO AVANÇO 14MM                   |
|                                                                                     | 0092834-016       | MINI PLACA EVO MENTO AVANÇO 16MM                   |
|  | 0092835-002       | MINI PLACA EVO LE FORT DIREITA AVANÇO 2MM          |
|                                                                                     | 0092835-003       | MINI PLACA EVO LE FORT DIREITA AVANÇO 3MM          |
|                                                                                     | 0092835-004       | MINI PLACA EVO LE FORT DIREITA AVANÇO 4MM          |
|                                                                                     | 0092835-005       | MINI PLACA EVO LE FORT DIREITA AVANÇO 5MM          |
|                                                                                     | 0092835-006       | MINI PLACA EVO LE FORT DIREITA AVANÇO 6MM          |
|                                                                                     | 0092835-008       | MINI PLACA EVO LE FORT DIREITA AVANÇO 8MM          |
|                                                                                     | 0092835-010       | MINI PLACA EVO LE FORT DIREITA AVANÇO 10MM         |
|                                                                                     | 0092835-012       | MINI PLACA EVO LE FORT DIREITA AVANÇO 12MM         |
|  | 0092835-102       | MINI PLACA EVO LE FORT ESQUERDA AVANÇO 2MM         |
|                                                                                     | 0092835-103       | MINI PLACA EVO LE FORT ESQUERDA AVANÇO 3MM         |
|                                                                                     | 0092835-104       | MINI PLACA EVO LE FORT ESQUERDA AVANÇO 4MM         |
|                                                                                     | 0092835-105       | MINI PLACA EVO LE FORT ESQUERDA AVANÇO 5MM         |
|                                                                                     | 0092835-106       | MINI PLACA EVO LE FORT ESQUERDA AVANÇO 6MM         |
|                                                                                     | 0092835-108       | MINI PLACA EVO LE FORT ESQUERDA AVANÇO 8MM         |
|                                                                                     | 0092835-110       | MINI PLACA EVO LE FORT ESQUERDA AVANÇO 10MM        |
|                                                                                     | 0092835-112       | MINI PLACA EVO LE FORT ESQUERDA AVANÇO 12MM        |
|                                                                                     | 0092836-002       | MINI PLACA EVO CHIN AVANÇO 2,5MM                   |

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|    | 0092836-004       | MINI PLACA EVO CHIN AVANÇO 4MM     |
|                                                                                     | 0092836-006       | MINI PLACA EVO CHIN AVANÇO 6MM     |
|                                                                                     | 0092836-008       | MINI PLACA EVO CHIN AVANÇO 8MM     |
|                                                                                     | 0092836-010       | MINI PLACA EVO CHIN AVANÇO 10MM    |
|                                                                                     | 0092836-012       | MINI PLACA EVO CHIN AVANÇO 12MM    |
|                                                                                     | 0092836-014       | MINI PLACA EVO CHIN AVANÇO 14MM    |
|                                                                                     | 0092836-016       | MINI PLACA EVO CHIN AVANÇO 16MM    |
|    | 0092837-000       | MINI PLACA EVO NASAL X             |
|   | 0092838-000       | MINI PLACA EVO NASAL T             |
|  | 0092839-000       | MINI PLACA EVO NASAL Y             |
|  | 0092840-000       | MINI PLACA EVO NASAL H             |
|  | 0092840-002       | MINI PLACA EVO NASAL H ASSIMÉTRICA |
|  | 0092842-000       | MINI PLACA EVO TRIANGULAR          |
|  | 0092844-202       | MINI PLACA EVO QUADRADA 2X2 F      |
|                                                                                     | 0092844-203       | MINI PLACA EVO QUADRADA 2X3 F      |
|                                                                                     | 0092844-204       | MINI PLACA EVO QUADRADA 2X4 F      |
|                                                                                     | 0092844-206       | MINI PLACA EVO QUADRADA 2X6 F      |

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|    | 0092844-208       | MINI PLACA EVO QUADRADA 2X8 F      |
|                                                                                     | 0092844-210       | MINI PLACA EVO QUADRADA 2X10 F     |
|                                                                                     | 0092844-212       | MINI PLACA EVO QUADRADA 2X12 F     |
|                                                                                     | 0092844-214       | MINI PLACA EVO QUADRADA 2X14 F     |
|    | 0092844-404       | MINI PLACA EVO QUADRADA 4X4 F      |
|                                                                                     | 0092844-406       | MINI PLACA EVO QUADRADA 4X6 F      |
|    | 0092845-202       | MINI PLACA EVO QUADRADA PLUS 2X2 F |
|                                                                                     | 0092845-203       | MINI PLACA EVO QUADRADA PLUS 2X3 F |
|                                                                                     | 0092845-204       | MINI PLACA EVO QUADRADA PLUS 2X4 F |
|   | 0092845-404       | MINI PLACA EVO QUADRADA PLUS 4X4 F |
|                                                                                     | 0092845-406       | MINI PLACA EVO QUADRADA PLUS 4X6 F |
|  | 0092846-202       | MINI PLACA EVO RETANGULAR 2X2 F    |
|                                                                                     | 0092846-203       | MINI PLACA EVO RETANGULAR 2X3 F    |
|                                                                                     | 0092846-204       | MINI PLACA EVO RETANGULAR 2X4 F    |
|  | 0092846-404       | MINI PLACA EVO RETANGULAR 4X4 F    |
|                                                                                     | 0092846-406       | MINI PLACA EVO RETANGULAR 4X6 F    |
|  | 0092847-043       | MINI MALHA EVO 40X30MM             |
|  | 0092847-080       | MINI MALHA EVO 60X80MM             |
|  | 0092847-115       | MINI MALHA EVO 75X115MM            |
|  | 0092847-140       | MINI MALHA EVO 100X140MM           |

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

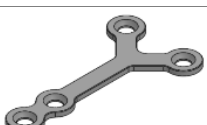
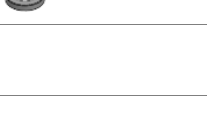
| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
|    | 0092847-230       | MINI MALHA EVO 140X230MM                       |
|    | 0092848-043       | MINI TELA EVO 40X30MM                          |
|    | 0092848-080       | MINI TELA EVO 60X80MM                          |
|    | 0092848-115       | MINI TELA EVO 75X115MM                         |
|   | 0092848-140       | MINI TELA EVO 100X140MM                        |
|  | 0092848-230       | MINI TELA EVO 140X230MM                        |
|  | 0092849-202       | MINI PLACA EVO DUPLA 2X2 F TIPO MATRIX         |
|                                                                                     | 0092849-204       | MINI PLACA EVO DUPLA 2X4 F TIPO MATRIX         |
|                                                                                     | 0092849-206       | MINI PLACA EVO DUPLA 2X6 F TIPO MATRIX         |
|                                                                                     | 0092849-208       | MINI PLACA EVO DUPLA 2X8 F TIPO MATRIX         |
|  | 0092849-214       | MINI PLACA EVO DUPLA CURVADA 2X4 F TIPO MATRIX |
|                                                                                     | 0092849-216       | MINI PLACA EVO DUPLA CURVADA 2X6 F TIPO MATRIX |
|                                                                                     | 0092849-218       | MINI PLACA EVO DUPLA CURVADA 2X8 F TIPO MATRIX |
|  | 0092850-004       | MINI PLACA EVO REFORÇADA STR 4 F               |
|                                                                                     | 0092850-006       | MINI PLACA EVO REFORÇADA STR 6 F               |
|                                                                                     | 0092850-008       | MINI PLACA EVO REFORÇADA STR 8 F               |
|                                                                                     | 0092850-010       | MINI PLACA EVO REFORÇADA STR 10 F              |
|                                                                                     | 0092850-012       | MINI PLACA EVO REFORÇADA STR 12 F              |
|                                                                                     | 0092850-014       | MINI PLACA EVO REFORÇADA STR 14 F              |
|                                                                                     | 0092850-016       | MINI PLACA EVO REFORÇADA STR 16 F              |

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
|    | 0092850-104       | MINI PLACA EVO REFORÇADA STR 4 F MAX               |
|                                                                                     | 0092850-106       | MINI PLACA EVO REFORÇADA STR 6 F MAX               |
|                                                                                     | 0092850-108       | MINI PLACA EVO REFORÇADA STR 8 F MAX               |
|                                                                                     | 0092850-110       | MINI PLACA EVO REFORÇADA STR 10 F MAX              |
|                                                                                     | 0092850-112       | MINI PLACA EVO REFORÇADA STR 12 F MAX              |
|                                                                                     | 0092850-114       | MINI PLACA EVO REFORÇADA STR 14 F MAX              |
|                                                                                     | 0092850-116       | MINI PLACA EVO REFORÇADA STR 16 F MAX              |
|                                                                                     | 0092850-120       | MINI PLACA EVO REFORÇADA STR 20 F MAX              |
|  | 0092850-204       | MINI PLACA EVO REFORÇADA CURTA STR 4 F MAX         |
|                                                                                     | 0092850-206       | MINI PLACA EVO REFORÇADA CURTA STR 6 F MAX         |
|                                                                                     | 0092850-208       | MINI PLACA EVO REFORÇADA CURTA STR 8 F MAX         |
|                                                                                     | 0092850-210       | MINI PLACA EVO REFORÇADA CURTA STR 10 F MAX        |
|                                                                                     | 0092850-212       | MINI PLACA EVO REFORÇADA CURTA STR 12 F MAX        |
|                                                                                     | 0092850-214       | MINI PLACA EVO REFORÇADA CURTA STR 14 F MAX        |
|                                                                                     | 0092850-216       | MINI PLACA EVO REFORÇADA CURTA STR 16 F MAX        |
|                                                                                     | 0092850-220       | MINI PLACA EVO REFORÇADA CURTA STR 20 F MAX        |
|  | 0092851-004       | MINI PLACA EVO REFORÇADA STR AC MÉDIA 04 F         |
|                                                                                     | 0092851-006       | MINI PLACA EVO REFORÇADA STR AC MÉDIA 06 F         |
|                                                                                     | 0092851-008       | MINI PLACA EVO REFORÇADA STR AC MÉDIA 08 F         |
|                                                                                     | 0092851-104       | MINI PLACA EVO REFORÇADA STR AC LONGA 04 F         |
|  | 0092852-024       | MINI PLACA EVO REFORÇADA PONTE STR MÉDIA 2 F       |
|  | 0092852-044       | MINI PLACA EVO REFORÇADA PONTE STR MÉDIA 4 F       |
|                                                                                     | 0092852-046       | MINI PLACA EVO REFORÇADA PONTE STR LONGA 4 F       |
|                                                                                     | 0092852-048       | MINI PLACA EVO REFORÇADA PONTE STR EXTRA LONGA 4 F |
|                                                                                     | 0092852-064       | MINI PLACA EVO REFORÇADA PONTE STR MÉDIA 6 F       |
|                                                                                     | 0092852-066       | MINI PLACA EVO REFORÇADA PONTE STR LONGA 6 F       |

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

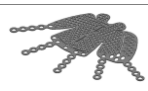
| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
|    | 0092852-068       | MINI PLACA EVO REFORÇADA PONTE STR EXTRA LONGA 6 F       |
|    | 0092852-084       | MINI PLACA EVO REFORÇADA PONTE STR MÉDIA 8 F             |
|    | 0092853-024       | MINI PLACA EVO REFORÇADA PONTE STR MÉDIA 2 F MAX         |
|    | 0092853-044       | MINI PLACA EVO REFORÇADA PONTE STR MÉDIA 4 F MAX         |
|                                                                                     | 0092853-046       | MINI PLACA EVO REFORÇADA PONTE STR LONGA 4 F MAX         |
|                                                                                     | 0092853-048       | MINI PLACA EVO REFORÇADA PONTE STR EXTRA LONGA 4 F MAX   |
|  | 0092853-064       | MINI PLACA EVO REFORÇADA PONTE STR MÉDIA 6 F MAX         |
|                                                                                     | 0092853-066       | MINI PLACA EVO REFORÇADA PONTE STR LONGA 6 F MAX         |
|                                                                                     | 0092853-068       | MINI PLACA EVO REFORÇADA PONTE STR EXTRA LONGA 6 F MAX   |
|  | 0092853-084       | MINI PLACA EVO REFORÇADA PONTE STR MÉDIA 8 F MAX         |
|  | 0092854-040       | MINI PLACA EVO EXTRA REFORÇADA STR 4 F                   |
|  | 0092854-046       | MINI PLACA EVO EXTRA REFORÇADA PONTE STR LONGA 4 F       |
|                                                                                     | 0092854-048       | MINI PLACA EVO EXTRA REFORÇADA PONTE STR EXTRA LONGA 4 F |
|  | 0092854-066       | MINI PLACA EVO EXTRA REFORÇADA PONTE STR LONGA 6 F       |
|                                                                                     | 0092854-068       | MINI PLACA EVO EXTRA REFORÇADA PONTE STR EXTRA LONGA 6 F |
|                                                                                     | 0092856-220       | MINI PLACA EVO REFORÇADA T 2X2 F                         |
|                                                                                     | 0092856-222       | MINI PLACA EVO REFORÇADA T PEQUENA 2X2 F                 |

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

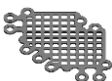
| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
|    | 0092856-224       | MINI PLACA EVO REFORÇADA T MÉDIA 2X2 F             |
|                                                                                     | 0092856-240       | MINI PLACA EVO REFORÇADA T 2X4 F                   |
|                                                                                     | 0092856-242       | MINI PLACA EVO REFORÇADA T PEQUENA 2X4 F           |
|    | 0092856-244       | MINI PLACA EVO REFORÇADA T MÉDIA 2X4 F             |
|                                                                                     | 0092857-220       | MINI PLACA EVO REFORÇADA T 2X2 F MAX               |
|                                                                                     | 0092857-221       | MINI PLACA EVO REFORÇADA T EXTRA PEQUENA 2X2 F MAX |
|    | 0092857-222       | MINI PLACA EVO REFORÇADA T PEQUENA 2X2 F MAX       |
|                                                                                     | 0092857-224       | MINI PLACA EVO REFORÇADA T MÉDIA 2X2 F MAX         |
|                                                                                     | 0092857-240       | MINI PLACA EVO REFORÇADA T 2X4 F MAX               |
|   | 0092857-241       | MINI PLACA EVO REFORÇADA T EXTRA PEQUENA 2X4 F MAX |
|                                                                                     | 0092857-242       | MINI PLACA EVO REFORÇADA T PEQUENA 2X4 F MAX       |
|                                                                                     | 0092857-244       | MINI PLACA EVO REFORÇADA T MÉDIA 2X4 F MAX         |
|  | 0092857-330       | MINI PLACA EVO REFORÇADA T 3X3 F MAX               |
|  | 0092858-220       | MINI PLACA EVO REFORÇADA Y 2X2 F                   |
|                                                                                     | 0092858-222       | MINI PLACA EVO REFORÇADA Y PEQUENA 2X2 F           |
|                                                                                     | 0092858-224       | MINI PLACA EVO REFORÇADA Y MÉDIA 2X2 F             |
|  | 0092858-226       | MINI PLACA EVO REFORÇADA Y LONGA 2X2 F             |
|                                                                                     | 0092858-230       | MINI PLACA EVO REFORÇADA Y 2X3 F                   |
|                                                                                     | 0092858-232       | MINI PLACA EVO REFORÇADA Y PEQUENA 2X3 F           |
|  | 0092858-234       | MINI PLACA EVO REFORÇADA Y MÉDIA 2X3 F             |
|                                                                                     | 0092858-236       | MINI PLACA EVO REFORÇADA Y LONGA 2X3 F             |
|                                                                                     | 0092858-320       | MINI PLACA EVO REFORÇADA Y 3X2 F                   |
|  | 0092858-322       | MINI PLACA EVO REFORÇADA Y PEQUENA 3X2 F           |
|                                                                                     | 0092858-324       | MINI PLACA EVO REFORÇADA Y MÉDIA 3X2 F             |
|                                                                                     | 0092858-326       | MINI PLACA EVO REFORÇADA Y LONGA 3X2 F             |
|  | 0092859-220       | MINI PLACA EVO REFORÇADA Y 2X2 F MAX               |
|                                                                                     | 0092859-222       | MINI PLACA EVO REFORÇADA Y PEQUENA 2X2 F MAX       |
|                                                                                     | 0092859-224       | MINI PLACA EVO REFORÇADA Y MÉDIA 2X2 F MAX         |
|  | 0092859-226       | MINI PLACA EVO REFORÇADA Y LONGA 2X2 F MAX         |
|                                                                                     | 0092859-230       | MINI PLACA EVO REFORÇADA Y 2X3 F MAX               |
|                                                                                     | 0092859-232       | MINI PLACA EVO REFORÇADA Y PEQUENA 2X3 F MAX       |

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
|    | 0092859-234       | MINI PLACA EVO REFORÇADA Y MÉDIA 2X3 F MAX                   |
|                                                                                     | 0092859-236       | MINI PLACA EVO REFORÇADA Y LONGA 2X3 F MAX                   |
|                                                                                     | 0092859-320       | MINI PLACA EVO REFORÇADA Y 3X2 F MAX                         |
|                                                                                     | 0092859-322       | MINI PLACA EVO REFORÇADA Y PEQUENA 3X2 F MAX                 |
|                                                                                     | 0092859-324       | MINI PLACA EVO REFORÇADA Y MÉDIA 3X2 F MAX                   |
|                                                                                     | 0092859-326       | MINI PLACA EVO REFORÇADA Y LONGA 3X2 F MAX                   |
|    | 0092860-002       | MINI PLACA EVO CHIN REFORÇADA AVANÇO 2MM                     |
|                                                                                     | 0092860-004       | MINI PLACA EVO CHIN REFORÇADA AVANÇO 4MM                     |
|                                                                                     | 0092860-006       | MINI PLACA EVO CHIN REFORÇADA AVANÇO 6MM                     |
|                                                                                     | 0092860-008       | MINI PLACA EVO CHIN REFORÇADA AVANÇO 8MM                     |
|                                                                                     | 0092860-010       | MINI PLACA EVO CHIN REFORÇADA AVANÇO 10MM                    |
|                                                                                     | 0092860-012       | MINI PLACA EVO CHIN REFORÇADA AVANÇO 12MM                    |
|                                                                                     | 0092860-014       | MINI PLACA EVO CHIN REFORÇADA AVANÇO 14MM                    |
|                                                                                     | 0092860-016       | MINI PLACA EVO CHIN REFORÇADA AVANÇO 16MM                    |
|   | 0092862-006       | MINI PLACA EVO OSTEOTOMIA SAGITAL CURVA 6MM                  |
|                                                                                     | 0092862-012       | MINI PLACA EVO OSTEOTOMIA SAGITAL CURVA 12MM                 |
|                                                                                     | 0092862-016       | MINI PLACA EVO OSTEOTOMIA SAGITAL CURVA 16,5MM               |
|  | 0092862-106       | MINI PLACA EVO OSTEOTOMIA SAGITAL STR 6MM                    |
|                                                                                     | 0092862-112       | MINI PLACA EVO OSTEOTOMIA SAGITAL STR 12MM                   |
|                                                                                     | 0092862-115       | MINI PLACA EVO OSTEOTOMIA SAGITAL STR 15MM                   |
|                                                                                     | 0092862-120       | MINI PLACA EVO OSTEOTOMIA SAGITAL STR 20MM                   |
|  | 0092864-006       | MINI PLACA EVO OSTEOTOMIA SAGITAL PONTE STR 6MM              |
|                                                                                     | 0092864-008       | MINI PLACA EVO OSTEOTOMIA SAGITAL PONTE STR 8MM              |
|                                                                                     | 0092864-010       | MINI PLACA EVO OSTEOTOMIA SAGITAL PONTE STR 10MM             |
|                                                                                     | 0092864-012       | MINI PLACA EVO OSTEOTOMIA SAGITAL PONTE STR 12MM             |
|  | 0092866-008       | MINI PLACA EVO OSTEOTOMIA SAGITAL AJUSTE HORIZONTAL 8MM      |
|                                                                                     | 0092866-012       | MINI PLACA EVO OSTEOTOMIA SAGITAL AJUSTE HORIZONTAL 12MM     |
|  | 0092870-033       | MINI PLACA EVO OSTEOTOMIA SAGITAL 33MM TIPO SPLITFIX         |
|                                                                                     | 0092870-040       | MINI PLACA EVO OSTEOTOMIA SAGITAL 40MM TIPO SPLITFIX         |
|                                                                                     | 0092872-004       | MINI PLACA EVO OSTEOTOMIA SAGITAL AJUSTÁVEL 4 F TIPO SLIDING |

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
|    | 0092872-008       | MINI PLACA EVO OSTEOTOMIA SAGITAL AJUSTÁVEL 8 F TIPO SLIDING |
|    | 0092874-006       | MINI PLACA EVO OSTEOTOMIA SAGITAL 6 F TIPO SLIDER            |
|                                                                                     | 0092874-008       | MINI PLACA EVO OSTEOTOMIA SAGITAL 8 F TIPO SLIDER            |
|    | 0092876-004       | MINI PLACA EVO BSSO 4 F                                      |
|                                                                                     | 0092876-006       | MINI PLACA EVO BSSO 6 F                                      |
|    | 0092878-006       | MINI PLACA EVO REFORÇADA ANGULADA 6 F                        |
|                                                                                     | 0092878-008       | MINI PLACA EVO REFORÇADA ANGULADA 8 F                        |
|    | 0092879-070       | MINI PLACA EVO SUBCONDÍLEA DIREITA 7 F                       |
|   | 0092879-071       | MINI PLACA EVO SUBCONDÍLEA ESQUERDA 7 F                      |
|  | 0092879-072       | MINI PLACA EVO SUBCONDÍLEA 7 F - DUAL FACE                   |
|  | 0092879-073       | MINI PLACA EVO SUBCONDÍLEA 7 F - DUAL FACE PB                |
|  | 0092880-013       | MINI PLACA EVO CRÂNIOOTOMIA 13MM                             |
|                                                                                     | 0092880-018       | MINI PLACA EVO CRÂNIOOTOMIA 18MM                             |
|                                                                                     | 0092880-022       | MINI PLACA EVO CRÂNIOOTOMIA 22MM                             |
|                                                                                     | 0092880-025       | MINI PLACA EVO CRÂNIOOTOMIA 25MM                             |
|  | 0092890-000       | MINI MALHA EVO P/ ASSOALHO ORBITAL PEQUENA                   |
|  | 0092890-005       | MINI MALHA EVO P/ ASSOALHO ORBITAL MÉDIA                     |
|  | 0092890-010       | MINI MALHA EVO P/ ASSOALHO ORBITAL GRANDE                    |

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
|    | 0092890-015       | MINI MALHA EVO P/ ASSOALHO ORBITAL PARCIAL                |
|    | 0092890-018       | MINI MALHA EVO P/ ASSOALHO ORBITAL 18MM                   |
|    | 0092890-030       | MINI MALHA EVO P/ ASSOALHO ORBITAL 30MM                   |
|    | 0092890-040       | MINI MALHA EVO P/ ASSOALHO ORBITAL 40MM                   |
|    | 0092895-000       | MINI MALHA EVO NASAL                                      |
|  | 0092837-002       | MINI PLACA EVO LE FORT PB DIREITA C/ OBLONGO AVANÇO       |
|                                                                                     | 0092837-003       | MINI PLACA EVO LE FORT PB DIREITA C/ OBLONGO AVANÇO       |
|                                                                                     | 0092837-004       | MINI PLACA EVO LE FORT PB DIREITA C/ OBLONGO AVANÇO       |
|                                                                                     | 0092837-005       | MINI PLACA EVO LE FORT PB DIREITA C/ OBLONGO AVANÇO       |
|                                                                                     | 0092837-006       | MINI PLACA EVO LE FORT PB DIREITA C/ OBLONGO AVANÇO       |
|                                                                                     | 0092837-008       | MINI PLACA EVO LE FORT PB DIREITA C/ OBLONGO AVANÇO       |
|                                                                                     | 0092837-010       | MINI PLACA EVO LE FORT PB DIREITA C/ OBLONGO AVANÇO       |
|                                                                                     | 0092837-012       | MINI PLACA EVO LE FORT PB DIREITA C/ OBLONGO AVANÇO       |
|  | 0092837-102       | MINI PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA C/ OBLONGO AVANÇO 2MM  |
|                                                                                     | 0092837-103       | MINI PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA C/ OBLONGO AVANÇO 3MM  |
|                                                                                     | 0092837-104       | MINI PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA C/ OBLONGO AVANÇO 4MM  |
|                                                                                     | 0092837-105       | MINI PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA C/ OBLONGO AVANÇO 5MM  |
|                                                                                     | 0092837-106       | MINI PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA C/ OBLONGO AVANÇO 6MM  |
|                                                                                     | 0092837-108       | MINI PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA C/ OBLONGO AVANÇO 8MM  |
|                                                                                     | 0092837-110       | MINI PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA C/ OBLONGO AVANÇO 10MM |

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                     | 0092837-112       | MINI PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA C/ OBLONGO AVANÇO 12MM |
|    | 0092834-102       | MINI PLACA EVO MENTO PB AVANÇO 2MM                        |
|                                                                                     | 0092834-104       | MINI PLACA EVO MENTO PB AVANÇO 4MM                        |
|                                                                                     | 0092834-106       | MINI PLACA EVO MENTO PB AVANÇO 6MM                        |
|                                                                                     | 0092834-108       | MINI PLACA EVO MENTO PB AVANÇO 8MM                        |
|                                                                                     | 0092834-110       | MINI PLACA EVO MENTO PB AVANÇO 10MM                       |
|                                                                                     | 0092834-112       | MINI PLACA EVO MENTO PB AVANÇO 12MM                       |
|                                                                                     | 0092834-114       | MINI PLACA EVO MENTO PB AVANÇO 14MM                       |
|                                                                                     | 0092834-116       | MINI PLACA EVO MENTO PB AVANÇO 16MM                       |
|  | 0092838-002       | MINI PLACA EVO LE FORT PB DIREITA AVANÇO 2MM              |
|                                                                                     | 0092838-003       | MINI PLACA EVO LE FORT PB DIREITA AVANÇO 3MM              |
|                                                                                     | 0092838-004       | MINI PLACA EVO LE FORT PB DIREITA AVANÇO 4MM              |
|                                                                                     | 0092838-005       | MINI PLACA EVO LE FORT PB DIREITA AVANÇO 5MM              |
|                                                                                     | 0092838-006       | MINI PLACA EVO LE FORT PB DIREITA AVANÇO 6MM              |
|                                                                                     | 0092838-008       | MINI PLACA EVO LE FORT PB DIREITA AVANÇO 8MM              |
|                                                                                     | 0092838-010       | MINI PLACA EVO LE FORT PB DIREITA AVANÇO 10MM             |
|                                                                                     | 0092838-012       | MINI PLACA EVO LE FORT PB DIREITA AVANÇO 12MM             |
|  | 0092838-102       | MINI PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA AVANÇO 2MM             |
|                                                                                     | 0092838-103       | MINI PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA AVANÇO 3MM             |
|                                                                                     | 0092838-104       | MINI PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA AVANÇO 4MM             |
|                                                                                     | 0092838-105       | MINI PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA AVANÇO 5MM             |
|                                                                                     | 0092838-106       | MINI PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA AVANÇO 6MM             |
|                                                                                     | 0092838-108       | MINI PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA AVANÇO 8MM             |
|                                                                                     | 0092838-110       | MINI PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA AVANÇO 10MM            |
|                                                                                     | 0092838-112       | MINI PLACA EVO LE FORT PB ESQUERDA AVANÇO 12MM            |
|                                                                                     | 0092836-102       | MINI PLACA EVO CHIN PB AVANÇO 2,5MM                       |
|                                                                                     | 0092836-104       | MINI PLACA EVO CHIN PB AVANÇO 4MM                         |
|                                                                                     | 0092836-106       | MINI PLACA EVO CHIN PB AVANÇO 6MM                         |

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
|    | 0092836-108       | MINI PLACA EVO CHIN PB AVANÇO 8MM            |
|                                                                                     | 0092836-110       | MINI PLACA EVO CHIN PB AVANÇO 10MM           |
|                                                                                     | 0092836-112       | MINI PLACA EVO CHIN PB AVANÇO 12MM           |
|                                                                                     | 0092836-114       | MINI PLACA EVO CHIN PB AVANÇO 14MM           |
|                                                                                     | 0092836-116       | MINI PLACA EVO CHIN PB AVANÇO 16MM           |
|    | 0092860-102       | MINI PLACA EVO CHIN PB REFORÇADA AVANÇO 2MM  |
|                                                                                     | 0092860-104       | MINI PLACA EVO CHIN PB REFORÇADA AVANÇO 4MM  |
|                                                                                     | 0092860-106       | MINI PLACA EVO CHIN PB REFORÇADA AVANÇO 6MM  |
|                                                                                     | 0092860-108       | MINI PLACA EVO CHIN PB REFORÇADA AVANÇO 8MM  |
|                                                                                     | 0092860-110       | MINI PLACA EVO CHIN PB REFORÇADA AVANÇO 10MM |
|                                                                                     | 0092860-112       | MINI PLACA EVO CHIN PB REFORÇADA AVANÇO 12MM |
|                                                                                     | 0092860-114       | MINI PLACA EVO CHIN PB REFORÇADA AVANÇO 14MM |
|                                                                                     | 0092860-116       | MINI PLACA EVO CHIN PB REFORÇADA AVANÇO 16MM |
|  | 0092860-202       | MINI PLACA EVO CHIN PB AVANÇO 2MM MAX        |
|                                                                                     | 0092860-204       | MINI PLACA EVO CHIN PB AVANÇO 4MM MAX        |
|                                                                                     | 0092860-206       | MINI PLACA EVO CHIN PB AVANÇO 6MM MAX        |
|                                                                                     | 0092860-208       | MINI PLACA EVO CHIN PB AVANÇO 8MM MAX        |
|                                                                                     | 0092860-210       | MINI PLACA EVO CHIN PB AVANÇO 10MM MAX       |
|                                                                                     | 0092860-212       | MINI PLACA EVO CHIN PB AVANÇO 12MM MAX       |
|                                                                                     | 0092860-214       | MINI PLACA EVO CHIN PB AVANÇO 14MM MAX       |
|                                                                                     | 0092860-216       | MINI PLACA EVO CHIN PB AVANÇO 16MM MAX       |
|  | 0092881-222       | MINI PLACA EVO PONTE 2X2 F PEQUENA           |
|  | 0092881-224       | MINI PLACA EVO PONTE 2X2 F MÉDIA             |
|  | 0092881-226       | MINI PLACA EVO PONTE 2X2 F LONGA             |

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
|    | 0092881-228       | MINI PLACA EVO PONTE 2X2 F EXTRA LONGA         |
|    | 0092881-338       | MINI PLACA EVO PONTE 3X3 F EXTRA LONGA         |
|    | 0092881-223       | MINI PLACA EVO PONTE PB 2X2 F PEQUENA          |
|    | 0092881-225       | MINI PLACA EVO PONTE PB 2X2 F MÉDIA            |
|   | 0092881-227       | MINI PLACA EVO PONTE PB 2X2 F LONGA            |
|  | 0092881-229       | MINI PLACA EVO PONTE PB 2X2 F EXTRA LONGA      |
|  | 0092881-339       | MINI PLACA EVO PONTE PB 3X3 F EXTRA LONGA      |
|  | 0092882-222       | MINI PLACA EVO L 2X2 F PEQUENA - DUAL FACE     |
|  | 0092882-224       | MINI PLACA EVO L 2X2 F MÉDIA - DUAL FACE       |
|  | 0092882-226       | MINI PLACA EVO L 2X2 F LONGA - DUAL FACE       |
|  | 0092882-228       | MINI PLACA EVO L 2X2 F EXTRA LONGA - DUAL FACE |

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
|    | 0092882-223       | MINI PLACA EVO L 2X2 F PEQUENA - DUAL FACE PB     |
|    | 0092882-225       | MINI PLACA EVO L 2X2 F MÉDIA - DUAL FACE PB       |
|    | 0092882-227       | MINI PLACA EVO L 2X2 F LONGA - DUAL FACE PB       |
|    | 0092882-229       | MINI PLACA EVO L 2X2 F EXTRA LONGA - DUAL FACE PB |
|  | 0092883-222       | MINI PLACA EVO C 2X2 F PEQUENA - DUAL FACE        |
|  | 0092883-224       | MINI PLACA EVO C 2X2 F MÉDIA - DUAL FACE          |
|  | 0092883-226       | MINI PLACA EVO C 2X2 F LONGA - DUAL FACE          |
|  | 0092883-228       | MINI PLACA EVO C 2X2 F EXTRA LONGA - DUAL FACE    |
|  | 0092883-223       | MINI PLACA EVO C 2X2 F PEQUENA - DUAL FACE PB     |
|  | 0092883-225       | MINI PLACA EVO C 2X2 F MÉDIA - DUAL FACE PB       |

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
|    | 0092883-227       | MINI PLACA EVO C 2X2 F LONGA - DUAL FACE PB       |
|    | 0092883-229       | MINI PLACA EVO C 2X2 F EXTRA LONGA - DUAL FACE PB |
|    | 0092884-222       | MINI PLACA EVO T 2X2 F PEQUENA - DUAL FACE        |
|    | 0092884-224       | MINI PLACA EVO T 2X2 F MÉDIA - DUAL FACE          |
|  | 0092884-226       | MINI PLACA EVO T 2X2 F LONGA - DUAL FACE          |
|  | 0092884-223       | MINI PLACA EVO T 2X2 F PEQUENA - DUAL FACE PB     |
|  | 0092884-225       | MINI PLACA EVO T 2X2 F MÉDIA - DUAL FACE PB       |
|  | 0092884-227       | MINI PLACA EVO T 2X2 F LONGA - DUAL FACE PB       |
|  | 0092836-202       | MINI PLACA EVO CHIN PB ANATÔMICA AVANÇO 2MM       |
|                                                                                     | 0092836-203       | MINI PLACA EVO CHIN PB ANATÔMICA AVANÇO 3MM       |
|                                                                                     | 0092836-204       | MINI PLACA EVO CHIN PB ANATÔMICA AVANÇO 4MM       |
|                                                                                     | 0092836-206       | MINI PLACA EVO CHIN PB ANATÔMICA AVANÇO 6MM       |
|                                                                                     | 0092836-208       | MINI PLACA EVO CHIN PB ANATÔMICA AVANÇO 8MM       |
|                                                                                     | 0092836-210       | MINI PLACA EVO CHIN PB ANATÔMICA AVANÇO 10MM      |

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
|    | 0092817-522       | MINI PLACA EVO PONTE T PEQUENA 5X2 F            |
|    | 0092817-524       | MINI PLACA EVO PONTE T MÉDIA 5X2 F              |
|    | 0092817-526       | MINI PLACA EVO PONTE T LONGA 5X2 F              |
|   | 0092829-221       | MINI PLACA EVO Z 100° PB ESQUERDA STANDARD      |
|                                                                                     | 0092829-223       | MINI PLACA EVO Z 100° PB ESQUERDA PEQUENA       |
|                                                                                     | 0092829-225       | MINI PLACA EVO Z 100° PB ESQUERDA MÉDIA         |
|                                                                                     | 0092829-227       | MINI PLACA EVO Z 100° PB ESQUERDA LONGA         |
|  | 0092829-220       | MINI PLACA EVO Z 100° PB DIREITA STANDARD       |
|                                                                                     | 0092829-222       | MINI PLACA EVO Z 100° PB DIREITA PEQUENA        |
|                                                                                     | 0092829-224       | MINI PLACA EVO Z 100° PB DIREITA MÉDIA          |
|                                                                                     | 0092829-226       | MINI PLACA EVO Z 100° PB DIREITA LONGA          |
|  | 0092904-010       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PBAC STR 10 F            |
|                                                                                     | 0092904-012       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PBAC STR 12 F            |
|                                                                                     | 0092904-014       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PBAC STR 14 F            |
|                                                                                     | 0092904-016       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PBAC STR 16 F            |
|  | 0092906-040       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PBAC PONTE STR 4 F       |
|                                                                                     | 0092906-044       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PBAC PONTE STR MÉDIA 4 F |
|                                                                                     | 0092906-046       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PBAC PONTE STR LONGA 4 F |
|                                                                                     | 0092906-060       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PBAC PONTE STR 6 F       |
|                                                                                     | 0092906-064       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PBAC PONTE STR MÉDIA 6 F |
|                                                                                     | 0092906-066       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PBAC PONTE STR LONGA 6 F |
|  | 0092906-080       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PBAC PONTE STR 8 F       |
|                                                                                     | 0092906-084       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PBAC PONTE STR MÉDIA 8 F |
|                                                                                     | 0092906-086       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PBAC PONTE STR LONGA 8 F |
|  | 0092908-060       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PBAC CURVADA 6 F         |

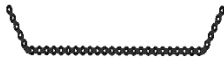
|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
|    | 0092910-330       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PBAC ANGULADA 3+3 F |
|                                                                                     | 0092910-440       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PBAC ANGULADA 4+4 F |
|    | 0092930-070       | PLACA SUBCONDÍLEA EVO DIREITA 7 F          |
|    | 0092930-071       | PLACA SUBCONDÍLEA EVO ESQUERDA 7 F         |
|  | 0092950-006       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO STR 6 F             |
|                                                                                     | 0092950-008       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO STR 8 F             |
|                                                                                     | 0092950-010       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO STR 10 F            |
|                                                                                     | 0092950-012       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO STR 12 F            |
|                                                                                     | 0092950-014       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO STR 14 F            |
|                                                                                     | 0092950-016       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO STR 16 F            |
|                                                                                     | 0092950-018       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO STR 18 F            |
|                                                                                     | 0092950-020       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO STR 20 F            |
|                                                                                     | 0092950-022       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO STR 22 F            |
|                                                                                     | 0092950-024       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO STR 24 F            |
|  | 0092952-040       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PONTE STR 4 F       |
|                                                                                     | 0092952-044       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PONTE STR MÉDIA 4 F |
|                                                                                     | 0092952-046       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PONTE STR LONGA 4 F |
|                                                                                     | 0092952-060       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PONTE STR 6 F       |
|                                                                                     | 0092952-064       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PONTE STR MÉDIA 6 F |
|                                                                                     | 0092952-066       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PONTE STR LONGA 6 F |
|                                                                                     | 0092952-080       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PONTE STR 8 F       |
|                                                                                     | 0092952-084       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PONTE STR MÉDIA 8 F |
|                                                                                     | 0092952-086       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO PONTE STR LONGA 8 F |
|  | 0092964-090       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO DIREITA 4+9 F       |

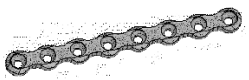
|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
|    | 0092964-091       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO ESQUERDA 4+9 F                |
|    | 0092964-170       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO DIREITA 4+17 F                |
|    | 0092964-171       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO ESQUERDA 4+17 F               |
|    | 0092965-110       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO DIREITA 5+11 F                |
|   | 0092965-111       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO ESQUERDA 5+11 F               |
|  | 0092965-220       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO DIREITA 5+22 F                |
|  | 0092965-221       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO ESQUERDA 5+22 F               |
|  | 0092967-230       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO DIREITA 7+23 F                |
|  | 0092967-231       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO ESQUERDA 7+23 F               |
|  | 0092974-144       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL PRÉ-CONTORNADA 4+14+4 F |
|  | 0092974-164       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL PRÉ-CONTORNADA 4+16+4 F |
|  | 0092974-184       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL PRÉ-CONTORNADA 4+18+4 F |

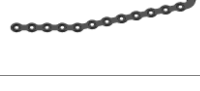
|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
|    | 0092974-205       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL PRÉ-CONTORNADA 5+20+5 F |
|    | 0092974-225       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL PRÉ-CONTORNADA 5+22+5 F |
|    | 0092974-226       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL PRÉ-CONTORNADA 6+22+6 F |
|    | 0092974-245       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL PRÉ-CONTORNADA 5+24+5 F |
|  | 0092974-246       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL PRÉ-CONTORNADA 6+24+6 F |
|  | 0092975-144       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL 4+14+4 F                |
|  | 0092975-164       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL 4+16+4 F                |
|  | 0092975-184       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL 4+18+4 F                |
|  | 0092975-205       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL 5+20+5 F                |
|  | 0092975-225       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL 5+22+5 F                |
|  | 0092975-245       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL 5+24+5 F                |
|  | 0092976-226       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL 6+22+6 F                |

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
|    | 0092976-246       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL 6+24+6 F                |
|    | 0092977-018       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO ARQUEADA 18 F                 |
|    | 0092977-020       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO ARQUEADA 20 F                 |
|    | 0092977-022       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO ARQUEADA 22 F                 |
|  | 0092950-106       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA STR 6 F             |
|                                                                                     | 0092950-108       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA STR 8 F             |
|                                                                                     | 0092950-110       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA STR 10 F            |
|                                                                                     | 0092950-112       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA STR 12 F            |
|                                                                                     | 0092950-114       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA STR 14 F            |
|                                                                                     | 0092950-116       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA STR 16 F            |
|                                                                                     | 0092950-118       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA STR 18 F            |
|                                                                                     | 0092950-120       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA STR 20 F            |
|                                                                                     | 0092950-122       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA STR 22 F            |
|  | 0092950-124       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA STR 24 F            |
|                                                                                     | 0092952-140       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA PONTE STR 4 F       |
|                                                                                     | 0092952-144       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA PONTE STR MÉDIA 4 F |
|                                                                                     | 0092952-146       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA PONTE STR LONGA 4 F |
|                                                                                     | 0092952-160       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA PONTE STR 6 F       |
|                                                                                     | 0092952-164       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA PONTE STR MÉDIA 6 F |
|                                                                                     | 0092952-166       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA PONTE STR LONGA 6 F |
|                                                                                     | 0092952-180       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA PONTE STR 8 F       |

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                     | 0092952-184       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA PONTE STR MÉDIA 8 F  |
|                                                                                     | 0092952-186       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA PONTE STR LONGA 8 F  |
|    | 0092980-510       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA 110° DIREITA 5+10 F  |
|    | 0092980-511       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA 110° DIREITA 5+11 F  |
|   | 0092980-512       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA 110° DIREITA 5+12 F  |
|  | 0092981-510       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA 110° ESQUERDA 5+10 F |
|  | 0092981-511       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA 110° ESQUERDA 5+11 F |
|  | 0092981-512       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA 110° ESQUERDA 5+12 F |
|  | 0092982-515       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL REFORÇADA 110° 5+15+5 F  |
|  | 0092982-517       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL REFORÇADA 110° 5+17+5 F  |

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
|    | 0092982-519       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL REFORÇADA 110° 5+19+5 F  |
|    | 0092982-521       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL REFORÇADA 110° 5+21+5 F  |
|    | 0092982-623       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL REFORÇADA 110° 6+23+6 F  |
|    | 0092982-625       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL REFORÇADA 110° 6+25+6 F  |
|   | 0092983-510       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA 120° DIREITA 5+10 F  |
|  | 0092983-511       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA 120° DIREITA 5+11 F  |
|  | 0092983-512       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA 120° DIREITA 5+12 F  |
|  | 0092984-510       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA 120° ESQUERDA 5+10 F |
|  | 0092984-511       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA 120° ESQUERDA 5+11 F |
|  | 0092984-512       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA 120° ESQUERDA 5+12 F |
|  | 0092985-515       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL REFORÇADA 120° 5+15+5 F  |
|  | 0092985-517       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL REFORÇADA 120° 5+17+5 F  |

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
|    | 0092985-519       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL REFORÇADA 120° 5+19+5 F  |
|    | 0092985-521       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL REFORÇADA 120° 5+21+5 F  |
|    | 0092985-623       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL REFORÇADA 120° 6+23+6 F  |
|    | 0092985-625       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL REFORÇADA 120° 6+25+6 F  |
|    | 0092986-510       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA 130° DIREITA 5+10 F  |
|  | 0092986-511       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA 130° DIREITA 5+11 F  |
|  | 0092986-512       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA 130° DIREITA 5+12 F  |
|  | 0092987-510       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA 130° ESQUERDA 5+10 F |
|  | 0092987-511       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA 130° ESQUERDA 5+11 F |
|  | 0092987-512       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO REFORÇADA 130° ESQUERDA 5+12 F |
|  | 0092988-515       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL REFORÇADA 130° 5+15+5 F  |
|  | 0092988-517       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL REFORÇADA 130° 5+17+5 F  |
|  | 0092988-519       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL REFORÇADA 130° 5+19+5 F  |

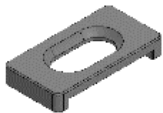
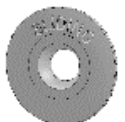
|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
|  | 0092988-521       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL REFORÇADA 130° 5+21+5 F |
|  | 0092988-623       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL REFORÇADA 130° 6+23+6 F |
|  | 0092988-625       | PLACA RECONSTRUÇÃO EVO TOTAL REFORÇADA 130° 6+25+6 F |

## 2.1. Acessórios

As Placas Especiais CMF EVO Maxifix possuem acessórios, sendo eles os cursores, conforme apresentado no Quadro 2.

Quadro 2 – Acessórios (cursores) – Placas Especiais CMF EVO Maxifix

| IMAGEM ILUSTRATIVA                                                                  | CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO COMPLETA                                       | DIMENSÕES   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------|
|  | 0092770-100       | CURSOR P/ MINI PLACA SAGITAL EVO TIPO SPLITFIX           | 1,5mm       |
|  | 0092772-100       | CURSOR P/ MINI PLACA SAGITAL EVO TIPO SLIDING            | Ø9 x 1,2mm  |
|  | 0092774-120       | CURSOR P/ MINI PLACA SAGITAL EVO TIPO SLIDER DIAM. 2,0MM | Ø10 x 0,8mm |
|  | 0092774-123       | CURSOR P/ MINI PLACA SAGITAL EVO TIPO SLIDER DIAM. 2,3MM | Ø10 x 0,8mm |

Durante o procedimento cirúrgico, os cursores auxiliam o posicionamento das Mini Placas em relação a oclusão planejada no tratamento.

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

Os cursores são utilizados apenas como fixação provisória e, após o posicionamento definitivo da placa durante o procedimento cirúrgico, devem ser removidos e devidamente descartados.

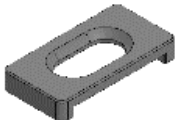
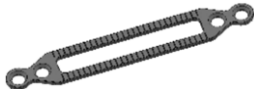
A utilização desses cursores não é mandatória, ficando a critério do profissional de saúde decidir pela sua aplicação conforme as particularidades do caso clínico, conforme situações que demandem maior complexidade ou necessitem de ajustes oclusais mais precisos.

## 2.2. Compatibilidade com os Acessórios

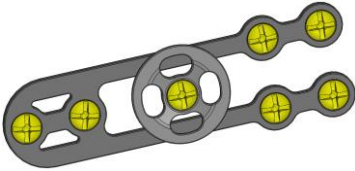
As placas sagitais foram projetadas para serem utilizadas com seus acessórios (quando necessário) de acordo com a finalidade prevista.

A seguir é apresentada a compatibilidade entre os produtos:

Quadro 3 – Compatibilidade Cursores (acessórios) x Mini Placas

| ACESSÓRIOS                                                                                                                                              | PLACAS COMPATÍVEIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0092770-100<br>CURSOR P/ MINI PLACA<br>SAGITAL EVO TIPO SPLITFIX<br> | <br>0092870-033 - Mini Placa EVO Osteotomia Sagital<br>33mm Tipo Splitfix<br><p>----- OU -----</p> <br>0092870-040 - Mini Placa EVO Osteotomia Sagital<br>40mm Tipo Splitfix | <br>Mini Placa com o Cursor sendo<br>utilizado como acessório<br>provisoriamente. |
| 0092772-100<br>CURSOR P/ MINI PLACA<br>SAGITAL EVO TIPO SLIDING<br>  | <br>0092872-004 - Mini Placa EVO Osteotomia Sagital<br>Ajustável 4 F Tipo Sliding<br><p>----- OU -----</p>                                                                   | <br>Mini Placa com o Cursor sendo<br>utilizado como acessório<br>provisoriamente. |

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

| ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                                                           | PLACAS COMPATÍVEIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                      | 0092872-008 - Mini Placa EVO Osteotomia Sagital Ajustável 8 F Tipo Sliding                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |
| 0092774-120<br>CURSOR P/ MINI PLACA SAGITAL EVO TIPO SLIDER<br>DIAM. 2,0MM<br><br>----- OU -----<br>(utilizado conforme Ø parafuso a ser utilizado) | <br>0092874-006 - Mini Placa EVO Osteotomia Sagital 6 F Tipo Slider<br><br>----- OU -----<br><br>0092874-008 - Mini Placa EVO Osteotomia Sagital 8 F Tipo Slider | <br>Mini Placa com o Cursor sendo utilizado como acessório provisoriamente. |
| 0092774-123<br>CURSOR P/ MINI PLACA SAGITAL EVO TIPO SLIDER<br>DIAM. 2,3MM<br>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |

É necessário que os implantes e acessórios sejam da Sartori e compatíveis entre si (conforme tabela acima), pois os mesmos foram projetados para tais combinações, observando acabamento, tratamento superficial e outros fatores exigidos em projetos, que podem interferir no desempenho do produto. Alertamos que o uso de implantes de diferentes fabricantes não é recomendado por motivos de incompatibilidade química, física, biológica e funcional.

### 2.3. Compatibilidade entre os Componentes Ancilares

Para o uso e desempenho pretendido das Placas Especiais CMF EVO Maxifix é necessário a utilização dos Parafusos para Microfragmentos, considerados ancilares (Registro ANVISA, à parte).

No Quadro 4 constam os códigos e descrições dos ancilares.

*Quadro 4 – Modelos comerciais - ancilares*

| <b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO - ANCILARES</b>                  |
|--------------------------------------------------------|
| AB35 0 300 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 1,5 X 04 MM |
| AB35 0 310 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 1,5 X 06 MM |
| AB35 0 320 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 1,5 X 08 MM |
| AB35 0 330 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 1,5 X 10 MM |
| AB35 0 340 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 1,5 X 12 MM |
| AB35 0 350 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 1,5 X 14 MM |
| AB35 0 360 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 1,8 X 04 MM |
| AB35 0 370 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 1,8 X 06 MM |
| AB35 0 380 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 1,8 X 08 MM |
| AB35 0 390 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 1,8 X 10 MM |
| AB35 0 400 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 1,8 X 12 MM |
| AB35 0 410 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 1,8 X 14 MM |
| AB35 0 420 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,0 X 06 MM |
| AB35 0 430 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,0 X 08 MM |
| AB35 0 440 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,0 X 10 MM |
| AB35 0 450 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,0 X 12 MM |
| AB35 0 460 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,0 X 14 MM |
| AB35 0 470 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,0 X 16 MM |
| AB35 0 480 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,0 X 18 MM |
| AB35 0 490 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,0 X 20 MM |
| AB35 0 500 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,3 X 06 MM |
| AB35 0 510 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,3 X 08 MM |
| AB35 0 520 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,3 X 10 MM |
| AB35 0 530 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,3 X 12 MM |
| AB35 0 540 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,3 X 14 MM |
| AB35 0 550 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,3 X 16 MM |
| AB35 0 560 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,3 X 18 MM |
| AB35 0 570 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,3 X 20 MM |
| AB35 0 580 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,4 X 06 MM |
| AB35 0 590 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,4 X 08 MM |
| AB35 0 600 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,4 X 10 MM |
| AB35 0 610 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,4 X 12 MM |
| AB35 0 620 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,4 X 14 MM |
| AB35 0 630 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,4 X 16 MM |
| AB35 0 640 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,4 X 18 MM |
| AB35 0 650 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,4 X 20 MM |
| AB35 0 660 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,4 X 22 MM |
| AB35 0 670 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,4 X 24 MM |
| AB35 0 680 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,7 X 06 MM |
| AB35 0 690 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,7 X 08 MM |
| AB35 0 700 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,7 X 10 MM |
| AB35 0 710 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,7 X 12 MM |
| AB35 0 720 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,7 X 14 MM |
| AB35 0 730 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,7 X 16 MM |
| AB35 0 740 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,7 X 18 MM |
| AB35 0 750 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,7 X 20 MM |
| AB35 0 760 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,7 X 22 MM |

| CÓDIGO E DESCRIÇÃO - ANCILARES                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|
| AB35 0 770 - PARAFUSO PARA MICROFRAGMENTOS 2,7 X 24 MM                  |
| 0052012-003 - PARAFUSO NANO TI DIAM.1,2 X 03MM - FENDA CRUZ             |
| 0052012-004 - PARAFUSO NANO TI DIAM.1,2 X 04MM - FENDA CRUZ             |
| 0052012-005 - PARAFUSO NANO TI DIAM.1,2 X 05MM - FENDA CRUZ             |
| 0052012-006 - PARAFUSO NANO TI DIAM.1,2 X 06MM - FENDA CRUZ             |
| 0052012-007 - PARAFUSO NANO TI DIAM.1,2 X 07MM - FENDA CRUZ             |
| 0052012-008 - PARAFUSO NANO TI DIAM.1,2 X 08MM - FENDA CRUZ             |
| 0052012-009 - PARAFUSO NANO TI DIAM.1,2 X 09MM - FENDA CRUZ             |
| 0052012-010 - PARAFUSO NANO TI DIAM.1,2 X 10MM - FENDA CRUZ             |
| 0052112-003 - PARAFUSO NANO TI PURO DIAM.1,2 X 03MM - FENDA CRUZ        |
| 0052112-004 - PARAFUSO NANO TI PURO DIAM.1,2 X 04MM - FENDA CRUZ        |
| 0052112-005 - PARAFUSO NANO TI PURO DIAM.1,2 X 05MM - FENDA CRUZ        |
| 0052112-006 - PARAFUSO NANO TI PURO DIAM.1,2 X 06MM - FENDA CRUZ        |
| 0052112-007 - PARAFUSO NANO TI PURO DIAM.1,2 X 07MM - FENDA CRUZ        |
| 0052112-008 - PARAFUSO NANO TI PURO DIAM.1,2 X 08MM - FENDA CRUZ        |
| 0052112-009 - PARAFUSO NANO TI PURO DIAM.1,2 X 09MM - FENDA CRUZ        |
| 0052112-010 - PARAFUSO NANO TI PURO DIAM.1,2 X 10MM - FENDA CRUZ        |
| 0052015-003 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,5X3,0MM - FENDA CRUZ             |
| 0052015-004 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,5X4,0MM - FENDA CRUZ             |
| 0052015-005 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,5X5,0MM - FENDA CRUZ             |
| 0052015-006 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,5X6,0MM - FENDA CRUZ             |
| 0052015-007 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,5X7,0MM - FENDA CRUZ             |
| 0052015-008 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,5X8,0MM - FENDA CRUZ             |
| 0052015-009 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,5X9,0MM - FENDA CRUZ             |
| 0052015-010 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,5X10,0MM - FENDA CRUZ            |
| 0052015-011 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,5X11,0MM - FENDA CRUZ            |
| 0052015-012 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,5X12,0MM - FENDA CRUZ            |
| 0052015-013 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,5X13,0MM - FENDA CRUZ            |
| 0052015-014 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,5X14,0MM - FENDA CRUZ            |
| 0052015-015 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,5X15,0MM - FENDA CRUZ            |
| 0052015-016 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,5X16,0MM - FENDA CRUZ            |
| 0052015-017 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,5X17,0MM - FENDA CRUZ            |
| 0052015-018 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,5X18,0MM - FENDA CRUZ            |
| 0052015-019 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,5X19,0MM - FENDA CRUZ            |
| 0052015-020 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,5X20,0MM - FENDA CRUZ            |
| 0052018-003 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,8X3,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ  |
| 0052018-004 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,8X4,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ  |
| 0052018-005 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,8X5,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ  |
| 0052018-006 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,8X6,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ  |
| 0052018-007 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,8X7,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ  |
| 0052018-008 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,8X8,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ  |
| 0052018-009 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,8X9,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ  |
| 0052018-010 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,8X10,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ |
| 0052018-011 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,8X11,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ |
| 0052018-012 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,8X12,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ |
| 0052018-013 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,8X13,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ |
| 0052018-014 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,8X14,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ |
| 0052018-015 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,8X15,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ |

| CÓDIGO E DESCRIÇÃO - ANCILARES                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 0052018-016 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,8X16,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ |
| 0052018-017 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,8X17,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ |
| 0052018-018 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,8X18,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ |
| 0052018-019 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,8X19,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ |
| 0052018-020 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,8X20,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ |
| 0052020-004 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X4,0MM - FENDA CRUZ              |
| 0052020-005 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X5,0MM - FENDA CRUZ              |
| 0052020-006 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X6,0MM - FENDA CRUZ              |
| 0052020-007 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X7,0MM - FENDA CRUZ              |
| 0052020-008 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X8,0MM - FENDA CRUZ              |
| 0052020-009 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X9,0MM - FENDA CRUZ              |
| 0052020-010 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X10,0MM - FENDA CRUZ             |
| 0052020-011 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X11,0MM - FENDA CRUZ             |
| 0052020-012 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X12,0MM - FENDA CRUZ             |
| 0052020-013 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X13,0MM - FENDA CRUZ             |
| 0052020-014 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X14,0MM - FENDA CRUZ             |
| 0052020-015 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X15,0MM - FENDA CRUZ             |
| 0052020-016 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X16,0MM - FENDA CRUZ             |
| 0052020-017 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X17,0MM - FENDA CRUZ             |
| 0052020-018 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X18,0MM - FENDA CRUZ             |
| 0052020-019 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X19,0MM - FENDA CRUZ             |
| 0052020-020 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X20,0MM - FENDA CRUZ             |
| 0052020-021 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X21,0MM - FENDA CRUZ             |
| 0052020-022 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X22,0MM - FENDA CRUZ             |
| 0052020-023 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X23,0MM - FENDA CRUZ             |
| 0052020-024 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X24,0MM - FENDA CRUZ             |
| 0052020-025 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X25,0MM - FENDA CRUZ             |
| 0052023-004 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,3X4,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ   |
| 0052023-005 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,3X5,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ   |
| 0052023-006 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,3X6,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ   |
| 0052023-007 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,3X7,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ   |
| 0052023-008 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,3X8,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ   |
| 0052023-009 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,3X9,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ   |
| 0052023-010 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,3X10,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ  |
| 0052023-011 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,3X11,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ  |
| 0052023-012 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,3X12,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ  |
| 0052023-013 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,3X13,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ  |
| 0052023-014 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,3X14,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ  |
| 0052023-015 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,3X15,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ  |
| 0052023-016 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,3X16,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ  |
| 0052023-017 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,3X17,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ  |
| 0052023-018 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,3X18,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ  |
| 0052023-019 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,3X19,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ  |
| 0052023-020 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,3X20,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ  |
| 0052023-021 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,3X21,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ  |
| 0052023-022 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,3X22,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ  |
| 0052023-023 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,3X23,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ  |
| 0052023-024 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,3X24,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ  |

| CÓDIGO E DESCRIÇÃO - ANCILARES                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 0052023-025 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,3X25,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ       |
| 0052024-006 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X6,0MM - FENDA CRUZ             |
| 0052024-007 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X7,0MM - FENDA CRUZ             |
| 0052024-008 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X8,0MM - FENDA CRUZ             |
| 0052024-009 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X9,0MM - FENDA CRUZ             |
| 0052024-010 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X10,0MM - FENDA CRUZ            |
| 0052024-011 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X11,0MM - FENDA CRUZ            |
| 0052024-012 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X12,0MM - FENDA CRUZ            |
| 0052024-013 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X13,0MM - FENDA CRUZ            |
| 0052024-014 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X14,0MM - FENDA CRUZ            |
| 0052024-015 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X15,0MM - FENDA CRUZ            |
| 0052024-016 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X16,0MM - FENDA CRUZ            |
| 0052024-017 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X17,0MM - FENDA CRUZ            |
| 0052024-018 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X18,0MM - FENDA CRUZ            |
| 0052024-019 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X19,0MM - FENDA CRUZ            |
| 0052024-020 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X20,0MM - FENDA CRUZ            |
| 0052024-021 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X21,0MM - FENDA CRUZ            |
| 0052024-022 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X22,0MM - FENDA CRUZ            |
| 0052024-023 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X23,0MM - FENDA CRUZ            |
| 0052024-024 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X24,0MM - FENDA CRUZ            |
| 0052024-025 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X25,0MM - FENDA CRUZ            |
| 0052024-026 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X26,0MM - FENDA CRUZ            |
| 0052024-027 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X27,0MM - FENDA CRUZ            |
| 0052024-028 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X28,0MM - FENDA CRUZ            |
| 0052024-029 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X29,0MM - FENDA CRUZ            |
| 0052024-030 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,4X30,0MM - FENDA CRUZ            |
| 0052027-006 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X6,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ  |
| 0052027-007 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X7,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ  |
| 0052027-008 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X8,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ  |
| 0052027-009 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X9,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ  |
| 0052027-010 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X10,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ |
| 0052027-011 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X11,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ |
| 0052027-012 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X12,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ |
| 0052027-013 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X13,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ |
| 0052027-014 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X14,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ |
| 0052027-015 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X15,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ |
| 0052027-016 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X16,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ |
| 0052027-017 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X17,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ |
| 0052027-018 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X18,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ |
| 0052027-019 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X19,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ |
| 0052027-020 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X20,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ |
| 0052027-021 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X21,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ |
| 0052027-022 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X22,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ |
| 0052027-023 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X23,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ |
| 0052027-024 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X24,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ |
| 0052027-025 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X25,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ |
| 0052027-026 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X26,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ |
| 0052027-027 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X27,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ |

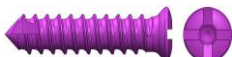
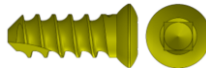
|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

| CÓDIGO E DESCRIÇÃO - ANCILARES                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 0052027-028 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X28,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ |
| 0052027-029 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X29,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ |
| 0052027-030 - PARAFUSO MANDIBULAR TI DIAM.2,7X30,0MM EMERGÊNCIA - FENDA CRUZ |
| 0052115-003 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,5X3,0MM AUTOPERFURANTE - FENDA CRUZ   |
| 0052115-004 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,5X4,0MM AUTOPERFURANTE - FENDA CRUZ   |
| 0052115-005 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,5X5,0MM AUTOPERFURANTE - FENDA CRUZ   |
| 0052115-006 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,5X6,0MM AUTOPERFURANTE - FENDA CRUZ   |
| 0052115-007 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,5X7,0MM AUTOPERFURANTE - FENDA CRUZ   |
| 0052115-008 - PARAFUSO MICRO TI DIAM.1,5X8,0MM AUTOPERFURANTE - FENDA CRUZ   |
| 0052120-004 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X4,0MM AUTOPERFURANTE - FENDA CRUZ    |
| 0052120-005 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X5,0MM AUTOPERFURANTE - FENDA CRUZ    |
| 0052120-006 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X6,0MM AUTOPERFURANTE - FENDA CRUZ    |
| 0052120-007 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X7,0MM AUTOPERFURANTE - FENDA CRUZ    |
| 0052120-008 - PARAFUSO MINI TI DIAM.2,0X8,0MM AUTOPERFURANTE - FENDA CRUZ    |

## COMBINAÇÃO INDICADA ENTRE PLACAS/MALHAS/ TELAS E PARAFUSOS

As Placas Especiais CMF EVO Maxifix estão relacionadas aos seguintes componentes ancilares (Registro Anvisa, à parte) apresentados no Quadro 5 e 6.

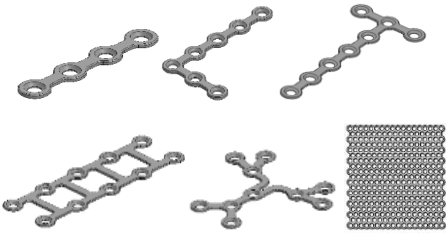
Quadro 5 – Relação dos ancilares compatíveis com as Placas Especiais CMF EVO Maxifix

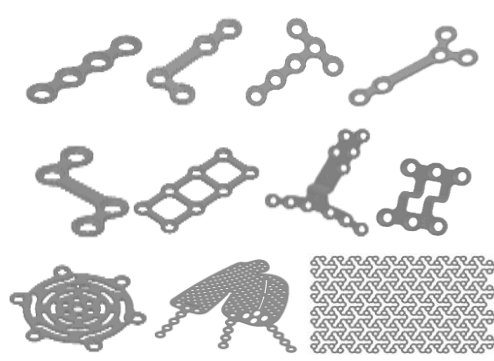
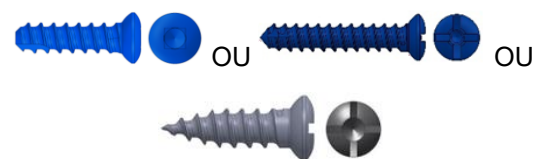
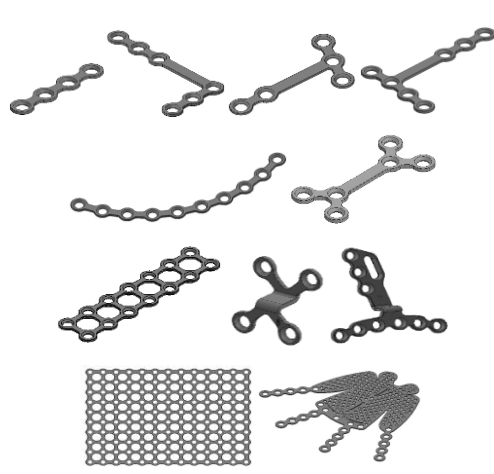
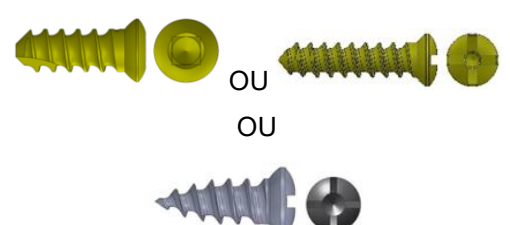
| Objeto Registro         | Ancilares                     |                                                                                      |                                   |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Placas / Malhas / Telas | Códigos ancilares (Parafusos) |                                                                                      | Registro Anvisa                   |
| Nano<br>00925XX-XXX     | Ø1,2mm – 0052012-003 a 010    |  | Em desenvolvimento<br>80083650XXX |
|                         | Ø1,2mm – 0052112-003 a 010    |  |                                   |
| Micro<br>00921XX-XXX    | Ø1,5mm – AB35 0 300 a 350     |  | 80083650024                       |
|                         | Ø1,5mm – 0052015-003 a 020    |  |                                   |
|                         | Ø1,5mm – 0052115-003 a 008    |  |                                   |
|                         | Ø1,8mm – AB35 0 360 a 410     |  |                                   |
|                         | Ø1,8mm – 0052018-003 a 020    |  |                                   |
| Mini<br>00928XX-XXX     | Ø2,0mm – AB35 0 420 a 490     |  | 80083650024                       |
|                         | Ø2,0mm – 0052020-004 a 025    |  |                                   |

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

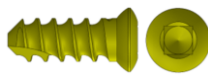
| Objeto Registro                 | Ancilares                     |                 |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Placas / Malhas / Telas         | Códigos ancilares (Parafusos) | Registro Anvisa |
|                                 | Ø2,0mm – 0052120-004 a 008    |                 |
|                                 | Ø2,3mm – AB35 0 500 a 570     |                 |
|                                 | Ø2,3mm – 0052023-004 a 025    |                 |
| Reconstrução<br><br>00929XX-XXX | Ø2,4mm – AB35 0 580 a 670     | 80083650024     |
|                                 | Ø2,4mm – 0052024-006 a 030    |                 |
|                                 | Ø2,7mm – AB35 0 680 a 770     |                 |
|                                 | Ø2,7mm – 0052027-006 a 030    |                 |

Quadro 6 – Ilustração de exemplos de modelos comerciais de Placas Especiais CMF EVO Maxifix com seus respectivos ancilares

| Objeto Registro - Placas / Malhas / Telas                                                                     | + | Ancilares - Parafusos                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nano (00925XX-XXX)<br><br> | + | Parafusos Ø1,2mm<br>(0052012-003 a 010 / 0052112-003 a 010)<br><br> |

| Objeto Registro - Placas / Malhas / Telas                                                                                                 | + | Ancilares - Parafusos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">Micro (00921XX-XXX)</p>  | + | <p style="text-align: center;">Parafusos Ø1,5mm<br/>(AB35 0 300 a 350 / 0052015-003 a 020 / 0052115-003 a 008)</p>  <p style="text-align: center;">***** OU *****</p> <p style="text-align: center;">Parafusos Ø1,8mm<br/>(AB35 0 360 a 410 / 0052018-003 a 020)</p>  |
| <p style="text-align: center;">Mini (00928XX-XXX)</p>  | + | <p style="text-align: center;">Parafusos Ø2,0mm<br/>(AB35 0 420 a 490 / 0052020-004 a 025 / 0052120-004 a 008)</p>  <p style="text-align: center;">***** OU *****</p> <p style="text-align: center;">Parafusos Ø2,3mm<br/>(AB35 0 500 a 570 / 0052023-004 a 025)</p>                                                                                    |

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

| Objeto Registro - Placas / Malhas / Telas                                                                            | + | Ancilares - Parafusos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      |   |  OU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Reconstrução (00929XX-XXX)<br><br> | + | Parafusos Ø2,4mm<br>(AB35 0 580 a 670 / 0052024-006 a 030)<br><br> OU <br><br>***** OU *****<br><br>Parafusos Ø2,7mm<br>(AB35 0 680 a 770 / 0052027-006 a 030)<br><br> OU  |

## 2.4. Material de Apoio

O Quadro 7 apresentado a seguir, refere-se aos instrumentais utilizados como apoio para a implantação das Placas Especiais CMF EVO Maxifix. Os instrumentais abaixo não são objetos desse registro, ou seja, são notificados separadamente, portanto, devem ser adquiridos separadamente e sempre da Sartori, para não ocorrer incongruência entre os encaixes.

Quadro 7 – Instrumentais de apoio

| Anvisa N°   | Nome comercial                          |
|-------------|-----------------------------------------|
| 80083650035 | Brocas                                  |
| 80083650057 | Instrumental Cirúrgico – Aço Inoxidável |

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

Os instrumentais são fornecidos descontaminados, porém não esterilizados. A esterilização inadequada do instrumental cirúrgico pode causar infecção cruzada.

Os instrumentais cirúrgicos estão sujeitos a desgastes durante a sua utilização normal podendo, portanto, quebrar ou se desgastar. Os instrumentais devem ser verificados regularmente, para análise de possíveis desgastes e danos.

Para mais informações acerca do instrumental, consulte o distribuidor/fornecedor do produto.

### 3. COMPOSIÇÃO

Os modelos comerciais das Placas Especiais CMF EVO Maxifix são fabricados de Titânio Puro Grau 2, conforme as especificações da norma ASTM F67. O Quadro 8 descreve as características da matéria-prima utilizada na fabricação dos modelos comerciais das Placas Especiais CMF EVO Maxifix.

*Quadro 8 - Características das matérias-primas das Placas Especiais CMF EVO Maxifix*

| Componente                | Matéria-prima       | Norma    | Forma | Condição | Dimensão (mm)               |
|---------------------------|---------------------|----------|-------|----------|-----------------------------|
| Placas / Malhas/<br>Telas | Titânio Puro Grau 2 | ASTM F67 | Chapa | Recozido | Conforme<br>desenho técnico |

Os acessórios Cursor para Mini Placa Sagital EVO Tipo Sliding e Cursor para Mini Placa Sagital EVO Tipo Slider são fabricados em Liga de Titânio Ti6Al4V, conforme as especificações da norma ASTM F136. Com exceção do Cursor para Mini Placa Sagital EVO Tipo Splitfix que é fabricado com Titânio Puro Grau 2, conforme as especificações da norma ASTM F67. O Quadro 9 descreve as características das matérias-primas utilizadas na fabricação dos acessórios.

*Quadro 9 - Características das matérias-primas – Cursores*

| Componente                 | Matéria-prima              | Norma     | Forma                      | Condição | Dimensão (mm)               |
|----------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|----------|-----------------------------|
| Cursor Sliding e<br>Slider | Liga de Titânio<br>Ti6Al4V | ASTM F136 | Barra (perfil<br>circular) | Recozido | Conforme<br>desenho técnico |
| Cursor Splitfix            | Titânio Puro Grau 2        | ASTM F67  | Chapa                      | Recozido | Conforme<br>desenho técnico |

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

#### 4. INDICAÇÃO DE USO/ FINALIDADE

As Placas Especiais CMF EVO Maxifix são utilizadas em procedimentos cirúrgicos para fixação óssea exclusiva nas regiões da mandíbula, maxila e crânio humano. As indicações são:

- Reconstruções e fraturas no terço médio da face;
- Reconstruções e fraturas maxilares e do tipo Le Fort;
- Reconstruções e fraturas mandibulares e de mento;
- Cirurgias Ortognáticas maxilares e/ou mandibulares;
- Reconstruções associadas a ressecção de Tumores;
- Reconstruções e fraturas dos ossos do crânio, cranioplastias e craniotomias.

##### 4.1. Desempenho Pretendido do Dispositivo Médico

O desempenho pretendido, incluindo as indicações de uso e as contraindicações do dispositivo médico foram estabelecidos considerando os requisitos normativos aplicáveis, a literatura científica e clínica disponível, os resultados de ensaios validados e os princípios atualizados da tecnologia.

##### 4.2. Propósito Pretendido

O propósito pretendido das Placas Especiais CMF EVO Maxifix é proporcionar fixação de segmentos ósseos, bem como garantir a estabilidade e restaurar as funções da face e crânio. Além disso, as placas também têm a função de auxiliar no reposicionamento de ossos em procedimentos de reconstrução.

##### 4.3. Fundamentos de seu Funcionamento

A ação das placas no osso é estabilizar, restringir a movimentação dos fragmentos ósseos, auxiliar na redução de fraturas, corrigir o alinhamento, promovendo estabilidade à região afetada da mandíbula, maxila e/ou crânio humano.

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

O desenvolvimento das placas fundamenta-se nas cargas e forças as quais estão sujeitas e no mecanismo da consolidação óssea. As placas foram projetadas para suportarem cargas de compressão, flexão, tração, torção e cisalhamento, proporcionando estabilidade estrutural e também alívio de cargas mecânicas sobre os ossos da mandíbula, maxila e crânio.

## 5. PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO MÉDICO, ASSIM COMO SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

### 5.1. Contraindicações

A seguir estão listadas as contraindicações relativas e absolutas para a utilização das Placas Especiais CMF EVO Maxifix, ficando a cargo do cirurgião responsável, após um estudo minucioso do caso, a indicação do procedimento cirúrgico:

- Infecções ativas que possam dar origem a complicações;
- Condição clínica pré-operatória desfavorável;
- Pacientes com sensibilidade a corpos estranhos, sendo que nestes casos testes deverão ser realizados;
- Pacientes que não querem ou estão impossibilitados de seguir as instruções pré-operatórias devido às condições que apresentam (mental ou física);
- Pacientes que fazem uso de substâncias entorpecentes, alcoólicas ou fumo;
- Pacientes em estado geral comprometido e/ou imunodeprimidos impossibilitados de se submeter a um procedimento cirúrgico;
- Desordens metabólicas ou sistêmicas, ou tratamentos médicos que levam à deterioração progressiva dos ossos (terapias com corticóides);
- Estoque ósseo comprometido por doença, infecção ou implantação prévia, que não pode fornecer apoio adequado e/ou fixação dos implantes;
- Imaturidade esquelética;
- Pacientes com radioterapia pré-operatória possuem um risco aumentado de complicações relacionadas com as placas para CMF;
- Pacientes com histórico de alergia ao titânio;
- Pacientes que apresentam tumores malignos ou metástases;
- Pacientes com cobertura tissular pobre na região afetada;

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

- Utilização para fixação de outros ossos aqueles não mencionados na indicação de uso do produto.

## 5.2. Precauções e Advertências

Para a utilização do dispositivo médico a equipe responsável deve considerar as seguintes precauções e advertências:

- Antes da utilização do implante é necessária a leitura completa das instruções de uso do produto assim como a análise detalhada do procedimento cirúrgico a ser adotado. Alertamos que é necessário observar a correlação entre a versão da Instrução de Uso disponível no site, ou impressa, com a versão indicada no rótulo do produto;
- A má seleção dos implantes pode acarretar resultados indesejados, o cirurgião deve possuir conhecimento do produto e sua técnica de manuseio;
- A correta colocação das placas é primordial para a estabilização bem-sucedida de fraturas ou osteotomias;
- São de responsabilidade do cirurgião o conhecimento e domínio da técnica a serem utilizados, pois os resultados clínicos e a durabilidade dos implantes são extremamente dependentes de que exista uma técnica cirúrgica precisa;
- Erros no procedimento cirúrgico, como má manipulação e técnica de aplicação incorreta podem ocasionar a falha ou soltura do implante, pois nenhum implante corrige os inconvenientes decorrentes de uma técnica cirúrgica inadequada;
- O produto não deve ser utilizado caso não se consiga um suporte ósseo adequado que garanta a estabilidade do implante;
- O limite para a moldagem da placa é de 105°. Uma vez moldada não pode ser retornada a sua forma original, o que pode acarretar fratura da mesma e consequentemente falha na função do dispositivo médico;
- O dispositivo médico foi desenvolvido para fixação exclusiva dos ossos da região do crânio-maxilo-facial. A utilização do produto em outras regiões não foi prevista no projeto dos implantes e, portanto, podem acarretar sua falha, tanto por cargas estáticas quanto cíclicas (fadiga). Sendo assim, a utilização do produto para indicações que não correspondam às previamente mencionadas são contraindicadas;

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

- À critério do médico pode-se fazer uso de antibioticoterapia profilática pré e peri operatória, bem como antibioticoterapia em casos em que haja predisposição local e/ou sistêmica ou ocorrência de infecções;
- A função principal de um implante durante o processo de osteossíntese é auxiliar na proteção mecânica do local afetado, entretanto, não possui o desempenho do osso normal, portanto pode quebrar, deformar ou soltar, em decorrência de esforços ou atividades excessivas e carga precoce e outras situações;
- Dispositivo médico de uso único - não reutilizar, PROIBIDO REPROCESSAR;
- Não utilizar o dispositivo se a embalagem estiver aberta ou danificada;
- Este produto deve ser manipulado por equipe especializada e devidamente habilitada;
- A correta seleção e colocação dos implantes são primordiais para a estabilização bem-sucedida da região tratada;
- A utilização em pacientes com predisposição a desobedecer às orientações médicas e restrições pós-operatórias, como crianças e adolescentes, com alterações neurológicas ou dependentes químicos, representam um risco maior para falha do dispositivo médico;
- Durante o período pós-operatório, os riscos de falha do produto são maiores quando carregado além de sua capacidade funcional, contrariando as orientações médicas;
- O paciente deve fazer acompanhamento médico periódico para verificar as condições do implante, osso e do tecido adjacente;
- O dispositivo médico foi projetado para ser utilizado com instrumentais desenvolvidos para este fim, ou seja, necessários para inserção e posicionamento adequado do dispositivo. Quaisquer improvisações com diferentes instrumentais ou técnica cirúrgica imprecisa, podem comprometer a qualidade da fixação e/ou posicionamento dos implantes;
- Os implantes nunca devem ser reutilizados, embora pareçam não danificados, as tensões prévias e que os mesmos foram submetidos, podem originar imperfeições que reduziram o tempo de vida útil do produto num reimplante e/ou provocar infecção, rejeição e quebra;
- O sucesso de um implante de fixação metálica depende do manuseio cuidadoso e habilidade do cirurgião. Além disso, é necessário cuidado para não danificar a

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

superfície do implante (arranhar ou fazer fenda), durante o processo de inclinação, ao utilizar instrumentos cortantes.

### 5.3. Restrições de Uso

- Produto de uso único, não reusar;
- O produto deve ser desprezado caso a embalagem esteja violada;
- Antes da utilização, o cirurgião deve realizar uma análise detalhada dos instrumentais (material de apoio e notificados separadamente) que irá utilizar para a colocação do produto. Esses instrumentais devem estar íntegros e completos.

### 5.4. Possíveis Efeitos Adversos

Os efeitos indesejáveis ou anomalias a seguir indicados são susceptíveis à ocorrência. No entanto, relatórios clínicos e outras referências científicas apoiam que estes eventos adversos ou patologias são recuperados naturalmente ao longo do tempo ou são adequadamente tratados com terapia secundária simples. Os eventos adversos relatados na literatura incluem, mas não estão limitados a:

- Palpabilidade;
- Dor;
- Infecção;
- Impacto nos dentes;
- Remoção dos dentes;
- Remoção das placas;
- Alergia ao titânio;
- Periodontite;
- Perda da placa;
- Fratura da placa;
- Deiscência;
- Sinusite maxilar;
- Sensibilidade nos nervos;
- Exposição das raízes dentárias;
- Deslocamento das placas;

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

- Má oclusão;
- Redução da abertura bucal;
- Redução da mobilidade maxilar;
- Comprometimento da força de mordida;
- Má estabilidade da fratura;
- Exposição das placas.

### 5.5. Informações ao usuário do produto

A equipe médica deve orientar o paciente:

- Antes da utilização do produto é necessária a leitura completa das instruções de uso do produto assim como a análise detalhada do procedimento cirúrgico a ser adotado. Alertamos que é necessário observar a correlação entre a versão da Instrução de Uso disponível no site, ou impressa, com a versão indicada no rótulo do produto;
- O fato que o produto não substitui e não possui as mesmas características do osso normal e que, portanto, pode quebrar-se, deformar-se ou soltar-se em decorrência de esforços ou atividades excessivas, de carga precoce e outras situações que envolvam excesso de solicitação mecânica;
- Os cuidados adequados e as restrições durante o período pós-operatório. A capacidade e a vontade do paciente em seguir essas orientações constituem um dos aspectos mais importantes em um procedimento cirúrgico;
- A necessidade de acompanhamento médico periódico para checar as condições do implante, osso implantado e tecidos adjacentes;
- A necessidade de uma cirurgia de revisão, em casos de soltura e/ou fratura de componentes;
- A utilização em pacientes com predisposição a desobedecer às orientações médicas e restrições pós-operatórias, como crianças e adolescentes, com alterações neurológicas ou dependentes químicos, representam um risco maior para falha do produto;
- A necessidade de informar ser portador de implante em caso de se submeter a exame de Ressonância Magnética.

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

## 5.6. Informações de Segurança do Produto em Ambiente de Ressonância Magnética (RM)

As informações de segurança demonstraram que os dispositivos são CONDICIONAIS por RM. Um paciente pode ser digitalizado com segurança em um scanner de RM que atenda às seguintes condições:

- Campo magnético estático de 1,5 Tesla e 3,0 Tesla, apenas.
- Campo de gradiente espacial máximo de 20 T/m.
- Taxa máxima de absorção específica (SAR) média: 2 W/kg durante 15 minutos.

## 5.7. Instruções de Uso

Para a correta utilização do produto, as seguintes instruções devem ser seguidas:

- Este produto deve ser manipulado com os devidos cuidados em locais adequados, por equipe especializada e devidamente habilitada;
- Os cuidados com este material são de responsabilidade de pessoal habilitado, os quais devem seguir normalizações e/ou demais regulamentos locais aplicáveis;
- O produto somente deve ser utilizado por profissionais da área médico-hospitalar, treinados e especializados em procedimentos para CMF, sendo de responsabilidade do cirurgião a escolha e o domínio da técnica a ser aplicada;
- Para a aplicação do produto é necessário o uso de instrumental específico, indicado no tópico “Material de Apoio”, não devendo, devido à possibilidade de incompatibilidade dimensional e/ou funcional, ser utilizado com outros instrumentos que não os indicados pelo fabricante;
- Antes da cirurgia, o cirurgião deve realizar um rigoroso planejamento pré-operatório, com o estudo detalhado de cada caso e paciente. Para um planejamento completo o cirurgião deve conhecer em detalhes as opções que este produto oferece.

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

### 5.8. Manuseio

- A correta manipulação das Placas Especiais CMF EVO Maxifix e seus acessórios é extremamente importante, para evitar danos aos produtos médicos;
- O manuseio deste produto deve ser realizado exclusivamente por profissionais da área médico-hospitalar, treinados e especializados para este procedimento, e de acordo com as normas e práticas hospitalares adequadas a cada caso.
- Antes de qualquer utilização, é fundamental certificar-se que a embalagem está íntegra e a selagem não apresenta danos ou sinais de violação. Também é necessário confirmar que o prazo de validade não expirou.

### 5.9. Armazenamento

As Placas Especiais CMF EVO Maxifix devem ser armazenadas e conservadas em:

| CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO                                                  | SIMBOLOGIA APRESENTADA NA ROTULAGEM<br>(CONFORME ABNT NBR 15223-1)                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Manter seco                                                                 |  |
| Proteger de luz solar                                                       |  |
| Não usar se a embalagem estiver danificada e consultar as instruções de uso |  |
| Frágil, manusear com cuidado                                                |  |

### 5.10. Transporte

- O produto deve ser transportado com o devido cuidado, de forma a impedir qualquer dano ou alteração às suas características físicas e embalagens;

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

- Evite a queda do produto durante o transporte;
- O ambiente deve ser limpo, arejado, seco e livre da ação de intempéries;
- O agente transportador deve ser informado do conteúdo e sobre o prazo de entrega dele;
- Verifique sempre a integridade da embalagem. Não usar se a embalagem estiver danificada e consultar as instruções de uso.

### 5.11. Limpeza

As Placas Especiais CMF EVO Maxifix são fornecidas limpas, e devem ser desembaladas em ambiente controlado e logo em seguida serem esterilizadas, de forma a preservar suas condições de limpeza.

### 5.12. Esterilização

As Placas Especiais CMF EVO Maxifix são fornecidas na condição de produto Não Estéril, embaladas unitariamente, devendo ser retiradas de sua embalagem original e acondicionadas em recipiente apropriado para esterilização, antes da sua utilização.

O método indicado é a esterilização por calor úmido (autoclave).

Os implantes são fornecidos descontaminados pelo fabricante, porém devem ser manipulados e esterilizados adequadamente, conforme informações a seguir, de forma a evitar a contaminação do implante e consequentemente infecção do paciente.

Assim como o processo de limpeza do produto antes da embalagem foi validado pelo fabricante Sartori, o processo de esterilização no qual o produto é submetido – calor úmido (autoclave), também se encontra validado, demonstrando segurança e eficácia em sua aplicação.

### PARÂMETROS PARA ESTERILIZAÇÃO

O método recomendado de Esterilização é por calor úmido (autoclave) conforme parâmetros abaixo:

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

Quadro 10 – Parâmetros para Esterilização – Calor úmido (autoclave)

| Método                  | Temperatura   | Tempo de Exposição                                                                   |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Calor úmido (autoclave) | 134°C - 137°C | <b>4 minutos</b><br>(contados a partir do momento em que a temperatura for atingida) |

### 5.13. Validade

O prazo de validade é de 05 anos a partir da data de fabricação.

A data de fabricação, o prazo de validade, o código e número de lote devem ser consultados na rotulagem do produto.

### 5.14. Descarte

Após a utilização e a eventual remoção do paciente, as Placas Especiais CMF EVO Maxifix devem ser descartadas pelo hospital.

Recomenda-se que o produto seja completamente descaracterizado e inutilizado para o uso. Essa descaracterização é de inteira responsabilidade da instituição hospitalar.

Após a descaracterização, os produtos devem ser identificados como sendo impróprios para o uso, e descartados de acordo com a Resolução RDC nº 222/2018 que dispõe sobre as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde; e pela ABNT NBR ISO 12891-1 “Remoção e análise de implantes cirúrgicos - Parte 1 - Remoção e manuseio”.

O produto que for danificado durante o procedimento cirúrgico ou apresentar a embalagem danificada também deve ser descartado seguindo as orientações anteriormente descritas.

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

## 6. FORMA DE APRESENTAÇÃO DO DISPOSITIVO MÉDICO

### 6.1. Embalagem

Todos os modelos comerciais de Placas Especiais CMF EVO Maxifix são disponibilizados para comercialização na condição NÃO ESTÉRIL, embalados unitariamente.

As Placas são acondicionadas em embalagens plásticas EPD (PP/PE 45 µm) seladas termicamente e rotuladas, contendo as informações necessárias para a identificação do produto. Dentro da embalagem do produto, seguem cinco vias da etiqueta de rastreabilidade e um alerta de instrução de uso.

As dimensões externas das embalagens plásticas EPD utilizadas são 90 (largura) x 173 mm (comprimento) ou 75 (largura) x 280 mm (comprimento), dependendo do dimensional do produto.

O acessório também é acondicionado em embalagem plástica EPD (PP/PE 45 µm) selada termicamente e rotulada, contendo as informações necessárias para a identificação do produto. A dimensão externa da embalagem plástica EPD utilizada é 90 (largura) x 173 mm (comprimento).

*Figura 1 – Imagem ilustrativa da embalagem plástica EPD*



Na superfície da embalagem contém informações que identificam o produto, como código, descrição, número de lote, número do registro do produto na ANVISA etc. Dentro da embalagem são disponibilizadas 5 etiquetas de rastreabilidade e 1 alerta de instrução de uso.

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

A superfície da embalagem também apresenta as seguintes informações:  
Instrução de Uso disponível em [http://www.sartori.ind.br/instrucao\\_uso](http://www.sartori.ind.br/instrucao_uso). Reg. ANVISA: 8008365XXXX – Revisão: XX. Para obter a versão impressa sem custo de emissão e envio, contatar +55 19 3538-1910 ou e-mail: [info@sartori.ind.br](mailto:info@sartori.ind.br).

## 6.2. Rastreabilidade

A rastreabilidade das Placas Especiais CMF EVO Maxifix é realizada por meio das informações apresentadas nas etiquetas de rastreabilidade, nas quais estão disponíveis informações a respeito do fabricante, nome e modelo comercial do produto, número de lote, código do produto e o número de registro Anvisa, possibilitando traçar o caminho reverso até a fabricação do produto. Desse modo é possível verificar a matéria-prima, seus fornecedores e informações sobre os controles de qualidade realizados do início ao fim do processo de fabricação. Na embalagem dos componentes são fornecidas 5 unidades de etiqueta de rastreabilidade e sua fixação é obrigatória no prontuário clínico, no documento a ser entregue ao paciente, e na documentação fiscal que gera a cobrança.

O modelo de etiqueta de rastreabilidade das Placas Especiais CMF EVO Maxifix, é apresentado na Figura 2.

*Figura 2 - Modelo de etiqueta de rastreabilidade das Placas Especiais CMF EVO Maxifix*

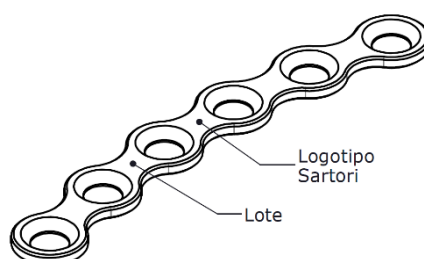
|                                                                                     |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Luiz Guilherme Sartori &amp; Cia Ltda</b>                                        |                         |
| <b>Lote: XXXXXX</b>                                                                 | <b>Fab.: XX/XX/20XX</b> |
| <b>Código: 0092802-064</b>                                                          | <b>Val.: XX/XX/20XX</b> |
| <b>Reg.Anvisa:</b>                                                                  |                         |
| <b>MINI PLACA EVO PONTE STR 6 F MEDIA</b>                                           |                         |
|  | <b>Matéria-prima:</b>   |
|                                                                                     | <b>TITANIO PURO F67</b> |
| <b>(01)XXXXXXXX (17)XXXXXXXX(10)XXXXX</b>                                           |                         |

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

### 6.3. Gravação

Os modelos comerciais das Placas Especiais CMF EVO Maxifix e seus acessórios, além da rastreabilidade por meio de dados impressos, também recebe uma gravação a laser com a logomarca do fabricante e número do lote. Caso seja necessária a retirada do implante do corpo do paciente, todas as informações contidas no dispositivo permanecerão inalteradas.

Figura 3 – Imagem ilustrativa de um exemplo de local de gravação a laser.



### 6.4. Legenda dos símbolos contidos na rotulagem

As simbologias apresentadas no rótulo do componente estão ilustradas no Quadro 11 abaixo e seguem denominações em conformidade com as normas ABNT NBR ISO 15223-1 e ASTM F2503.

Quadro 11 – Símbolos segundo ABNT NBR ISO 15223-1 e ASTM F2503

|                                                                                     |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | Número de catálogo (código do produto embalado)        |
|  | Quantidade do produto embalado                         |
|  | Código de remessa (número de lote do produto embalado) |
|  | Data de Fabricação                                     |
|  | Usar até a data (validade)                             |

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

|                                                                                     |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|    | Não estéril                                                                 |
|    | Não Reusar                                                                  |
|    | Seguro Condicionalmente – Ressonância Magnética                             |
|    | Consultar Instruções de uso ou consultar instruções eletrônicas de uso      |
|    | Fabricante                                                                  |
|   | Não usar se a embalagem estiver danificada e consultar as instruções de uso |
|  | Proteger de luz solar                                                       |
|  | Manter seco                                                                 |
|  | Frágil, manusear com cuidado                                                |
|  | Dispositivo médico                                                          |
|  | Identificador único do dispositivo                                          |

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

## 6.5. Alerta de Instrução de Uso

Todos os produtos são acompanhados de um alerta de Instrução de Uso, contendo todas as informações para acesso no site do fabricante, além de informações de solicitação de Instrução de Uso no formato impresso.

Figura 4 – Modelo de Alerta de Instrução de Uso

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>ALERTA DE INSTRUÇÕES DE USO</b></p> <p>Conforme Resolução RDC 751 de 15.09.2022, que estabelece requisitos para disponibilização de <u>Instrução de Uso em formato não impresso</u> de dispositivos médicos, seguem neste alerta as informações para acesso das Instruções de Uso no site do fabricante do produto.</p> <p>As Instruções de Uso estão disponíveis em: <a href="https://sartori.ind.br/instrucao_uso">https://sartori.ind.br/instrucao_uso</a></p> <p>Para a visualização dos arquivos utilize o software Adobe Acrobat Reader. As Instruções de Uso estão indexadas no website por meio do número de Registro/ Notificação ANVISA e respectivo nome comercial (descrição do registro).</p> <p>Todas as Instruções de Uso possuem o Nº do Registro/Notificação ANVISA e a revisão na primeira página do documento. O usuário deve atentar-se para a correta revisão da Instrução de Uso, informada no rótulo do produto.</p> <p>Para Instrução de Uso no formato impresso, o consumidor pode solicitar sem custo adicional (inclusive de envio), por meio do telefone +55 19 3538-1910 ou do e-mail: <a href="mailto:info@sartori.ind.br">info@sartori.ind.br</a>.</p> <p align="right">(FSQ 095.07.01)</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6.6. Reclamação e Atendimento ao Cliente

Todo cliente ou usuário dos produtos que fazem parte desse Sistema que tiver dúvidas ou queira maiores esclarecimentos sobre os serviços e/ou produtos oferecidos, poderá entrar em contato com a empresa Luiz Guilherme Sartori & Cia Ltda através dos dados contidos nas instruções de uso e rotulagem.

Para o envio de produtos explantados ao fabricante para análise, os mesmos devem estar limpos e estéreis, e devem ser utilizadas embalagens que mantenham a integridade física dos implantes.

As embalagens devem conter todas as informações necessárias para a identificação, condições de manuseio, métodos de limpeza e desinfecção utilizados, e também a descrição e o número do lote dos produtos médicos explantados.

|                                                                                   |                                                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | <b>INSTRUÇÃO DE USO</b><br>Placas Especiais CMF EVO Maxifix | <b>Código:</b>  | IU.0124    |
|                                                                                   |                                                             | <b>Revisão:</b> | 01         |
|                                                                                   |                                                             | <b>Data:</b>    | 21/10/2026 |

## 6.7. Notificação de eventos adversos

Na ocorrência de qualquer evento adverso ou a necessidade de registrar queixa técnica, a SARTORI e a Anvisa devem ser notificadas por meio dos seguintes canais:

- SARTORI: <https://sartori.ind.br>
- Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) através do telefone +55 (19) 3538-1910 ou pelo e-mail: [info@sartori.ind.br](mailto:info@sartori.ind.br)
- Sistema NOTIVISA (Anvisa): [www.gov.br/anvisa](http://www.gov.br/anvisa)

### Fabricante/Detentor do Registro:

LUIZ GUILHERME SARTORI E CIA LTDA.

Avenida Brasil, nº 13500 - Distrito de Ajapi - Rio Claro - SP

CEP: 13508-500 Tel.: (19) 3538-1910

CNPJ: 04.861.623/0001-00 - Indústria Brasileira

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: (19) 3538-1910

e-mail: [info@sartori.ind.br](mailto:info@sartori.ind.br)

Registro ANVISA nº: 80083650124

Responsável Técnico: Engº Sergio Roberto Alves de Oliveira

CREA/SP: 5070105936

| HISTÓRICO DE REVISÕES INSTRUÇÃO DE USO |                                                 |            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| REVISÃO                                | DESCRIÇÃO                                       | DATA       |
| 01                                     | Adequação da Instrução de Uso ao novo template. | 21/10/2026 |